

KOIOS CARE

PARKIWATCH

Mode d'emploi

Pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson

Mode d'emploi

Nom du dispositif	PARKIWATCH
Version du logiciel	1.0.0
Fabricant	Koios Care (BV), Filip Williotstraat 9, 2600 Anvers, Belgique
Date d'émission	01/09/2026
Référence du mode d'emploi	PARKIWATCH.IFU.HCP.FR.002
Version	3

À propos de ce manuel

Ce document contient des informations essentielles pour une utilisation sûre et efficace du système PARKIWATCH. Il est destiné aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Un mode d'emploi distinct existe pour les professionnels de santé. Les informations générales sur le système, les spécifications techniques et les mentions légales applicables à tous les utilisateurs figurent à la Section 3.

Mention légale

© 2025 KOIOS CARE. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, copiée, modifiée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de KOIOS CARE. KOIOS CARE et PARKIWATCH sont des marques commerciales de KOIOS CARE. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont utilisées à des fins éditoriales sans intention de contrefaçon.

Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre représentant local pour plus d'informations sur la disponibilité. KOIOS CARE s'efforce de fournir des informations aussi précises que possible, mais n'est pas responsable des erreurs typographiques. KOIOS CARE ne saurait en aucun cas être tenu responsable des pertes de bénéfices ou d'autres dommages commerciaux résultant ou présumés résulter de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser les informations, équipements, méthodes ou processus décrits dans ce document. Consultez les autorités nationales pour déterminer les exigences opérationnelles locales applicables.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être signalé à KOIOS CARE et à l'autorité compétente du pays dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

KOIOS CARE se réserve le droit de modifier ce document sans préavis. La version originale de ce document est en anglais.

KOIOS CARE décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ce document si des modifications non autorisées ont été apportées à son contenu ou à sa mise en page.

Pour plus d'informations sur les produits KOIOS CARE, rendez-vous sur <https://www.koios.care>

Section 1 : Guide pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson (patients)

1.1 Qu'est-ce que PARKIWATCH ?

PARKIWATCH est une application logicielle qui fonctionne avec votre smartphone Android. PARKIWATCH nécessite que vous portiez une montre connectée ou un capteur de poignet d'un fabricant tiers qui collecte des données brutes de mouvement (accélérométrie). Vous devez également disposer d'un smartphone Android personnel répondant aux exigences techniques minimales décrites au paragraphe 1.4.2 pour installer et utiliser PARKIWATCH. PARKIWATCH est conçu pour compléter l'évaluation clinique de votre professionnel de santé en collectant passivement et en continu des informations en dehors d'un cadre clinique, entre les consultations.

1.1.1 Version du logiciel et conformité

Ce mode d'emploi s'applique spécifiquement à PARKIWATCH version 1.0.0. L'utilisation d'une version obsolète du logiciel peut entraîner des données inexactes ou des failles de sécurité. Vous pouvez vérifier votre version actuelle dans l'application PARKIWATCH sur votre smartphone, dans le menu de gauche, sous « À propos ».

Les mises à jour logicielles sont obligatoires pour la sécurité, la sûreté et les performances continues du dispositif. Assurez-vous que « Mises à jour automatiques » est activé dans le Google Play Store pour PARKIWATCH.

1.2 Ce que fait PARKIWATCH (Usage prévu)

PARKIWATCH est un logiciel en tant que dispositif médical (SaMD) destiné à la détection passive continue et à l'évaluation quantitative de schémas cinématiques représentatifs de :

- **(i) tremblement**, défini comme des mouvements oscillatoires ;
- **(ii) bradykinésie**, définie comme une réduction de la vitesse et de l'amplitude des mouvements lors de l'activité volontaire des membres supérieurs ;
- **(iii) dyskinésie**, définie comme des mouvements hyperkinétiques irréguliers et non rythmiques correspondant aux mouvements involontaires induits par la lévodopa ;

chez les adultes atteints de la maladie de Parkinson.

Équipement requis : PARKIWATCH nécessite que vous portiez une montre connectée ou un capteur de poignet d'un fabricant tiers collectant des données brutes de mouvement (accélérométrie). Vous devez disposer d'un smartphone Android personnel pour installer et utiliser l'application PARKIWATCH pour Android.

Compatibilité : PARKIWATCH est compatible avec les montres connectées ou les capteurs de poignet tiers équipés d'une centrale inertielle (IMU) fournissant des données brutes d'accéléromètre.

PARKIWATCH traite des données d'accéléromètre triaxial collectées par des montres connectées ou des dispositifs de poignet tiers. PARKIWATCH applique des algorithmes validés de traitement du signal et d'apprentissage statistique pour générer une sortie continue et longitudinale : les mesures cinématiques validées. Celles-ci sont mises à disposition des professionnels de santé via un tableau de bord Web et des rapports PDF. Les mesures cinématiques validées sont calculées en combinaison avec d'autres données numériques de santé de soutien.

PARKIWATCH n'est PAS destiné à diagnostiquer la maladie de Parkinson, à recommander ou modifier de manière autonome un traitement médicamenteux spécifique. Les résultats

sont complémentaires à l'évaluation clinique standard et au jugement du professionnel de santé traitant, et doivent être interprétés dans ce contexte.

1.3.1 Qui ne doit PAS utiliser PARKIWATCH (Contre-indications)

- Syndrome parkinsonien atypique, y compris l'atrophie multisystémique (AMS), la paralysie supranucléaire progressive (PSP) et la dégénérescence corticobasale (DCB).
- Syndromes parkinsoniens secondaires, y compris le parkinsonisme médicamenteux, le parkinsonisme vasculaire et le parkinsonisme par hydrocéphalie à pression normale.
- Tremblement essentiel ou autres troubles du mouvement non liés à la maladie de Parkinson susceptibles d'affecter la précision des données cinématiques.

1.3.2 Qui devrait utiliser PARKIWATCH

Ce système n'est destiné à vous que si :

(A) Vous êtes actuellement suivi et accompagné par un professionnel de santé qualifié (tel qu'un neurologue).

(B) Vous êtes physiquement et mentalement capable d'utiliser un smartphone et vous êtes disposé à porter quotidiennement, pendant vos heures d'éveil, une montre connectée ou un bracelet d'un fabricant tiers.

1.4 Pour commencer : configuration et installation

Téléchargement

Ouvrez le Google Play Store sur votre smartphone Android et recherchez « PARKIWATCH » de Koios Care. Touchez l'application pour la télécharger et l'installer.

Inscription / Connexion

Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour vous inscrire avec une adresse e-mail valide. Vous recevrez un e-mail de vérification avec un code de confirmation permettant de valider votre adresse et de vous connecter avec les informations fournies lors de l'inscription.

Autorisations et informations

L'application PARKIWATCH demande des autorisations pour accéder aux informations des capteurs, fonctionner en arrière-plan et envoyer des notifications. Ces autorisations sont nécessaires au bon fonctionnement du système. Des informations complémentaires comprennent le sexe, l'année de naissance et l'année du diagnostic de la maladie de Parkinson. Enfin, il vous est demandé avec quelle main vous mangez (gauche ou droite) et à quel poignet vous portez la montre connectée ou le capteur (gauche ou droit).

Coupler la montre connectée ou le capteur tiers

Reportez-vous à la documentation de la montre connectée ou du capteur de poignet tiers pour les instructions concernant la configuration correcte du dispositif. Par ailleurs, les instructions s'affichent à l'écran dans l'application Android sur votre smartphone.

Entrer en contact avec les professionnels de santé

Pour partager vos données, sélectionnez l'option « Professionnel de santé » dans le menu de gauche. Si votre médecin vous a communiqué une adresse e-mail, saisissez-la pour envoyer une demande de connexion. Si votre professionnel de santé a déjà initié la connexion, vous pouvez accepter ou refuser l'invitation dans le même menu. Une fois la

connexion active, vos données seront automatiquement partagées avec votre professionnel de santé pour examen.

Porter correctement le dispositif

Portez la montre connectée ou le capteur de poignet tiers fermement (mais confortablement) au poignet, comme prescrit par votre médecin. Consultez le manuel de l'utilisateur du fabricant pour des instructions sur le port de la montre ou du capteur.

1.4.1 Sécurité et confidentialité des données

Vous avez à tout moment le droit de consulter les données collectées ou de demander la suppression de votre compte. Pour cela, contactez support@koios.care.

1.4.2 Compatibilité matérielle et logicielle

PARKIWATCH est compatible avec les montres connectées et les capteurs de poignet tiers équipés d'une centrale inertielle (IMU) capable de fournir des données de mouvement tridimensionnelles via un accéléromètre avec une fréquence d'échantillonnage d'au moins 18 Hz.

Une liste des montres connectées et des capteurs de poignet tiers compatibles avec PARKIWATCH est disponible sur le site Web de Koios Care.

Pour assurer un fonctionnement correct, PARKIWATCH ne doit être utilisé que sur des dispositifs répondant aux exigences techniques minimales validées suivantes :

- Le système d'exploitation doit être Android 9.0 (SDK 28) ou supérieur.
- Bluetooth 5.0 (ou supérieur) et une connexion Internet active (Wi-Fi ou données mobiles).
- L'accès au Google Play Store est requis pour l'installation et les mises à jour obligatoires.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que le smartphone répond aux exigences matérielles et logicielles minimales décrites au paragraphe 1.4.2. L'utilisation sur des appareils ne répondant pas à ces spécifications peut entraîner des performances peu fiables.

1.5 Surveillance passive avec PARKIWATCH

PARKIWATCH fonctionne en arrière-plan et ne nécessite aucune attention, sauf pour répondre aux questionnaires.

Questionnaires

Si votre professionnel de santé le décide, PARKIWATCH vous enverra périodiquement une notification pour répondre à un bref questionnaire clinique — l'UPDRS-II — avec une période de rappel de sept (7) jours. En répondant à ces questions, vous indiquez comment vous vous sentez et apportez un contexte essentiel et complémentaire aux données cinématiques enregistrées par les capteurs de votre montre connectée ou de votre capteur de poignet tiers. Pour garantir les informations les plus précises à votre professionnel de santé, veuillez répondre à ces notifications dès que possible et de manière honnête.

Consulter vos données

Pour une analyse approfondie, le système génère automatiquement des rapports PDF détaillés sur vos schémas cinématiques. Ces rapports sont spécifiquement conçus pour être interprétés par les professionnels de santé et doivent être discutés avec votre professionnel de santé afin de déterminer votre plan de soins.

1.5.1 Maintenance et entretien

Aucun étalonnage manuel du logiciel n'est nécessaire.

1.5.2 Arrêter d'utiliser PARKIWATCH

Si votre professionnel de santé vous indique que vous ne devez plus utiliser PARKIWATCH, désinstallez simplement l'application PARKIWATCH de votre smartphone.

La désinstallation de l'application arrête la collecte de données, mais vos données historiques ne sont pas automatiquement supprimées du cloud sécurisé. Si vous souhaitez que vos données personnelles de santé soient supprimées définitivement, contactez support@koios.care conformément à vos droits à la vie privée (RGPD).

1.6 Bénéfices cliniques

Le traitement de la maladie de Parkinson repose généralement sur des observations effectuées lors de consultations ayant lieu tous les 3 à 6 mois. PARKIWATCH surveille en continu vos schémas de mouvement tout au long de la journée et fournit des mesures cinématiques validées représentatives de la bradykinésie, de la dyskinésie et du tremblement, avec une résolution de 15 minutes. Cela apporte à votre professionnel de santé des informations entre les consultations et peut contribuer à des décisions mieux éclairées sur vos soins et sur la façon dont votre corps réagit au plan de traitement. PARKIWATCH ne diagnostique pas la maladie de Parkinson, ne conseille ni ne modifie votre traitement médicamenteux et ne remplace pas le jugement d'un professionnel de santé.

1.7 Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec PARKIWATCH, essayez d'abord les étapes qui correspondent le mieux à votre situation.

Problème: Mon smartphone et le dispositif de poignet tiers ne se synchronisent pas.

Cause possible: Le Bluetooth est peut-être désactivé, ou les appareils sont trop éloignés l'un de l'autre.

Solution:

1. Vérifiez que l'application PARKIWATCH est installée et active sur votre smartphone. Vous pouvez vérifier que le système fonctionne correctement en consultant la barre de notifications en haut de votre smartphone ; la notification « Tout fonctionne correctement » indique que le logiciel enregistre et traite correctement les données. Si cette notification est absente, ouvrez l'application sur votre smartphone pour reprendre la surveillance.
2. Assurez-vous que la montre connectée ou le dispositif de poignet tiers est correctement configuré. Consultez à cet effet le manuel de l'utilisateur du fabricant.
3. Vérifiez que le Bluetooth est activé à la fois sur votre smartphone et sur la montre connectée ou le capteur de poignet tiers.
4. Assurez-vous que la batterie de votre smartphone et de la montre connectée ou du capteur tiers reste chargée, et gardez les appareils à proximité l'un de l'autre.
5. L'application PARKIWATCH synchronise automatiquement le dispositif.
6. Si le problème persiste, redémarrez à la fois votre smartphone Android et la montre connectée ou le capteur de poignet tiers en les éteignant complètement puis en les rallumant. Consultez le manuel de l'utilisateur du fabricant pour les instructions de redémarrage.

Problème: Je ne vois aucun nouveau rapport dans l'application PARKIWATCH sur mon smartphone.

Cause possible: De nouvelles données n'ont pas encore été synchronisées depuis la montre connectée ou le capteur de poignet tiers, ou n'ont pas encore été téléchargées dans le cloud.

Solution:

1. Consultez d'abord le manuel de l'utilisateur du fabricant de la montre connectée ou du capteur de poignet pour les instructions d'installation. Assurez-vous que la batterie du dispositif tiers est suffisamment chargée (plus de 20 %).
2. Vérifiez ensuite que votre smartphone dispose d'une connexion Internet active (Wi-Fi ou données mobiles). PARKIWATCH a besoin d'une connexion Internet pour téléverser les données pour traitement.

Problème: L'application PARKIWATCH sur mon téléphone s'est figée ou s'est fermée.

Cause possible: Un problème logiciel temporaire.

Solution:

1. Fermez complètement l'application via l'écran des applications récentes sur votre téléphone.
2. Rouvrez l'application PARKIWATCH sur votre smartphone. La notification « Tout fonctionne correctement » de PARKIWATCH devrait alors apparaître dans la barre de notifications.
3. Si le problème se reproduit fréquemment, essayez de redémarrer votre smartphone.

Problème: L'application PARKIWATCH sur mon téléphone plante immédiatement après son lancement.

Cause possible: Un problème logiciel causé par le système d'exploitation Android.

Solution:

1. Accédez aux paramètres de votre smartphone et recherchez « Applications ».
2. Dans la liste des applications, recherchez « PARKIWATCH ».
3. Dans le menu qui apparaît, recherchez « Stockage et cache ». Sélectionnez « Effacer le stockage » et « Vider le cache ».
4. Revenez en arrière et sélectionnez « Désinstaller ». Cette action supprime définitivement l'application PARKIWATCH de votre smartphone.
5. Suivez les instructions d'installation pour télécharger, installer et configurer à nouveau PARKIWATCH sur votre téléphone.

Problème: Je ne reçois pas de notifications pour mes questionnaires.

Cause possible: L'autorisation de l'application smartphone d'envoyer des notifications est peut-être désactivée.

Solution:

1. Accédez au menu principal Paramètres de votre smartphone.
2. Touchez « Applications ».
3. Recherchez et touchez « PARKIWATCH ».
4. Touchez « Notifications » et assurez-vous que tous les interrupteurs sont activés.

Problème: Ma peau est irritée sous la montre connectée ou le capteur de poignet tiers que je porte.

Cause possible: Il s'agit d'un problème matériel lié au bracelet ou au boîtier de la montre connectée ou du capteur tiers, et non au logiciel PARKIWATCH.

Solution:

1. Cessez immédiatement de porter la montre connectée ou le capteur de poignet tiers.
2. Consultez le manuel de l'utilisateur de la montre connectée ou du capteur de poignet et contactez le fabricant pour obtenir des conseils sur les matériaux et le nettoyage.
3. Informez votre professionnel de santé de l'irritation.

Si des problèmes techniques persistent après ces étapes, contactez l'assistance Koios Care via les coordonnées présentes dans l'application smartphone, sous « Contact » dans le menu de gauche, ou à la fin de ce document.

1.8 Mentions légales et durée de vie

La durée de vie du produit PARKIWATCH est fixée à cinq (5) ans à compter de la date de sortie de la version logicielle concernée. À la fin de la durée de vie du produit, Koios Care informera les utilisateurs enregistrés et, le cas échéant, leur fournira une assistance pour la transition vers une version prise en charge. La version actuellement prise en charge figure sur la page de garde de ce document.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit être signalé immédiatement à Koios Care (support@koios.care) et à l'autorité médicale compétente de votre pays de résidence.

Vos données sont stockées sur des serveurs cloud sécurisés. Assurez-vous que votre smartphone dispose d'au moins 500 Mo d'espace disponible pour la mise en tampon temporaire des données.

Ce manuel a été créé par KOIOS CARE. Son objectif est de guider l'utilisateur dans la configuration et l'utilisation de PARKIWATCH, développé par KOIOS CARE.

1.9 Assistance

En cas de problèmes techniques, les instructions obligatoires ne sont pas disponibles, contactez l'assistance Koios Care via l'assistance téléphonique pour smartphone sous « Contact » dans le menu ou à la fin de ces documents

1.10 Quand consulter un professionnel de santé

PARKIWATCH surveille vos mouvements et fournit des informations à votre professionnel de santé traitant. Il n'établit pas de diagnostic, ne donne pas de conseils médicaux et ne vous indique pas la conduite à tenir concernant votre état de santé. Contactez votre professionnel de santé traitant si :

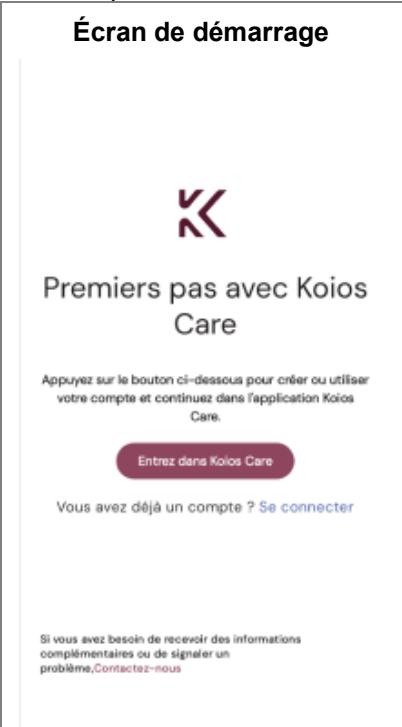
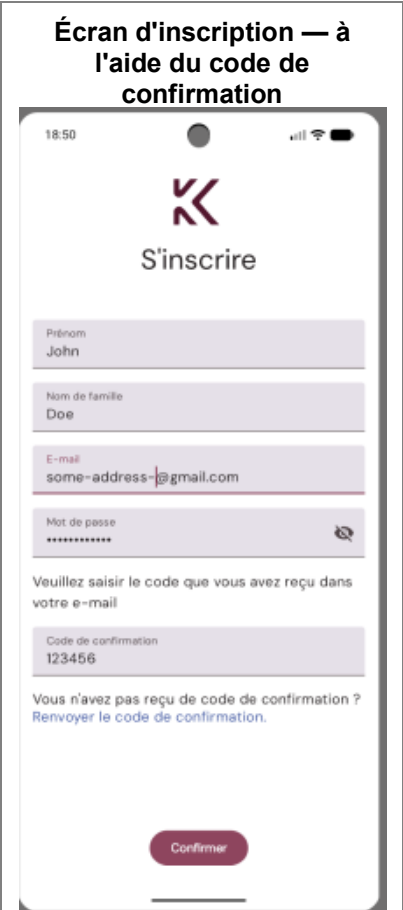
- vous remarquez des symptômes nouveaux ou qui s'aggravent (par exemple, des modifications du tremblement, de la lenteur des mouvements, des mouvements involontaires, de l'équilibre, ou des chutes) ;
- vous avez des questions concernant votre état de santé, votre traitement ou vos médicaments ; PARKIWATCH ne recommande ni ne modifie aucun traitement ;
- vous avez des questions concernant les informations affichées dans l'application ou vos données de surveillance ; ces informations sont destinées à appuyer l'évaluation de votre professionnel de santé et doivent être interprétées par celui-ci.

PARKIWATCH n'est pas un système d'urgence et ne fournit pas d'alertes en temps réel. En cas d'urgence médicale, ou si vous avez besoin d'une aide urgente, contactez directement votre professionnel de santé ou les services d'urgence locaux ; ne vous fiez pas à l'application.

Section 2 : Mode d'emploi — Configuration de PARKIWATCH

2.1 Configurer l'application PARKIWATCH sur votre smartphone Android

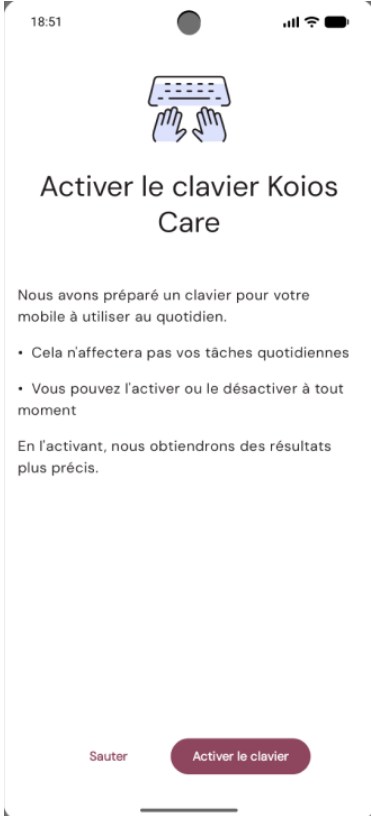
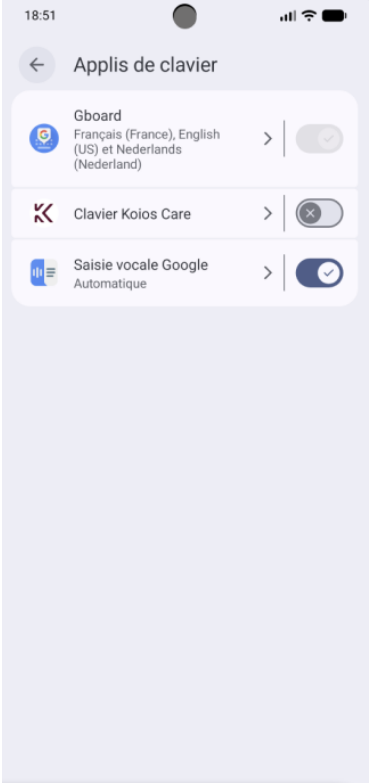
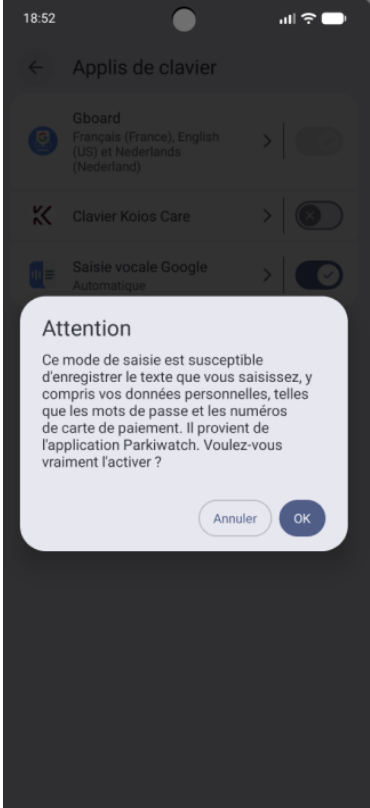
Ce chapitre décrit les différents écrans que vous traverserez lors du processus de configuration. Chaque groupe d'écrans est accompagné d'une brève description de l'action ou de l'option.

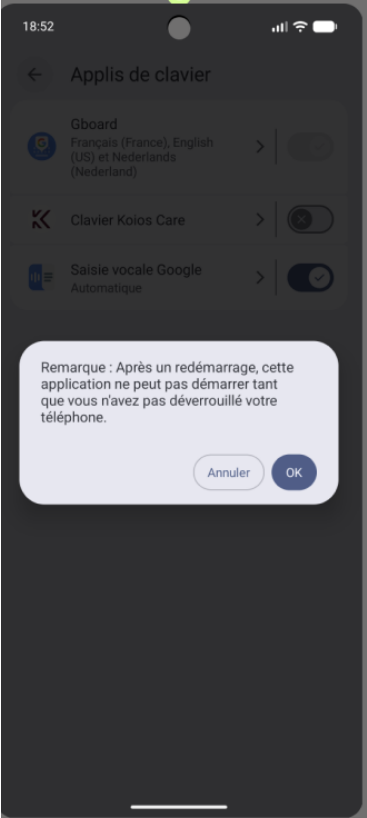
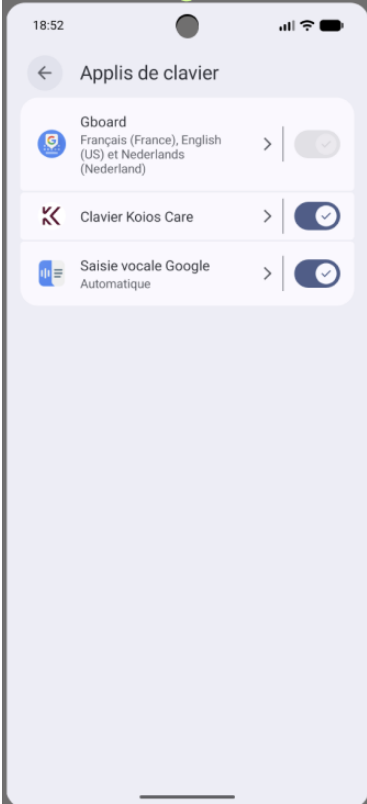
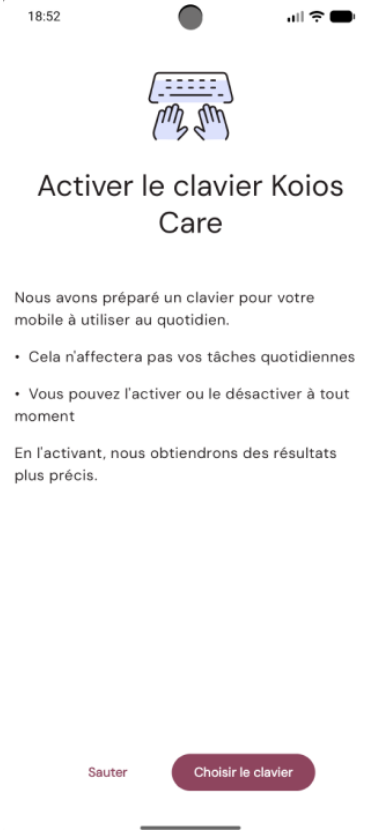
Écran de démarrage  Au lancement de l'application PARKIWATCH, l'écran « Pour commencer » s'affiche. C'est le principal point d'entrée de l'application. Pour commencer, touchez le bouton « Entrer dans Koios Care » afin de créer un nouveau compte ou d'accéder à un compte existant. Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez sur le lien « Connexion ». Pour plus d'informations ou pour signaler un problème, le lien « Contact » est disponible en bas de l'écran.	Écran d'inscription — saisie des informations  Si vous n'avez pas encore de compte, cet écran sert de point de départ pour en créer un. Renseignez vos nom, prénom et adresse e-mail, puis cliquez en bas sur « S'inscrire ». Un e-mail de vérification sera envoyé à l'adresse fournie afin de confirmer les informations saisies.	Écran d'inscription — à l'aide du code de confirmation  Après réception de l'e-mail, saisissez le code de confirmation dans le champ prévu à cet effet. Vous devez ensuite définir un nouveau mot de passe répondant aux exigences de sécurité affichées sous le champ : au moins 8 caractères, dont au moins une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un symbole. Le bouton « Confirmer » ne s'active qu'une fois toutes les
---	---	---

		conditions remplies. Toucher « Confirmer » termine le processus d'inscription.
--	--	---

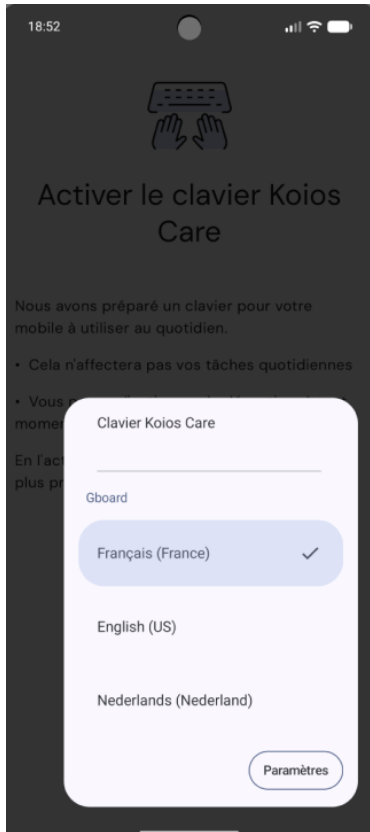
Écran de connexion — utilisateur déjà inscrit  Si vous avez déjà créé un compte, l'écran de connexion constitue le point d'entrée de l'application PARKIWATCH. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe utilisés lors de l'inscription, puis appuyez sur « Connexion ». Si vous avez oublié votre mot de passe, le bouton « Réinitialiser » envoie un e-mail à l'adresse indiquée pour le réinitialiser. Les mêmes exigences de	Conditions générales  Après une connexion réussie, vous arrivez sur l'écran des conditions générales. Cet écran présente les principales autorisations accordées à Koios Care. En acceptant, vous autorisez Koios Care à résilier les inscriptions en cas de violation, à modifier ou supprimer les communications des utilisateurs si nécessaire, et à effectuer des analyses de données personnalisées. Un lien vers le document complet est fourni pour les utilisateurs souhaitant	Connecter votre montre connectée  Cet écran vous aide à connecter votre montre connectée ou votre capteur de poignet tiers à l'application Android PARKIWATCH. Pour des instructions détaillées, consultez la documentation du fabricant de la montre ou du capteur. Vous pouvez ignorer temporairement cette étape pour poursuivre l'installation. Vous devrez toutefois connecter un dispositif compatible pour
---	---	--

robustesse s'appliquent qu'à l'inscription.	consulter l'intégralité des conditions.	que PARKIWATCH fonctionne correctement.
---	---	---

Activer le clavier Koios Care  L'écran d'activation du clavier Koios Care apparaît ensuite. Vous pouvez ignorer cette étape (et l'activer ultérieurement) ou la sauter complètement. Le clavier Koios Care est utilisé pour collecter des données numériques de santé de soutien et n'a aucun impact sur la collecte des mesures cinématiques validées. Touchez « Activer le clavier » pour poursuivre la configuration du clavier Koios Care.	Sélectionner le clavier à l'écran  L'écran suivant permet d'activer le clavier comme méthode de saisie principale pour toutes les fonctions de saisie standard sur votre smartphone. En touchant le curseur, vous pouvez activer/désactiver le clavier et/ou le remplacer par un autre clavier déjà installé sur votre appareil. La flèche en haut à gauche annule ce processus.	Vérifier la sélection du clavier  L'écran suivant affiche un message Android qui attire votre attention sur les précautions à prendre lors du choix d'un nouveau clavier, en particulier un clavier différent du clavier Google par défaut. Cliquez sur OK pour poursuivre le changement de clavier, ou sur ANNULER pour revenir à l'écran précédent et annuler le processus de vérification.
---	---	--

Vérification du clavier — déverrouiller le téléphone  Cet écran vous informe que, après le prochain redémarrage du téléphone (initié par vous-même ou via une invite Android), le téléphone devra être déverrouillé avec votre mot de passe Android avant que l'application ne puisse être lancée. Il s'agit d'un mécanisme de sécurité d'Android. Sélectionnez OK pour continuer ou ANNULER pour revenir à l'écran précédent.	Sélection du clavier terminée  Une fois le clavier à l'écran et les fenêtres Android correctement sélectionnés, l'écran suivant vérifie que le clavier Koios Care est activé et accessible sur votre téléphone. Vous pouvez à nouveau toucher le curseur pour activer/désactiver le clavier Koios Care. La flèche en haut à gauche vous ramène à l'écran « Activer le clavier Koios Care » pour poursuivre la configuration.	Clavier Koios Care activé  En revenant à l'écran « Activer le clavier » après avoir effectué les étapes de sélection avec succès, vous pouvez sélectionner « Choisir le clavier » pour poursuivre l'installation du clavier Koios Care comme méthode de saisie, ou ignorer entièrement ce processus.
---	---	---

Configurer le clavier Koios Care



Vous pouvez ensuite lancer le processus de configuration du clavier Koios Care en touchant le bouton « Paramètres » en bas à droite. L'écran affiche les langues incluses dans le clavier Koios Care (français, néerlandais et grec).

Configurer le clavier Koios Care (suite)



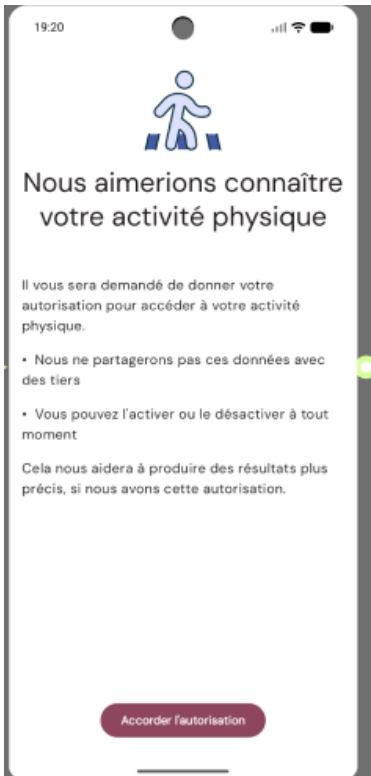
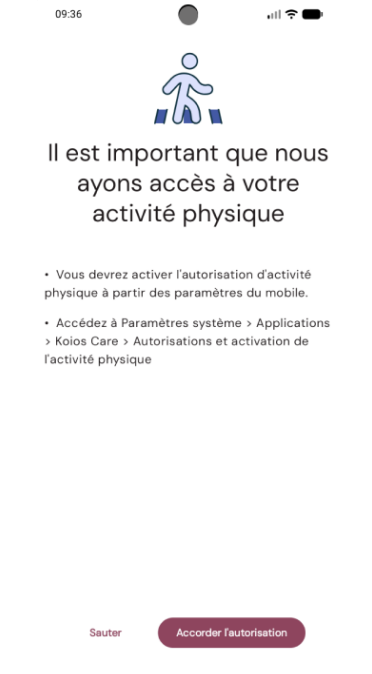
L'écran suivant vous permet de poursuivre la configuration du clavier en touchant « Paramètres du clavier » ou « Continuer » en bas pour conserver la configuration par défaut.

Configurer le clavier Koios Care (suite)



En sélectionnant « Paramètres du clavier », vous pouvez ajouter ou supprimer des langues et modifier l'ordre via le bouton « Ajouter une langue », l'icône poubelle ou les flèches haut et bas. Des paramètres supplémentaires tels que (1) vibration à l'appui, (2) affichage en pop-up à l'appui, (3) bordures des touches, (4) affichage du presse-papiers si disponible et (5) hauteur du clavier sont réglables via l'icône d'engrenage. Une fois le clavier personnalisé, cliquez sur la flèche en haut à gauche pour terminer.

Configurer l'accès à la localisation\ 18:52  Nous aimerions accéder à votre position Il vous sera demandé d'autoriser l'accès à vos données de localisation. • Nous ne partagerons pas ces données avec des tiers • Vous pouvez l'activer ou le désactiver à tout moment Si nous disposons de cette autorisation, cela nous aidera à produire des résultats plus précis. Accorder l'autorisation	Configurer l'accès à la localisation (suite) 19:17  Il est important que nous ayons accès à votre emplacement • Vous devrez activer les autorisations de localisation à partir des paramètres mobiles. • Go to System Settings > Applications > Koios Care > Autorisations et activez la localisation. Sauter Aller dans les paramètres	Configurer l'accès à la localisation (suite) 18:53  Nous aimerions accéder à votre position Parkwatch collecte des données de localisation pour permettre un suivi précis de votre activité physique, de votre sommeil et de votre santé même lorsque l'application est fermée ou non utilisée. Accorder l'autorisation
L'écran suivant lance le processus d'octroi d'accès à la localisation via le GPS du smartphone. Vous êtes informé de l'utilisation par Koios Care des données de localisation pour calculer les mesures numériques de santé de soutien. Après lecture, vous pouvez poursuivre via le bouton « Accorder l'autorisation » en bas.	Ensuite, des informations sont fournies sur la manière d'activer ou de désactiver l'accès de PARKIWATCH aux données de localisation via les paramètres système. Si vous souhaitez accorder l'accès, cliquez en bas à droite sur « Accorder l'autorisation ». Sinon, cliquez en bas à gauche sur « Passer » pour poursuivre. Les données de localisation ne sont pas nécessaires au calcul des mesures cinématiques validées et servent uniquement au calcul des mesures numériques de santé de soutien.	Le dernier écran de configuration de l'accès à la localisation affiche les dernières informations sur la manière dont PARKIWATCH collecte les données de localisation en arrière-plan (sans utilisation active de l'application). Le bouton « Accorder l'autorisation » demande une confirmation finale. Cela termine la configuration de l'accès à la localisation.

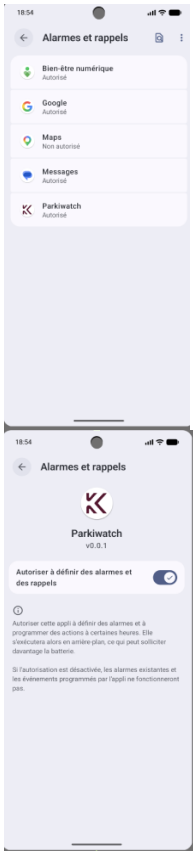
Accès aux données d'activité physique  Vous recevez ensuite des informations sur l'accès de PARKIWATCH à vos données d'activité physique. Ces données ne sont pas partagées avec des tiers et vous pouvez désactiver l'accès à tout moment. L'accès sert uniquement à la collecte de données numériques de santé de soutien. Touchez « Accorder l'autorisation » pour poursuivre.	Accès aux données d'activité physique (suite)  L'écran suivant fournit plus d'informations. Après avoir sélectionné « Accorder l'autorisation », Android pose une dernière question oui/non. Pour refuser, cliquez sur « Passer » en bas à gauche ; pour accepter, cliquez sur « Accorder l'autorisation » en bas à droite. Cela termine ce processus.	Accès aux données d'état du téléphone  Vous recevez ensuite des informations sur l'accès à l'état du téléphone. Les données d'état du téléphone concernent l'horodatage des appels téléphoniques et en aucun cas le contenu des appels. L'accès peut être désactivé à tout moment après l'installation ; les données ne sont pas partagées avec des tiers et servent uniquement à la collecte de données numériques de santé de soutien. Cliquez en bas sur « Accorder l'autorisation » pour poursuivre.
--	---	---

Accès aux données d'état du téléphone (suite)  L'écran suivant fournit plus d'informations sur l'activation ou la désactivation de l'accès aux données d'état du téléphone. Sélectionnez « Passer » pour refuser, ou « Accorder l'autorisation » pour accepter. Après avoir sélectionné « Accorder l'autorisation », Android demande une confirmation finale (oui/non).	Accès aux notifications et alarmes  L'écran suivant fournit des informations sur l'envoi de notifications et l'activation des alarmes. Aucune donnée n'est partagée avec des tiers et ces fonctions peuvent être désactivées à tout moment. Ces informations servent uniquement à la collecte de données numériques de santé de soutien et n'ont aucun impact sur la collecte des mesures cinématiques validées.	Accès aux notifications et alarmes (suite)  On explique ensuite comment accorder et révoquer l'autorisation. Cliquez en bas à gauche sur « Passer » pour poursuivre, ou en bas à droite sur « Accorder l'autorisation » pour démarrer le processus d'octroi.
--	---	---

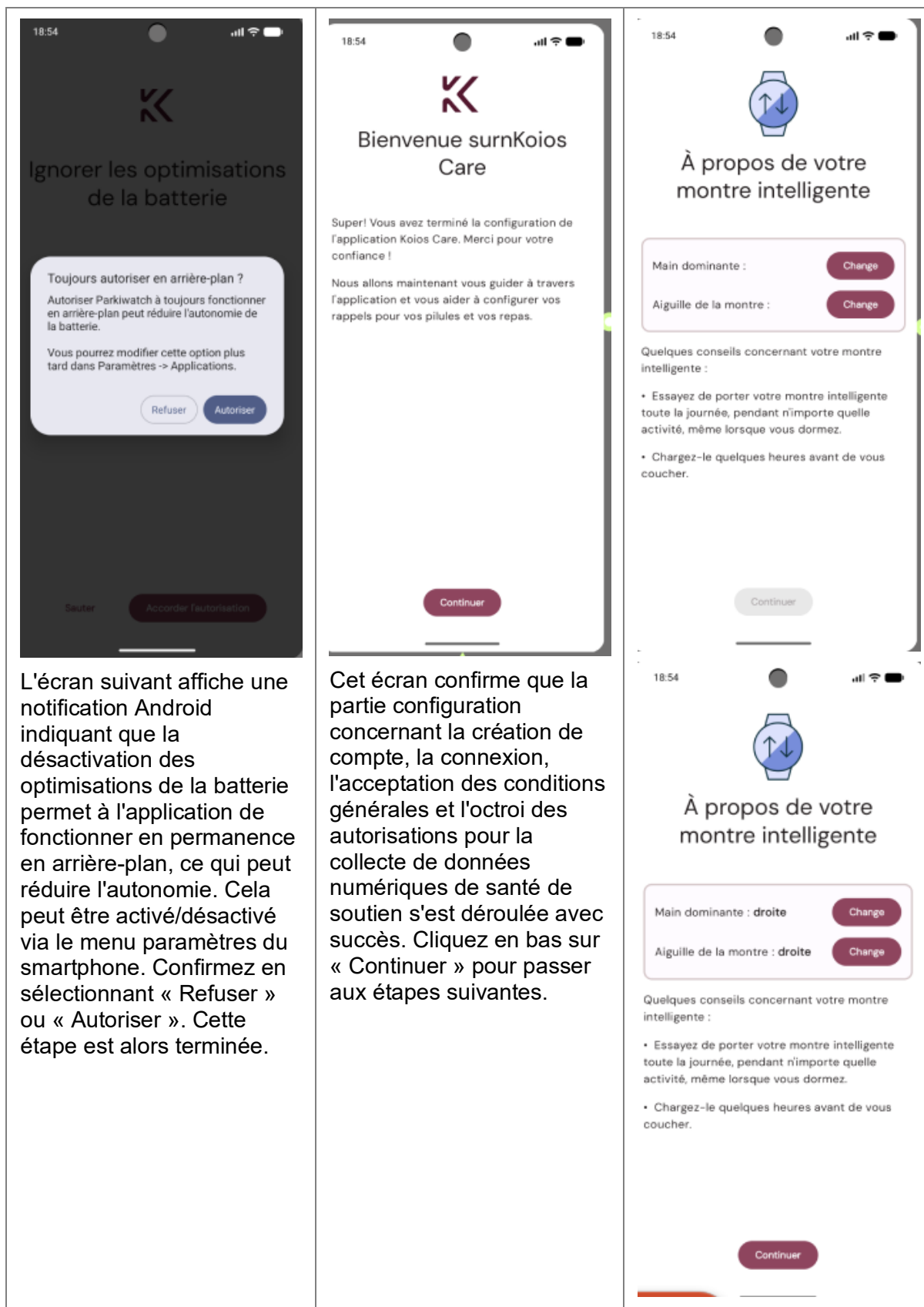
Accès aux notifications et alarmes (suite) L'écran suivant suit la procédure Android d'activation de l'accès aux notifications et alarmes. Dans le menu affiché, vous	Accès aux notifications et alarmes (suite) Le dernier écran pour la configuration de l'accès aux notifications et alarmes contient un curseur permettant d'activer ou de	Ignorer l'optimisation de la batterie L'étape suivante concerne la désactivation des optimisations de la batterie. Cette autorisation permet à PARKIWATCH de
--	---	---

voyez les applications installées ayant demandé cette autorisation, accompagnées d'une indication de l'état (autorisé ou non). Touchez l'application pour accorder ou révoquer l'autorisation.	désactiver l'accès. Le système vous informe également de l'impact sur l'autonomie de la batterie dû à l'exécution en arrière-plan. Terminez le processus et passez aux étapes suivantes.	fonctionner de manière optimale en arrière-plan sans être affecté par les optimisations d'Android. Sélectionnez « Passer » pour poursuivre, ou « Accorder l'autorisation » en bas à droite pour continuer.
--	--	--

Notifications mobiles L'écran suivant montre comment PARKIWATCH utilise le moteur de notifications d'Android pour vous rappeler les pilules et repas planifiés ainsi que les questionnaires à remplir. Cliquez sur « Continuer » pour configurer les rappels.	Configurer les rappels 	Configurer les rappels (suite) Toucher « Ajouter un nouveau rappel » vous demande de quel type de rappel il s'agit — par exemple, un rappel de repas ou de médicament. Touchez l'un d'eux pour configurer le rappel spécifique.
--	---	--

	 Cet écran permet de configurer des rappels. En haut, des informations indiquent que la configuration des rappels vous aide à respecter votre planning. En bas, vous pouvez ajouter de nouvelles alarmes ; les alarmes peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées. Cliquez sur « Continuer » pour avancer, ou sur « Ajouter un nouveau rappel » pour en configurer un.	
--	--	--

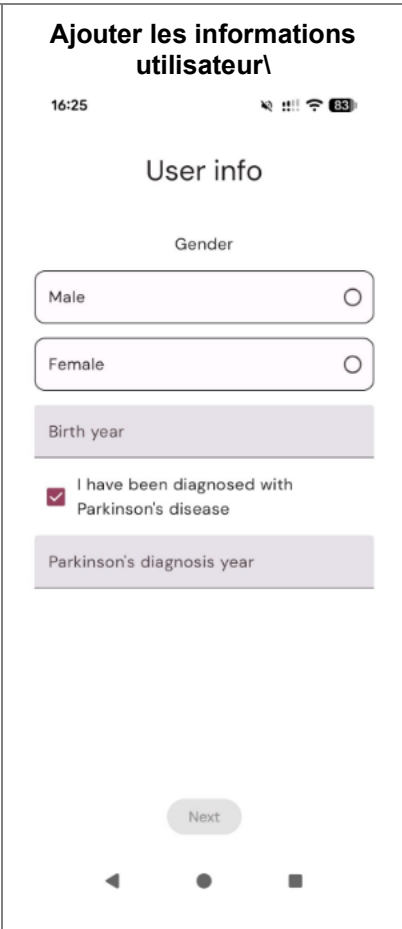
Ignorer l'optimisation de la batterie (suite)	Bienvenue dans Koios Care	À propos de votre montre connectée
---	---------------------------	------------------------------------



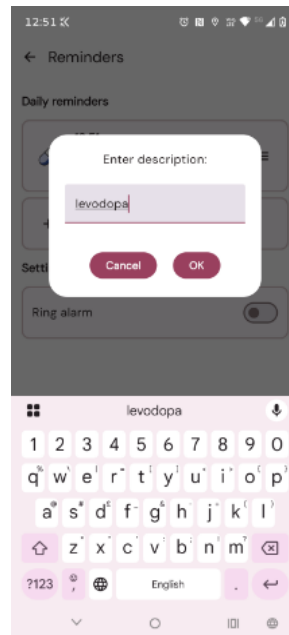
L'écran suivant affiche une notification Android indiquant que la désactivation des optimisations de la batterie permet à l'application de fonctionner en permanence en arrière-plan, ce qui peut réduire l'autonomie. Cela peut être activé/désactivé via le menu paramètres du smartphone. Confirmez en sélectionnant « Refuser » ou « Autoriser ». Cette étape est alors terminée.

Cet écran confirme que la partie configuration concernant la création de compte, la connexion, l'acceptation des conditions générales et l'octroi des autorisations pour la collecte de données numériques de santé de soutien s'est déroulée avec succès. Cliquez en bas sur « Continuer » pour passer aux étapes suivantes.

		Il vous est ensuite demandé comment vous portez la montre connectée ou le capteur de poignet tiers. Pour obtenir les meilleurs résultats, la montre doit être portée à la main avec laquelle vous mangez. En haut, indiquez votre main dominante (bouton « Changer »). La seconde option concerne le poignet auquel vous portez la montre ou le capteur ; il peut également être modifié. Conseil : portez la montre toute la journée, pendant toute activité et pendant le sommeil, et chargez l'appareil quelques heures avant le coucher.
--	--	---

	Configurer les rappels (suite)	
---	---------------------------------------	--

Après avoir sélectionné un rappel pour un repas ou un médicament, définissez l'heure du rappel. Confirmez avec « OK » pour activer l'alarme à l'heure indiquée, ou annulez avec « Annuler ».		Le dernier écran avant le tableau de bord PARKIWATCH est celui des informations utilisateur. Sélectionnez votre sexe, saisissez votre année de naissance et indiquez si vous avez reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson en cochant la case. Si elle est cochée, renseignez également l'année du diagnostic. Le bouton « Suivant » est grisé tant que toutes les informations ne sont pas saisies. Une fois renseignées, le tableau de bord PARKIWATCH s'affiche. La configuration est ainsi terminée.
---	--	--



Une fois l'heure définie, vous revenez à l'écran des rappels quotidiens. Pour chaque rappel configuré, vous voyez l'heure, le type (repas/pilule) et les jours de la semaine où il sera déclenché. Le menu à droite de chaque rappel offre des options supplémentaires telles que modification de l'heure ou de la description, test de sonnerie, désactivation ou suppression.

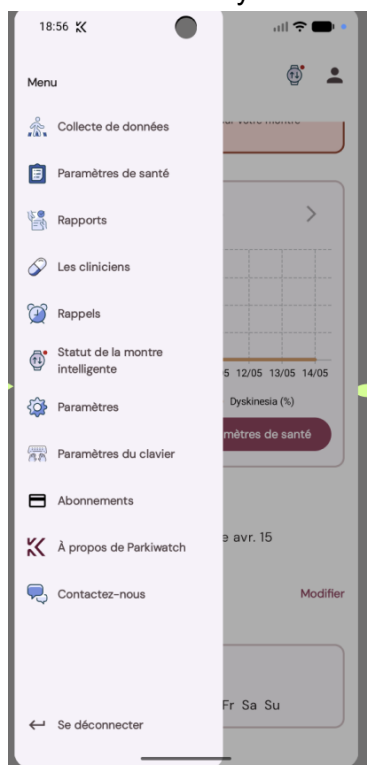
Le tableau de bord de l'application PARKIWATCH



Une fois la configuration terminée, le tableau de bord apparaît. Le graphique en haut montre le pourcentage de temps consacré à la bradykinésie, au tremblement et à la dyskinésie au cours de la journée, pour la période affichée. Le bouton « Rapports » ouvre l'écran d'accès aux rapports PDF générés. Le bouton « Indicateurs de santé » ouvre les mesures cinématiques validées individuelles (score de bradykinésie, pourcentage de tremblement, score de dyskinésie). Consultez toujours votre professionnel de santé pour l'interprétation des différentes mesures cinématiques.

Le menu de gauche

En balayant de gauche à droite sur l'écran, vous ouvrez le menu de gauche. Les éléments du menu donnent accès à différents écrans, à commencer par « Collecte de données ». Vous accédez à un élément qui montre combien de questionnaires vous avez remplis, répondus et passés, ainsi que la quantité de données collectées et téléversées vers le cloud PARKIWATCH pour traitement et analyse.



Rapports

Via l'élément « Rapports », vous accédez aux rapports générés. Vous pouvez les marquer comme lus/non lus, filtrer la liste (par exemple, n'afficher que les non lus), actualiser, et via l'icône d'engrenage afficher les options « Tout marquer comme lu » ou « Demander un rapport ». Le bouton « Demander un rapport » permet de sélectionner la période (de et à) pour laquelle générer le PDF.

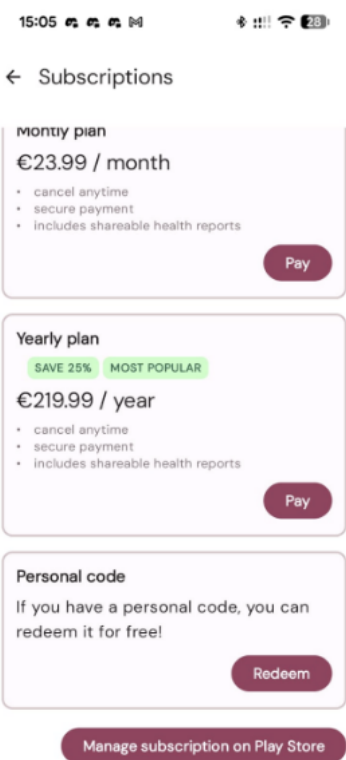
Professionnels de santé (cliniciens) 18:57 ← Les cliniciens mydoctor@hospital.be En attente de réponse Ajouter un nouveau clinicien E-mail ClearAjouter Via l'élément « Professionnels de santé », vous accédez à un menu permettant d'ajouter votre professionnel de santé et d'établir une connexion. En vous connectant, votre professionnel de santé accède à vos rapports PDF. Il vous suffit de fournir son adresse e-mail. Cette fonctionnalité est conçue exclusivement pour les informations du professionnel de santé ; n'y ajoutez donc pas de contacts personnels ni d'adresses non officielles. Saisissez l'adresse e-mail dans le champ puis touchez « Ajouter ». « Effacer » supprime le texte du champ.	Indicateurs de santé 18:56 ← Paramètres de santé 09/04 - 16/04 Bradykinesia 4 3 2 1 0 09/0410/0411/0412/0413/0414/0415/0416/04 Tremor (%) 100 75 50 25 0 09/0410/0411/0412/0413/0414/0415/0416/04 Dyskinesia 4 3
--	---

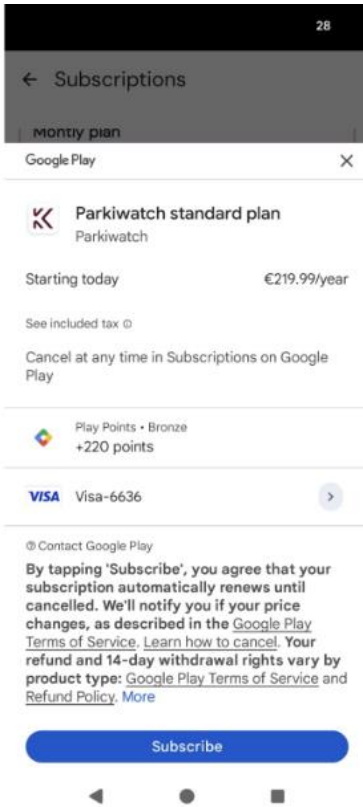
Le bouton « Indicateurs de santé » ouvre un écran présentant les mesures cinématiques validées individuelles dans chaque figure, accompagnées de la période sur laquelle elles ont été collectées. Consultez toujours votre professionnel de santé pour l'interprétation des

	résultats. Les détails sur ces figures se trouvent dans l'annexe relative au rapport PDF.	
--	--	--

Le bouton « Nous contacter » ouvre un écran avec les informations pour contacter Koios Care.	L'élément de menu « À propos de PARKIWATCH » donne accès aux informations sur PARKIWATCH et Koios Care. Il contient également un lien vers le mode d'emploi électronique à l'adresse www.koios.care/ifu-patients. Après avoir suivi le lien, le mode d'emploi est fourni au format PDF : vous pouvez le consulter directement dans votre navigateur lorsque cela est pris en charge, ou ouvrir et télécharger le fichier PDF. Le mode d'emploi est	Via l'élément « Paramètres », vous ouvrez un menu pour ajuster diverses options : aperçu des autorisations (ou non) accordées, accès à l'écran des options du clavier, accès à l'écran indiquant le poignet (droit/gauche) auquel vous portez la montre ou le dispositif tiers, un menu de téléversement de données pour limiter l'envoi via les connexions limitées, un bouton « Téléverser maintenant », le menu des conditions générales et le bouton « Abonnements » pour les

	disponible en néerlandais, français, allemand et anglais.	différentes options d'abonnement (mensuel, annuel). Un champ supplémentaire permet de saisir un code personnel échangeable pour accéder aux fonctionnalités PARKIWATCH sans abonnement.
--	---	---

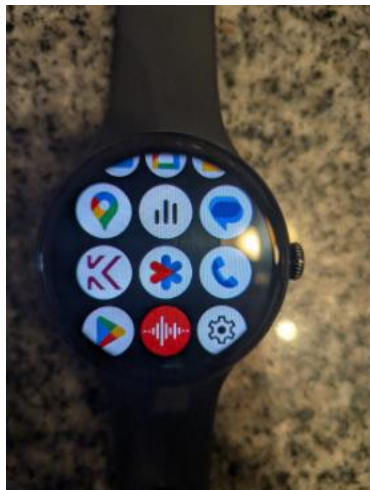
État de la montre connectée  Via l'élément « Montre connectée », vous obtenez des informations sur la connexion entre votre montre ou capteur de poignet tiers et l'application Android PARKIWATCH. En l'absence de synchronisation, une croix rouge apparaît ; sinon, une coche verte indique que la connexion est correcte.	Abonnements 	Prêt à commencer Lorsque toutes les étapes sont terminées, votre PARKIWATCH est prêt à être utilisé. Pour toute question, contactez Koios Care à support@koios.care ou via le lien « Contact » dans le menu de gauche de l'application.
--	---	---

	 Le bouton « Abonnements » ouvre la page où vous pouvez souscrire à votre abonnement PARKIWATCH en sélectionnant le tarif mensuel ou annuel. Le bouton « Gérer l'abonnement » ouvre l'écran où vous gérez votre abonnement actif (y compris l'annulation). Toucher « Payer » vous redirige vers une page sécurisée gérée par Google pour effectuer un paiement.	
--	--	--

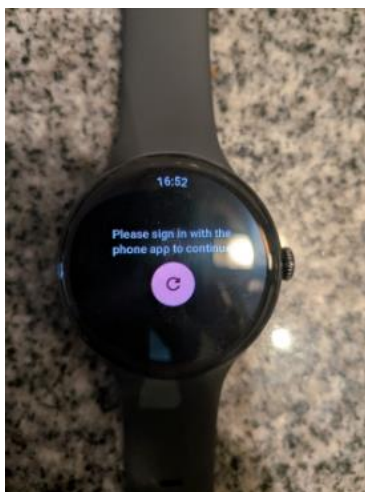
2.2 Exemple de configuration pour connecter l'application PARKIWATCH Android à une montre connectée WearOS tierce

Cet exemple illustre le processus de connexion de l'application PARKIWATCH Android à une montre connectée tierce — en l'occurrence une Google Pixel Watch 4.

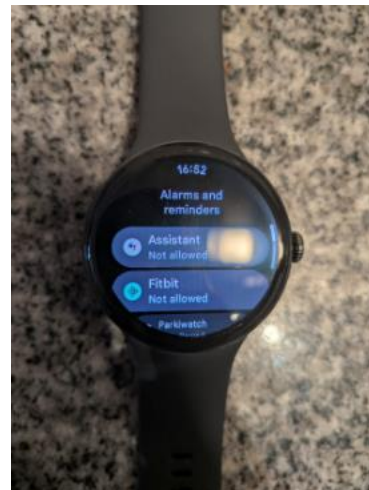
Consultez la documentation du fabricant pour les instructions d'utilisation de votre montre ou capteur de poignet tiers.

Démarrer le processus d'installation

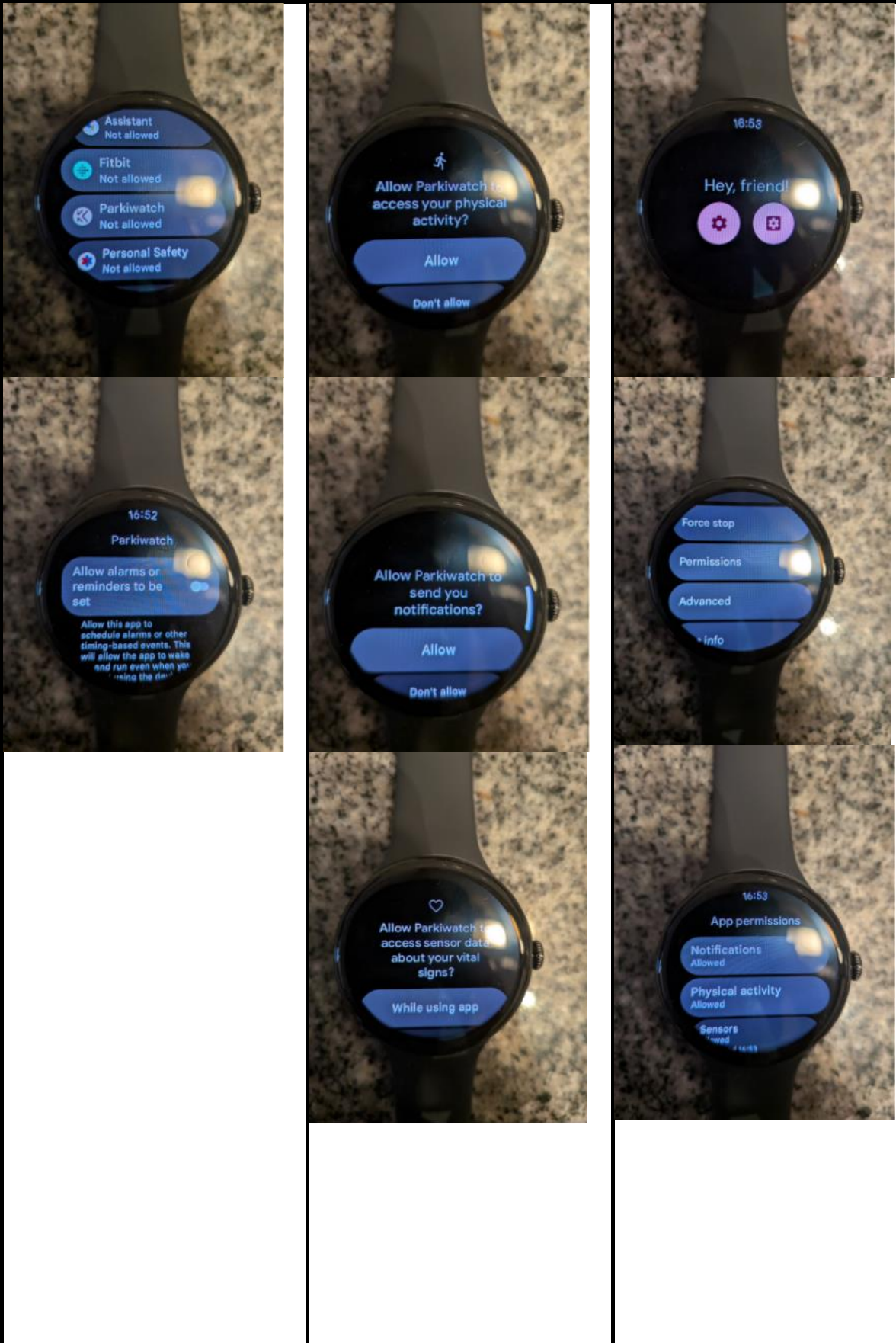
La première étape consiste à coupler la montre connectée tierce en suivant les instructions du fabricant (voir aussi l'Annexe 1 pour un exemple). En ouvrant la liste des applications installées (généralement en appuyant sur le bouton physique de la montre), vous devriez trouver l'application PARKIWATCH parmi les autres. L'installation démarre en touchant l'icône PARKIWATCH.

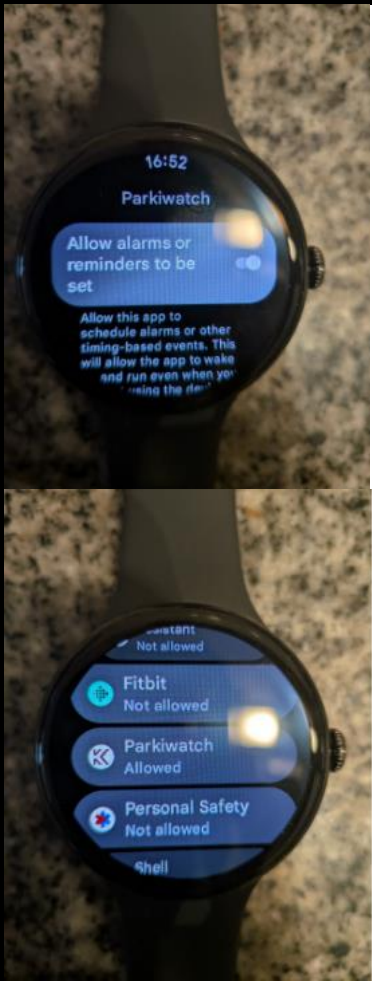
Connexion

Le premier écran indique que vous devez d'abord vous connecter à l'application PARKIWATCH sur smartphone. Vous êtes alors automatiquement redirigé vers l'écran suivant pour démarrer le processus d'octroi des autorisations à PARKIWATCH.

Accorder les autorisations — alarmes et rappels

Une série d'écrans apparaît. Le premier concerne les alarmes et les rappels. Comme lors de la configuration de l'application smartphone, une liste des applications demandant l'accès aux alarmes et rappels s'affiche. Faites défiler la liste pour trouver l'application PARKIWATCH.





Accorder les autorisations — alarmes et rappels (suite) Après avoir trouvé l'application PARKIWATCH, touchez-la pour accéder à l'écran suivant où vous pouvez activer ou désactiver l'accès aux alarmes et rappels à l'aide d'un interrupteur. Une fois les autorisations accordées, balayez l'écran de la montre vers la droite pour revenir à la liste des applications. PARKIWATCH devrait alors afficher l'état « Autorisé » pour les alarmes et rappels.	Accorder les autorisations — activité physique, notifications et signes vitaux Une série d'écrans apparaît automatiquement et demande trois autorisations : (1) activité physique, exclusivement pour le calcul des mesures numériques de santé de soutien ; (2) notifications, pour afficher les rappels de repas et de médicaments si configurés ; et (3) signes vitaux (capteur PPG), exclusivement pour le calcul des mesures numériques de santé de soutien. Touchez à chaque fois « Autoriser » pour accorder l'autorisation.	Écran principal et menu Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir le menu des autorisations sur la droite. Vous y accédez à des options telles que « Forcer l'arrêt », « Autorisations », « Avancé », « Infos sur l'appli » et l'option de désinstaller l'application. Le menu des autorisations permet de modifier celles relatives aux alarmes et rappels, à l'activité physique, aux notifications et aux signes vitaux. « Forcer l'arrêt » interrompt immédiatement l'exécution de l'application, qui doit alors être relancée pour reprendre son fonctionnement en arrière-plan (en ouvrant la liste des applications et en touchant l'icône PARKIWATCH).
--	--	--

Section 3 : Informations générales sur le système et la réglementation

3.1 Description du dispositif

PARKIWATCH est un logiciel en tant que dispositif médical (SaMD), destiné à la détection passive et continue ainsi qu'à l'évaluation quantitative de schémas cinématiques représentatifs de : (i) le tremblement, défini comme des mouvements oscillatoires ; (ii) la bradykinésie, définie comme une diminution de la vitesse et de l'amplitude du mouvement lors de l'activité volontaire des membres supérieurs ; et (iii) la dyskinésie, définie comme des mouvements hyperkinétiques irréguliers et non rythmiques correspondant aux mouvements involontaires induits par la lévodopa, chez l'adulte atteint de la maladie de Parkinson.

Matériel requis : PARKIWATCH requiert que l'utilisateur porte une montre connectée tierce ou un capteur poignet tiers qui collecte les données brutes de mouvement (accélérométrie). L'utilisateur a besoin de son propre smartphone Android pour installer et utiliser l'application PARKIWATCH.

Compatibilité : PARKIWATCH est compatible avec les montres connectées tierces ou les capteurs poignet tiers équipés d'une centrale inertielle (IMU) fournissant des données brutes d'accéléromètre.

Modules : application smartphone Android PARKIWATCH ; tableau de bord pour les professionnels de santé ; système d'infrastructure cloud pour le stockage et le traitement des données ; montre connectée ou capteur poignet tiers.

PARKIWATCH traite les données d'accéléromètre triaxial collectées par les montres connectées ou les capteurs poignet tiers. PARKIWATCH applique des algorithmes validés de traitement du signal et d'apprentissage statistique pour générer des résultats longitudinaux et continus : les mesures cinématiques validées. Celles-ci sont mises à la disposition des professionnels de santé via un tableau de bord web et des rapports PDF. Les mesures cinématiques validées sont calculées en combinaison avec d'autres données numériques de santé de soutien.

PARKIWATCH analyse les données collectées durant vos activités quotidiennes par votre montre connectée tierce, votre capteur poignet ou votre smartphone.

PARKIWATCH n'est PAS destiné à diagnostiquer la maladie de Parkinson, à recommander ou modifier de manière autonome un traitement médicamenteux spécifique, ni à fournir des alertes cliniques en temps réel. Les résultats viennent en complément de, et doivent être interprétés dans le contexte de, l'évaluation clinique standard et du jugement du professionnel de santé traitant.

Mesures cinématiques validées

- La détection automatique et la quantification de schémas cinématiques oscillatoires représentatifs du tremblement ;
- La détection automatique et la quantification des diminutions de vitesse et d'amplitude du mouvement caractéristiques de la bradykinésie ;
- La détection automatique et la quantification de mouvements hyperkinétiques irréguliers et non rythmiques caractéristiques de la dyskinésie.

Ces mesures sont présentées aux côtés des données numériques de santé de soutien afin de fournir une vue contextuelle du profil cinématique du patient.

Mesures numériques de santé de soutien

- Analyse automatique du rythme et du timing lors des interactions avec le clavier du smartphone, afin de donner un aperçu de votre dextérité de frappe sur le clavier numérique de votre smartphone.

- Mesure automatique des schémas de mouvement du poignet afin d'estimer la durée des mouvements assiette-bouche pendant les repas.
- Enregistrement automatique des mouvements nocturnes et de la fréquence cardiaque afin de mesurer la durée du sommeil, la fréquence des réveils et la qualité du repos.
- Quantification automatique du nombre de pas et des schémas sociaux, y compris le temps passé à l'extérieur, afin de donner un aperçu de votre niveau d'activité.
- Enregistrement et visualisation des réponses aux questionnaires.

Ces informations sont rassemblées dans des rapports en complément de l'évaluation clinique réalisée par votre professionnel de santé en dehors du cadre clinique, entre les consultations.

IMPORTANT: PARKIWATCH est exclusivement un outil de monitoring. Le dispositif n'établit pas de diagnostic de la maladie de Parkinson, ne fournit pas de conseils médicaux et ne formule pas de recommandations de modification du traitement. Ce dispositif est conçu pour soutenir, et non remplacer, le jugement professionnel de votre professionnel de santé et ne sert pas de système d'urgence.

3.2 Spécifications techniques

Système d'exploitation	Android 9.0 (SDK 28) ou version ultérieure.
Connectivité	Bluetooth 5.0 (ou ultérieur) et une connexion internet active (Wi-Fi ou données mobiles).
Magasin d'applications	L'accès au Google Play Store est requis pour l'installation et les mises à jour obligatoires.

Matériel requis : L'utilisateur a besoin de son propre smartphone Android pour installer et utiliser l'application PARKIWATCH. PARKIWATCH requiert que l'utilisateur porte une montre connectée tierce ou un capteur poignet tiers qui collecte les données brutes de mouvement (accéléromètre) ; PARKIWATCH est compatible avec les montres connectées ou les capteurs poignet tiers équipés d'une centrale inertielle (IMU) fournissant des données brutes d'accéléromètre.

3.3 Cybersécurité et confidentialité des données

La plateforme Koios Care est conçue pour se conformer aux réglementations HIPAA et RGPD.

Chiffrement	Toutes les données sont protégées par un chiffrement AES-256, à la fois au repos et en transit (HTTPS/TLS).
Authentification	L'authentification multifacteur et le contrôle d'accès basé sur les rôles sont appliqués à tous les utilisateurs.
Stockage des données	Les données sont stockées dans une structure hiérarchique sécurisée sur les services cloud AWS.

3.4 SYMBOLES DE DANGER, D'AVERTISSEMENT ET DE MISE EN GARDE

Les symboles suivants indiquent la manière dont les avertissements, les mises en garde, les instructions et les notes apparaissent dans ce document. Le texte explique leur usage prévu.



DANGER/AVERTISSEMENT/MISE EN GARDE Le manuel doit être consulté dans tous les cas où ce symbole est apposé, afin de connaître la nature des dangers potentiels et les mesures à prendre pour les éviter (ISO 7010, W001).

DANGER : Une mention de danger indique une situation dangereuse de péril direct et immédiat susceptible d'entraîner des blessures graves pour un utilisateur, un technicien, un patient ou toute autre personne.

AVERTISSEMENT : Une mention d'avertissement indique une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures graves pour un utilisateur, un technicien, un patient ou toute autre personne.

MISE EN GARDE : Une mention de mise en garde indique une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures mineures pour un utilisateur, un technicien, un patient ou toute autre personne.

ÉTIQUETAGE DU PRODUIT

FENÊTRE « À PROPOS » (“ABOUT BOX”)

Cette section décrit les étiquettes applicables à l'ensemble du système et du produit.

**PARKIWATCH**

Koios Care, Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerp, Belgium

Version 1.0.0

Copyright © 2025 KOIOS CARE. All rights reserved.

www.koios.care

2797



(01) 05419980609106 (11) 260527 (8012) 1.0.0.



2026-05-27

Usage prévu : PARKIWATCH est un logiciel en tant que dispositif médical (SaMD) destiné à la détection continue et passive et à l'évaluation quantitative de schémas cinématiques représentatifs des tremblements, de la bradykinésie et de la dyskinésie chez l'adulte atteint de la maladie de Parkinson. Il traite des données d'accéléromètre triaxial recueillies par des montres connectées ou des capteurs portés au poignet de tiers, et ses résultats sont mis à la disposition des professionnels de santé via un tableau de bord web et des rapports PDF. PARKIWATCH n'est PAS destiné à diagnostiquer la maladie de Parkinson, ni à recommander ou modifier de manière autonome un traitement pharmacologique spécifique. Ses résultats sont complémentaires de l'évaluation clinique standard et du jugement du professionnel de santé traitant, et doivent être interprétés dans ce contexte.



CONSULTER LE MODE D'EMPLOI Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi (ISO 7000, 1051 ; ISO 15223-1, 5.4.3).



MARQUAGE DE CONFORMITÉ CE Indique la conformité du dispositif au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



DISPOSITIF MÉDICAL Indique un dispositif médical destiné à être utilisé en tant que dispositif médical ou en tant qu'accessoire d'un tel dispositif (ISO 15223-1, 5.7.7).



IDENTIFIANT UNIQUE DU DISPOSITIF Indique un support contenant les informations de l'identifiant unique du dispositif (ISO 15223-1, 5.7.10).



FABRICANT Indique le fabricant du dispositif médical (ISO 15223-1, 5.1.1).



USAGE SUR PRESCRIPTION Indique que le dispositif doit être utilisé par, ou sur prescription d'un professionnel de santé agréé. Ce symbole ne figure pas dans la norme EN ISO 15223-1.



DATE DE FABRICATION

Indique la date à laquelle le dispositif médical a été fabriqué (ISO 15223-1, 5.1.3).

3.5 Coordonnées de contact

Fabricant	Koios Care (BV)
Adresse	Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, Belgique
Support technique	support@koios.care
Site web	www.koios.care

Demander une version papier de la présente notice d'utilisation

La présente notice d'utilisation est fournie sous forme électronique. Vous pouvez demander une version imprimée à tout moment, gratuitement et sans avoir à fournir de justification. Pour ce faire, contactez Koios Care à l'adresse support@koios.care en indiquant votre nom et votre adresse postale. Votre version papier vous sera envoyée dans un délai de 7 jours calendaires à compter de votre demande. La version en vigueur est également toujours disponible sur www.koios.care.

Avertissements



AVERTISSEMENT — Matériel validé uniquement: Utilisez exclusivement les configurations matérielles validées telles que mentionnées dans la documentation.

L'utilisation sur du matériel non pris en charge peut entraîner des problèmes de compatibilité ou des performances peu fiables.

AVERTISSEMENT — Traitement des données personnelles de santé: Ce dispositif traite des données personnelles de santé. Que les données soient utilisées localement ou via un service cloud, des données telles que les métadonnées d'étude et les identifiants des patients peuvent être traitées à des fins de workflow. Lorsque cela est nécessaire, une pseudonymisation est appliquée.

AVERTISSEMENT — Désinstallation et suppression des données: Pour garantir que les données relatives au patient soient entièrement supprimées, suivez les étapes détaillées de désinstallation. Ces étapes sont conçues pour supprimer en toute sécurité toutes les informations associées du système pendant le processus de désinstallation.

AVERTISSEMENT — Mises à jour logicielles: Les mises à jour logicielles sont nécessaires au bon fonctionnement du dispositif. Après chaque mise à jour, vérifiez que le dispositif fonctionne correctement. Si l'installation échoue, désinstallez puis réinstallez l'application. Si le problème persiste, contactez le support technique.

AVERTISSEMENT — Interprétation des résultats d'IA: Les résultats générés par l'IA doivent être interprétés avec la prudence nécessaire. Les utilisateurs doivent comprendre que ces résultats présentent des limites et peuvent contenir des résultats faux positifs ou faux négatifs. Tenez toujours compte du contexte clinique complet lors de la prise de décisions fondées sur l'analyse par IA.

AVERTISSEMENT — Utilisateurs non concernés: PARKIWATCH n'est pas destiné aux personnes présentant des déficiences cognitives sévères qui entravent l'utilisation sûre et cohérente d'un smartphone. Le dispositif ne doit pas être utilisé par des patients n'ayant pas reçu de diagnostic formel de la maladie de Parkinson par un médecin qualifié. Il n'est pas non plus adapté aux utilisateurs présentant des affections physiques ou une sensibilité cutanée qui empêchent le port continu d'une montre connectée ou d'un capteur poignet tiers conformément aux instructions. Consultez le manuel utilisateur du fabricant de la montre connectée ou du capteur poignet pour les informations relatives aux matériaux et au nettoyage.

AVERTISSEMENT — Sécurité: Étant donné que PARKIWATCH traite des informations sensibles, vous devez suivre les mesures de sécurité suivantes. Protégez toujours votre smartphone avec un code d'accès sécurisé, un code PIN ou une empreinte digitale. Vous pouvez le faire via le menu « Sécurité et confidentialité » dans les paramètres de votre smartphone. Ne partagez vos identifiants avec personne ; Koios Care ne vous demandera jamais votre mot de passe. Synchronisez vos données uniquement via un réseau Wi-Fi ou mobile privé et de confiance. Évitez d'utiliser des points d'accès Wi-Fi publics et non chiffrés (par exemple dans les cafés ou les aéroports). En cas de cyberattaque, déconnectez PARKIWATCH du réseau et contactez immédiatement KOIOS CARE à l'adresse support@koios.care.

AVERTISSEMENT — Équipement compatible et batterie: Assurez-vous que votre smartphone et la montre connectée ou le capteur poignet tiers sont compatibles. Chargez-les quotidiennement et maintenez le niveau de batterie au-dessus de 20 %.

AVERTISSEMENT — Activités susceptibles d'interférer avec la détection: Certaines activités (par exemple, l'utilisation d'outils électriques, le vélo sur une route cahoteuse ou la pratique d'un instrument de musique) peuvent être identifiées à tort par PARKIWATCH comme des schémas de mouvement liés à la maladie de Parkinson. De même, si vous ne portez pas la montre connectée ou le capteur poignet tiers, ou si la batterie de l'appareil tiers est déchargée, le système ne peut pas collecter de données. Les données manquantes dans vos rapports sont généralement dues au fait que la montre connectée ou le capteur poignet n'est pas porté correctement ou n'est pas chargé. Consultez le manuel utilisateur du fabricant pour les instructions concernant la charge et le port corrects de l'appareil.

AVERTISSEMENT — Nettoyage et irritation cutanée: Maintenez les capteurs à l'arrière de la montre connectée ou du capteur poignet tiers propres et exempts de saletés (telles que lotion ou sueur) à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux. Consultez le manuel du fabricant pour les instructions de nettoyage spécifiques afin d'éviter les irritations cutanées.

Réglementation et conformité

Le système est conforme à la législation et aux normes spécifiques suivantes.

Général (normes internationales)

- EN ISO 13485:2016/A11:2021 — Dispositifs médicaux — Systèmes de management de la qualité — Exigences à des fins réglementaires.
- EN ISO 14971:2019/A11:2021 — Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux.
- EN 62304:2006/A1:2015 — Logiciels de dispositifs médicaux — Processus du cycle de vie du logiciel.
- EN 62366-1:2015/A1:2020 — Dispositifs médicaux — Partie 1 : Application de l'ingénierie de l'aptitude à l'utilisation aux dispositifs médicaux.
- EN ISO 15223-1:2021/A1:2025 — Dispositifs médicaux — Symboles à utiliser avec les informations fournies par le fabricant — Partie 1 : Exigences générales.
- EN 82304-1:2017 — Logiciels de santé — Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité des produits.
- EN IEC 81001-5-1:2022 — Sécurité, efficacité et sûreté des logiciels de santé et des systèmes informatiques de santé — Partie 5-1 : Sûreté — Activités au cours du cycle de vie du produit.

Législation de l'Union européenne

- Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux (MDR).
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement général sur la protection des données — RGPD).
- Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (Règlement sur l'intelligence artificielle).

Le produit a été conçu conformément aux directives européennes relatives aux dispositifs médicaux.

Annexe 1 — Exemple d'appairage d'une montre connectée WearOS

L'exemple suivant montre comment une montre connectée WearOS tierce peut être initialement appairée à votre smartphone Android. Pour des informations détaillées, consultez les directives du fabricant de la montre connectée. Les descriptions ci-dessous suivent un exemple avec un appareil MOBVOI Ticwatch E3 compatible.

Étape 1	Allumez la montre connectée en maintenant enfoncé le bouton supérieur droit.
Étape 2	Lorsque l'écran de démarrage s'affiche, appuyez sur le bouton (i) en bas.
Étape 3	Sélectionnez la langue souhaitée. Vous pouvez faire défiler vers le bas pour plus d'options.
Étape 4	L'écran suivant présente les conditions d'utilisation (CGU) de Mobvoi (le fabricant de la montre). Faites défiler jusqu'en bas et sélectionnez « J'ai lu ».
Étape 5	Dans l'application compagnon, choisissez la montre connectée (p. ex. « TicWatch E3 ») et confirmez le code d'appairage Bluetooth sur les deux appareils.
Étape 6	Attendez que le téléphone récupère les informations de la montre.
Étape 7	Connectez-vous à votre compte Google sur la montre pour utiliser les applications Google, télécharger de nouvelles applications et activer « Localiser mon appareil ».
Étape 8	Connectez votre compte Google à votre montre et attendez que la connexion soit terminée.
Étape 9	Configurez un verrouillage d'écran pour votre montre (schéma ou code PIN), ou ignorez cette étape.
Étape 10	Sélectionnez les applications que vous souhaitez installer sur votre montre ou ignorez cette étape pour continuer.
Étape 11	Attendez que le processus de configuration soit terminé. La montre est prête à être utilisée.



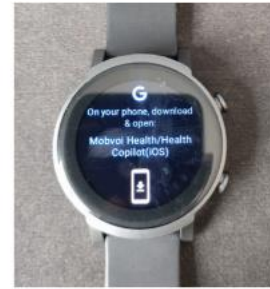
Start by powering-on the smartwatch by long-pressing the top right button.



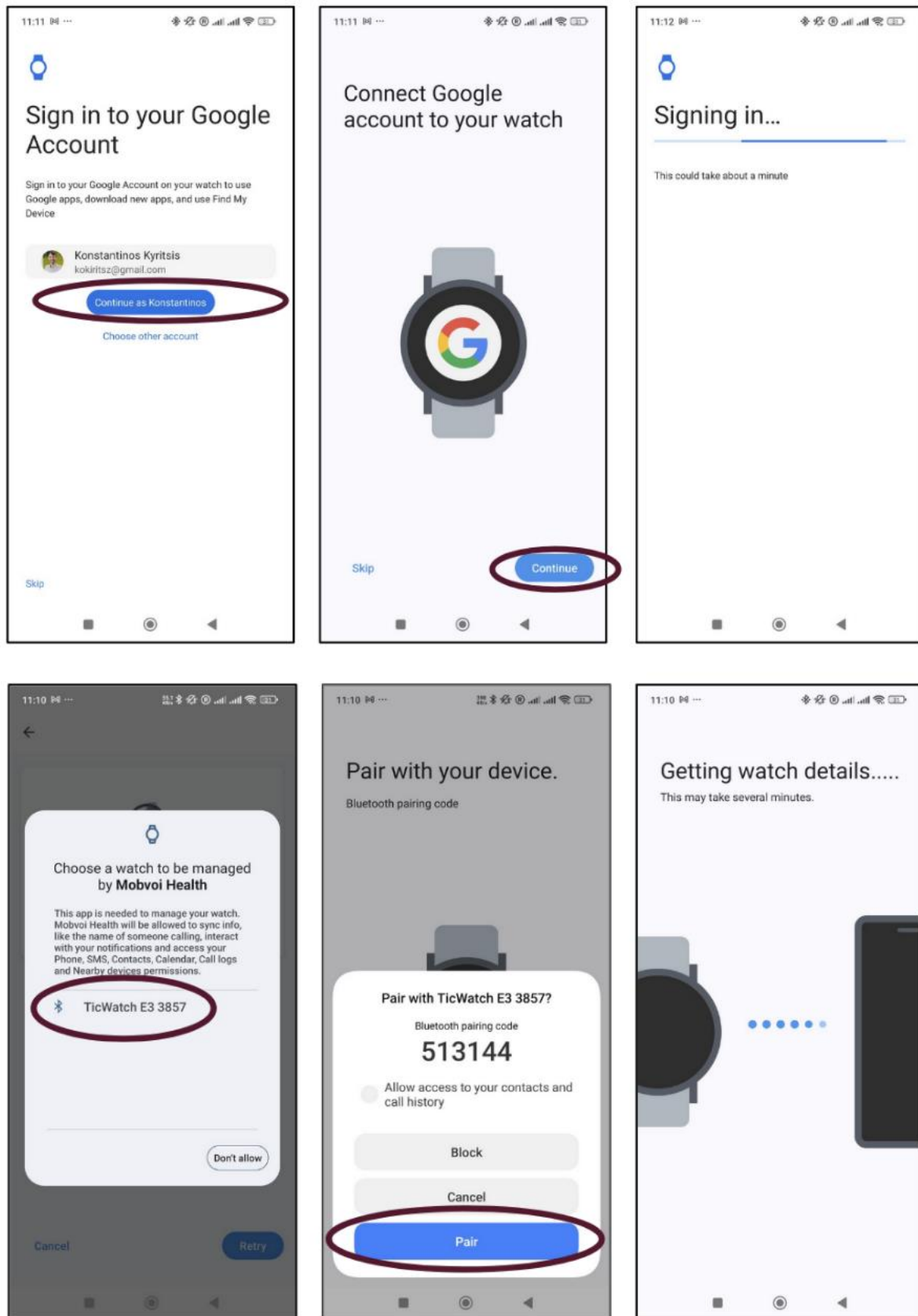
When you see the above screen press the (i) button at the bottom.

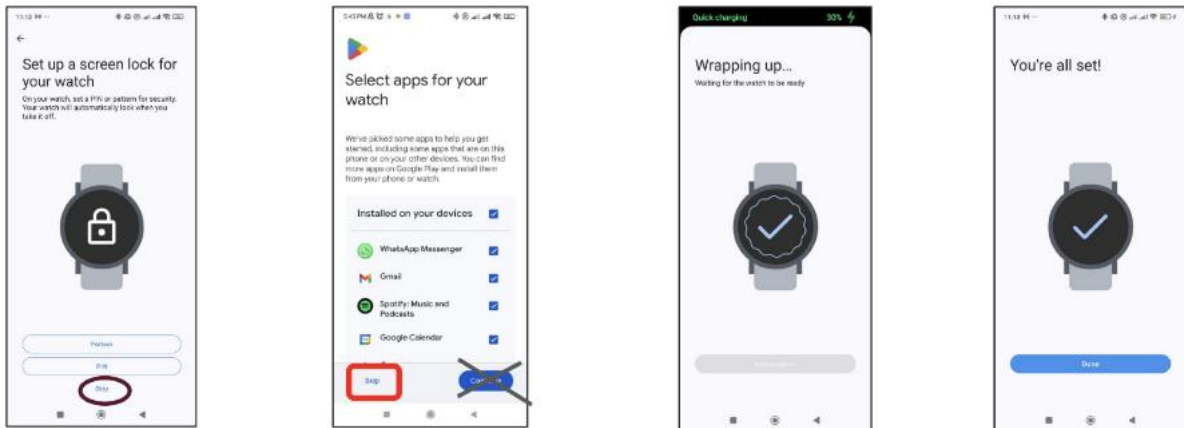


Select the language of interest. You can scroll below for more options.



The next screen is the Terms of Service (ToS) by Mobvoi (the manufacturer of the watch). Scroll all the way to the bottom and select "I've read it".

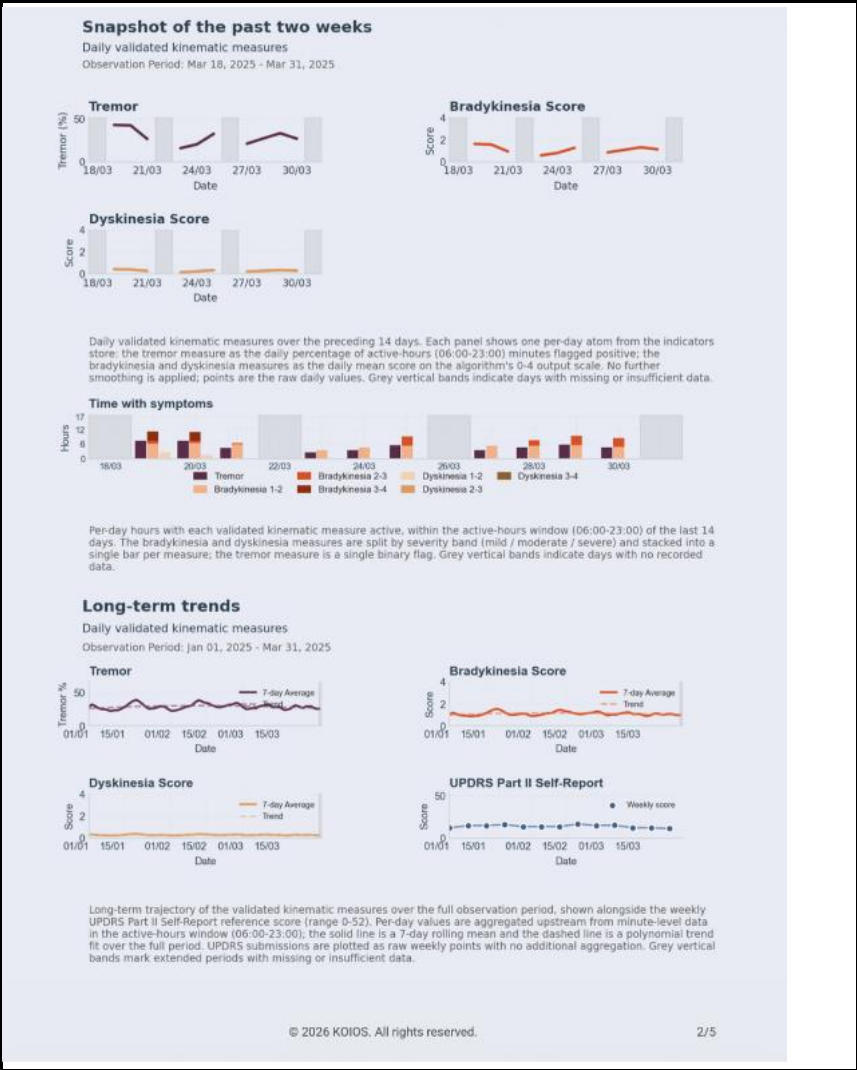




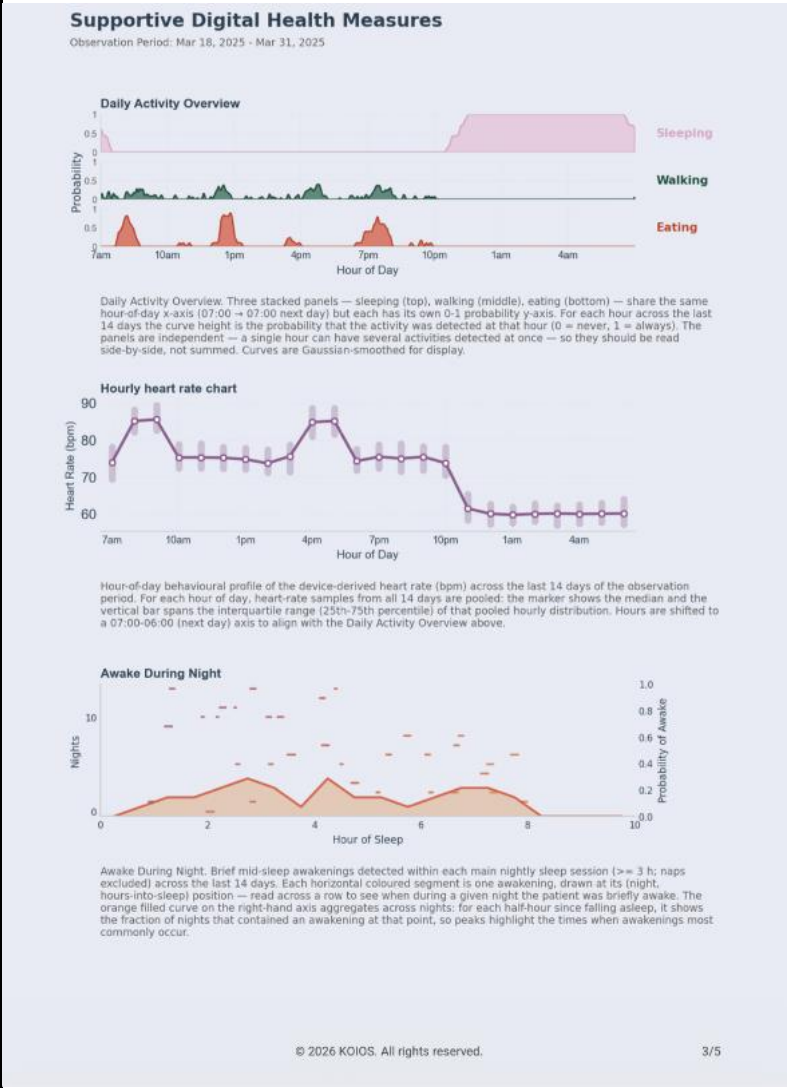
Annexe 2 — Contenu du rapport PDF

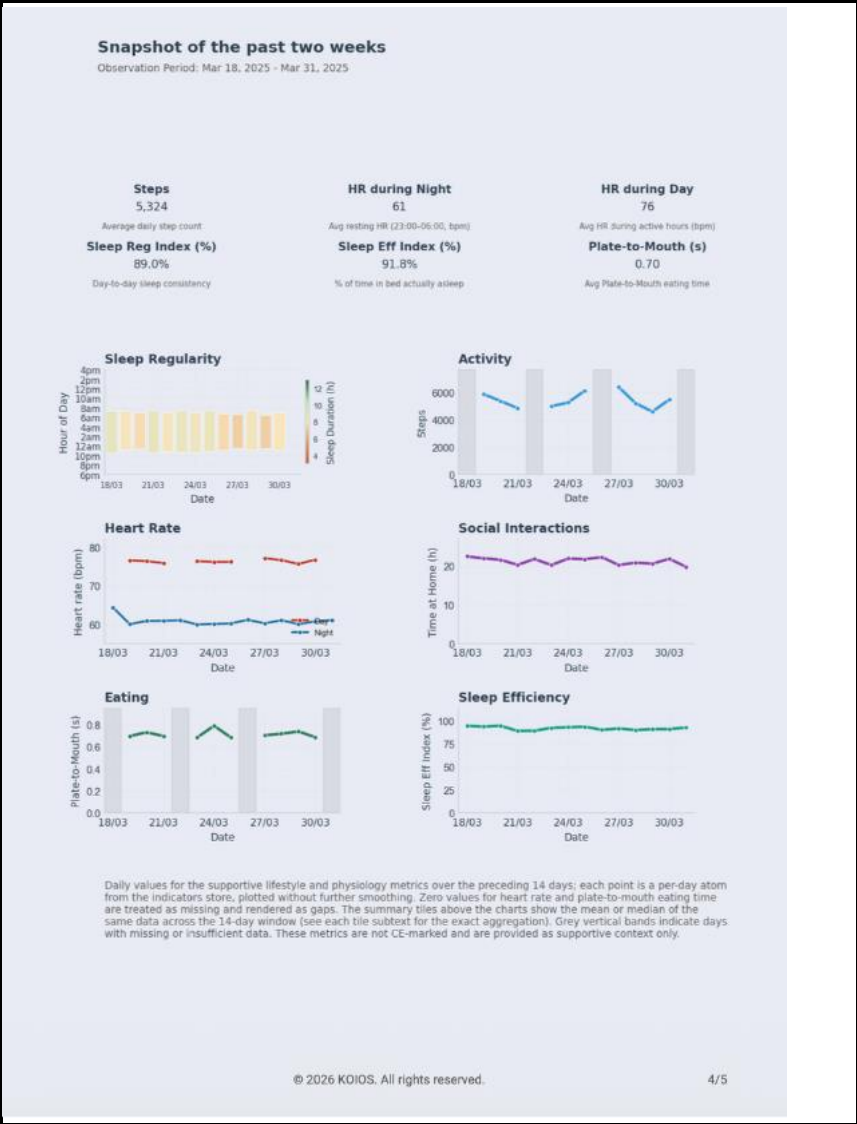
Cette partie du mode d'emploi décrit le contenu du rapport PDF généré par PARKIWATCH. Consultez votre professionnel de santé pour l'interprétation du rapport.

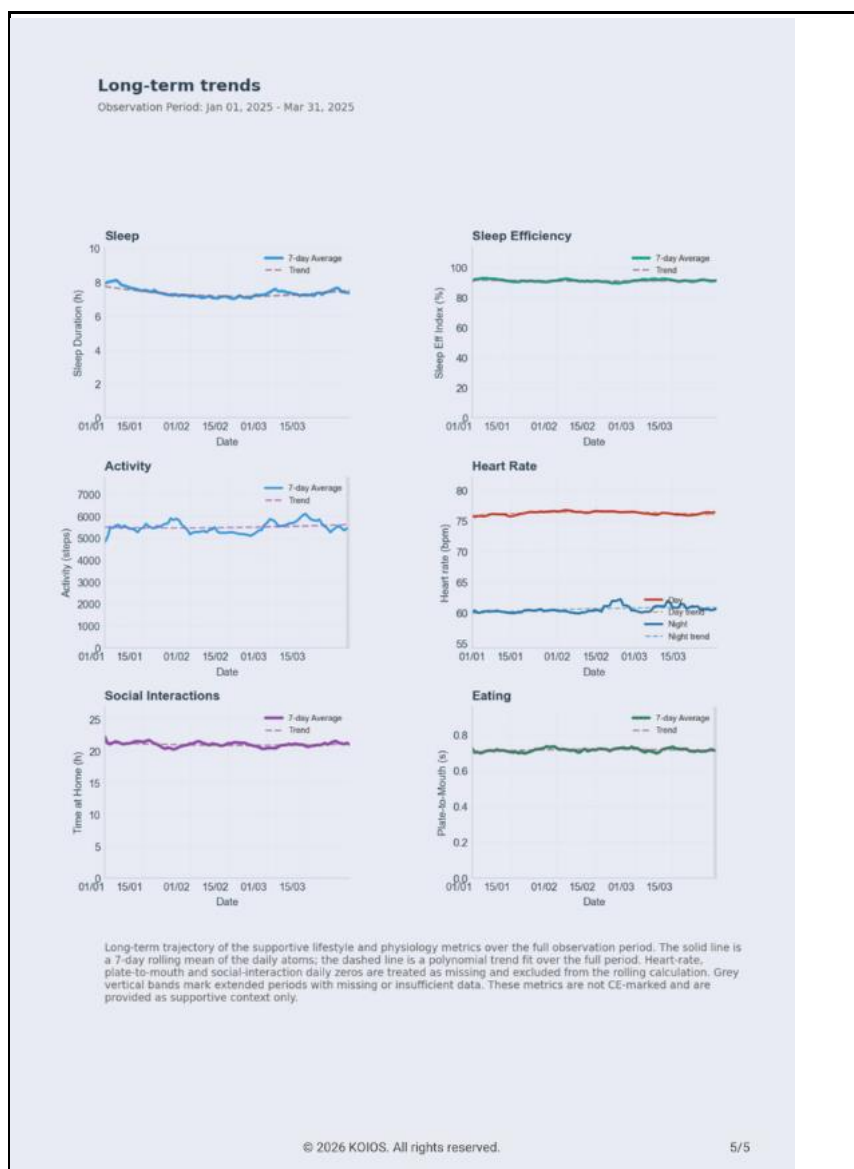




Cette section du mode d'emploi explique le contenu du rapport PDF généré par PARKIWATCH. Consultez votre professionnel de santé pour l'interprétation de ce rapport.







Mesures cinématiques validées

Cette page montre à quoi a ressemblé votre journée moyenne au cours des deux dernières semaines. Le graphique du haut indique comment le tremblement, la bradykinésie et la dyskinésie augmentent et diminuent au cours de la journée. La ligne foncée représente votre niveau habituel et la bande ombrée indique l'ampleur de la variation d'un jour à l'autre. Le graphique du bas montre, heure par heure, la fréquence à laquelle chaque type de mouvement a été observé, afin que vous puissiez voir à quels moments vos symptômes sont les plus ou les moins perceptibles.

Consultez toujours votre professionnel de santé pour l'interprétation des résultats de ce rapport PDF.

Aperçu des deux dernières semaines

Vous trouverez ici vos chiffres quotidiens des deux dernières semaines, ainsi qu'une vue d'ensemble du mois écoulé. Le diagramme en barres indique le nombre d'heures par jour

pendant lesquelles vous avez ressenti des symptômes légers, modérés ou sévères. Les graphiques du bas affichent les symptômes mesurés par la montre aux côtés du questionnaire hebdomadaire que vous remplissez vous-même, ce qui vous permet de voir si votre ressenti correspond à ce que la montre enregistre. Les bandes grises marquent les jours pour lesquels les données disponibles étaient insuffisantes.

REMARQUE: Les pages suivantes du rapport PDF traitent des mesures numériques de santé de soutien et NON des mesures cinématiques validées. Cela signifie que, bien que ces informations apportent un contexte utile concernant votre niveau d'activité quotidien, elles sont fournies à des fins purement informatives.

Mesures numériques de santé de soutien

Ces graphiques supplémentaires montrent votre routine quotidienne, comme vos habitudes de sommeil, de marche et d'alimentation, votre fréquence cardiaque au cours de la journée et les moments où vous vous êtes réveillé pendant la nuit. Ils sont fournis à titre d'information de fond, en soutien de vos mesures numériques de santé.

Aperçu des deux dernières semaines (mesures de soutien)

Un court résumé de vos données de mode de vie : pas, fréquence cardiaque diurne et nocturne, régularité de votre rythme de sommeil, qualité réelle de votre sommeil au lit et vitesse habituelle à laquelle vous mangez. Les graphiques plus petits montrent l'évolution quotidienne de chacune de ces données. Ils fournissent des informations de soutien, mais ne constituent pas des mesures cinématiques validées.

Tendances à long terme

Une vue d'ensemble à long terme de votre mode de vie : durée du sommeil, qualité du sommeil, activité, fréquence cardiaque (jour et nuit), temps passé à la maison et vitesse d'alimentation au cours du mois écoulé. La ligne continue est la moyenne mobile, et la ligne pointillée indique si les valeurs augmentent ou diminuent dans le temps. Comme dans les pages précédentes, ces informations apportent un contexte numérique de santé, mais ne constituent pas des mesures cinématiques validées.

Consultez toujours votre professionnel de santé pour l'interprétation des résultats du rapport PDF.

Historique des révisions

Version	Date de la dernière émission	Author	Description de la modification
1	22/05/2026	Konstantinos Kyritsis	Émission initiale
2	29/05/2026	Konstantinos Kyritsis	Numéro UDI ajouté dans la figure de la boîte « À propos » (About box)
3	01/09/2026	Konstantinos Kyritsis	Ajout des informations pour demander une version papier du mode d'emploi et des normes mises à jour, ainsi que des informations sur la consultation du professionnel de santé.

1.8 Support

Bei technischen Problemen, die durch die obigen Schritte nicht gelöst werden, kontaktieren Sie bitte den Koios Care Support über die Angaben in der Smartphone-Anwendung unter „Kontakt“ im linken Menü oder am Ende dieses Dokuments.

1.8 Assistance

En cas de problèmes techniques, les instructions obligatoires ne sont pas disponibles, contactez l'assistance Koios Care via l'assistance téléphonique pour smartphone sous « Contact » dans le menu ou à la fin de ces documents

1.8 Assistance

En cas de problèmes techniques, les instructions obligatoires ne sont pas disponibles, contactez l'assistance Koios Care via l'assistance téléphonique pour smartphone sous « Contact » dans le menu ou à la fin de ces documents