

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

KOIOS CARE

PARKIWATCH

Gebruiksaanwijzing

Voor mensen met de ziekte van Parkinson

Gebruiksaanwijzing

Apparaatnaam	PARKIWATCH
Fabrikant	Koios Care (BV), Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, België
Uitgiftedatum	01/09/2026
IFU-onderdeelnummer	PARKIWATCH.IFU.NL.002
Versie	3

Over deze handleiding

Dit document bevat essentiële informatie voor het veilige en effectieve gebruik van het PARKIWATCH-systeem. Het is bedoeld voor mensen met de ziekte van Parkinson. Voor zorgprofessionals bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

Algemene systeeminformatie, technische specificaties en wettelijke details die voor alle gebruikers gelden, vindt u in Sectie 3.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

Juridische kennisgeving

© 2025 KOIOS CARE. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel deel van dit werk mag worden gereproduceerd, gekopieerd, bewerkt of in welke vorm of op welke wijze dan ook worden verzonden zonder de schriftelijke toestemming van KOIOS CARE.

KOIOS CARE en PARKIWATCH zijn handelsmerken van KOIOS CARE. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en worden uitsluitend redactioneel gebruikt, zonder de intentie inbreuk te maken.

Producten en diensten zijn mogelijk niet in uw regio beschikbaar. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor meer informatie over de beschikbaarheid. KOIOS CARE streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken, maar is niet verantwoordelijk voor typografische fouten. KOIOS CARE is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of andere commerciële schade die voortvloeit uit, of die zou voortvloeien uit, het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van informatie, apparatuur, methoden of processen die in dit document worden beschreven. Raadpleeg de nationale autoriteiten om te bepalen welke lokale operationele voorschriften van toepassing zijn.

Elk ernstig incident dat zich met betrekking tot het apparaat heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan KOIOS CARE en aan de bevoegde autoriteit van het land waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

KOIOS CARE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in dit document aan te brengen. De oorspronkelijke versie van dit document is in het Engels.

KOIOS CARE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit document indien er ongeautoriseerde wijzigingen zijn aangebracht in de inhoud of opmaak.

Voor meer informatie over KOIOS CARE-producten kunt u terecht op <https://www.koios.care>

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

Sectie 1: Gids voor mensen met de ziekte van Parkinson (patiënten)

1.1 Wat is PARKIWATCH?

PARKIWATCH is een softwareapplicatie die werkt met uw Android-smartphone. Voor PARKIWATCH moet u een smartwatch of polsbandsensor van een derde partij dragen die ruwe bewegingsgegevens (accelerometrie) verzamelt. Daarnaast hebt u een eigen Android-smartphone nodig die voldoet aan de minimale technische vereisten zoals beschreven in paragraaf 1.4.2 om PARKIWATCH te installeren en te gebruiken.

PARKIWATCH is ontworpen als aanvulling op de klinische beoordeling door uw zorgprofessional, door passief en continu informatie te verzamelen buiten een klinische setting, tussen de consulten door.

1.1.1 Softwareversie en conformiteit

Deze gebruiksaanwijzing is specifiek van toepassing op PARKIWATCH versie 1.0.0. Het gebruik van een verouderde softwareversie kan leiden tot onnauwkeurige gegevens of beveiligingslekken. U kunt uw huidige softwareversie controleren in de PARKIWATCH-app op uw smartphone via het menu aan de linkerkant, onder "Over".

Software-updates zijn verplicht voor de continue veiligheid, beveiliging en prestaties van het apparaat. Zorg ervoor dat "Automatische updates" is ingeschakeld in de Google Play Store voor PARKIWATCH.

1.2 Wat PARKIWATCH doet (Beoogd gebruik)

PARKIWATCH is Software as a Medical Device (SaMD), bedoeld voor de continue, passieve detectie en kwantitatieve beoordeling van kinematische patronen die representatief zijn voor:

- **(i) tremor**, gedefinieerd als oscillerende bewegingen;
- **(ii) bradykinesie**, gedefinieerd als vermindering van de bewegingssnelheid en -amplitude tijdens vrijwillige activiteit van de bovenste ledematen;
- **(iii) dyskinesie**, gedefinieerd als onregelmatige, niet-ritmische, hyperkinetische bewegingen die overeenkomen met door levodopa veroorzaakte onvrijwillige bewegingen;

bij volwassenen met de ziekte van Parkinson.

Vereiste apparatuur: Voor PARKIWATCH moet u een smartwatch of polsbandsensor van een derde partij dragen die ruwe bewegingsgegevens (accelerometrie) verzamelt. U hebt een eigen Android-smartphone nodig om de PARKIWATCH-smartphone-app voor Android te installeren en te gebruiken.

Compatibiliteit: PARKIWATCH is compatibel met smartwatches of polsbandsensoren van derden die beschikken over een inertiaële meeteenheid (IMU) waarmee ruwe accelerometergegevens worden geleverd.

PARKIWATCH verwerkt triaxiale accelerometergegevens die zijn verzameld door smartwatches of polsbandapparaten van derden. PARKIWATCH past gevalideerde signaalverwerkings- en statistische leeralgoritmen toe om continue, longitudinale output te genereren: gevalideerde kinematische metingen. Deze worden via een webgebaseerd dashboard en PDF-rapporten beschikbaar gesteld aan zorgprofessionals. De gevalideerde kinematische metingen worden berekend in combinatie met andere ondersteunende digitale gezondheidsgegevens.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

PARKIWATCH is NIET bedoeld om de ziekte van Parkinson te diagnosticeren, om zelfstandig specifieke medicamenteuze therapie aan te bevelen of aan te passen. De resultaten zijn aanvullend op, en moeten worden geïnterpreteerd in de context van, de standaard klinische beoordeling en het oordeel van de behandelend zorgprofessional.

1.3.1 Wie mag PARKIWATCH NIET gebruiken (Contra-indicaties)

- Atypisch parkinsonisme, waaronder multipele systeematrofie (MSA), progressieve supranucleaire parese (PSP) en corticobasale degeneratie (CBD).
- Secundaire parkinsonistische syndromen, waaronder door medicatie geïnduceerd parkinsonisme, vasculair parkinsonisme en parkinsonisme door normale-druk-hydrocefalie.
- Essentiële tremor of andere niet-Parkinson-gerelateerde bewegingsstoornissen die de nauwkeurigheid van de kinematische gegevens kunnen beïnvloeden.

1.3.2 Wie zou PARKIWATCH moeten gebruiken

Dit systeem is alleen voor u bedoeld als:

(A) U momenteel onder behandeling en begeleiding staat van een bevoegd zorgprofessional (zoals een neuroloog).

(B) U fysiek en mentaal in staat bent een smartphone te gebruiken en bereid bent dagelijks, gedurende uw wakkere uren, een smartwatch of polsbandje van een derde partij te dragen.

1.4 Aan de slag: instellen en installeren

Downloaden

Open de Google Play Store op uw Android-smartphone en zoek naar “PARKIWATCH” van Koios Care. Tik op de app om deze te downloaden en te installeren.

Registreren / Inloggen

Open de app en volg de instructies op het scherm om u te registreren met een geldig e-mailadres. U ontvangt een verificatie-e-mail met een bevestigingscode waarmee u het e-mailadres kunt valideren en kunt inloggen met de gegevens die u tijdens de registratie hebt opgegeven.

Toestemmingen en informatie

De PARKIWATCH-app vraagt om toestemmingen voor toegang tot sensorinformatie, om op de achtergrond te kunnen draaien en meldingen te kunnen verzenden. Deze toestemmingen zijn noodzakelijk voor een correcte werking van het systeem. Aanvullende informatie omvat geslacht, geboortjaar en het jaar waarin de diagnose Parkinson werd gesteld. Tot slot wordt u gevraagd met welke hand u eet (links of rechts) en aan welke pols u de smartwatch of sensor draagt (links of rechts).

De smartwatch of polsbandsensor van een derde partij koppelen

Raadpleeg de documentatie van de smartwatch of polsbandsensor van een derde partij voor instructies over de juiste installatie van het apparaat. Daarnaast worden de instructies op het scherm in de Android-app op uw smartphone weergegeven.

Contact maken met zorgprofessionals

Om uw gegevens te delen, selecteert u in het menu aan de linkerkant de optie “Zorgprofessional”. Als uw arts u een e-mailadres heeft gegeven, voert u dit in om een verbindingsverzoek te verzenden. Als uw zorgprofessional de verbinding al heeft geïnitieerd,

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

kunt u de uitnodiging via hetzelfde menu accepteren of weigeren. Zodra de verbinding actief is, worden uw gegevens automatisch met uw zorgprofessional gedeeld ter beoordeling.

Het apparaat op de juiste manier dragen

Draag de smartwatch of polsbandsensor van een derde partij stevig (maar comfortabel) om de pols, zoals voorgeschreven door uw arts. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de fabrikant voor instructies over het dragen van de smartwatch of sensor.

1.4.1 Gegevensbeveiliging en privacy

U hebt te allen tijde het recht om uw verzamelde gegevens in te zien of uw account te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met support@koios.care.

1.4.2 Hardware- en softwarecompatibiliteit

PARKIWATCH is compatibel met smartwatches en polsbandsensoren van derden die beschikken over een inertiële meeteenheid (IMU) die driedimensionale bewegingsgegevens kan leveren via een accelerometer met een bemonsteringsfrequentie van ten minste 18 Hz. Een lijst met smartwatches en polsbandsensoren van derden die compatibel zijn met PARKIWATCH is beschikbaar op de website van Koios Care.

Om een correcte werking te garanderen, mag PARKIWATCH alleen worden gebruikt op apparaten die voldoen aan de volgende gevalideerde minimale technische vereisten:

- Het besturingssysteem moet Android 9.0 (SDK 28) of hoger zijn.
- Bluetooth 5.0 (of hoger) en een actieve internetverbinding (wifi of mobiel internet).
- Toegang tot de Google Play Store is vereist voor installatie en verplichte updates.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de smartphone voldoet aan de minimale hardware- en softwarevereisten zoals vermeld in paragraaf 1.4.2. Gebruik op apparaten die niet aan deze specificaties voldoen, kan leiden tot onbetrouwbare prestaties.

1.5 Passieve monitoring met PARKIWATCH

PARKIWATCH werkt op de achtergrond en vereist geen aandacht, behalve voor het invullen van vragenlijsten.

Vragenlijsten

Indien uw zorgprofessional hiervoor kiest, stuurt PARKIWATCH u periodiek een melding om een korte klinische vragenlijst in te vullen — de UPDRS-II — met een terugkijkperiode van zeven (7) dagen. Door deze vragen te beantwoorden geeft u aan hoe u zich voelt en biedt u essentiële, aanvullende context voor de kinematische gegevens die door de sensoren in uw smartwatch of polsbandsensor van een derde partij worden vastgelegd. Voor de meest accurate inzichten voor uw zorgprofessional verzoeken wij u deze meldingen zo snel mogelijk en eerlijk te beantwoorden.

Uw gegevens bekijken

Voor een uitgebreide analyse genereert het systeem automatisch gedetailleerde PDF-rapporten over uw kinematische patronen. Deze rapporten zijn specifiek ontworpen voor interpretatie door zorgprofessionals en dienen samen met uw zorgprofessional te worden besproken om uw zorgplan te bepalen.

1.5.1 Onderhoud en verzorging

Handmatige kalibratie van de software is niet nodig.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

1.5.2 Stoppen met het gebruik van PARKIWATCH

Als uw zorgprofessional aangeeft dat u PARKIWATCH niet langer moet gebruiken, verwijdt u eenvoudigweg de PARKIWATCH-app van uw smartphone. Het verwijderen van de app stopt de gegevensverzameling, maar uw historische gegevens worden niet automatisch uit de beveiligde cloud verwijderd. Als u uw persoonlijke gezondheidsgegevens permanent wilt laten verwijderen, neem dan conform uw privacyrechten (AVG) contact op met support@koios.care.

1.6 Klinische voordelen

De behandeling van Parkinson is doorgaans gebaseerd op observaties tijdens consulten die elke 3 tot 6 maanden plaatsvinden. PARKIWATCH monitort continu uw bewegingspatronen gedurende de dag en levert gevalideerde kinematische metingen die representatief zijn voor bradykinesie, dyskinesie en tremor, met een resolutie van elke 15 minuten. Dit geeft uw zorgprofessional informatie tussen de consulten door en kan bijdragen aan beter onderbouwde beslissingen over uw zorg en de manier waarop uw lichaam op het behandelplan reageert.

PARKIWATCH stelt geen diagnose van de ziekte van Parkinson, adviseert of wijzigt uw medicatie niet en vervangt niet het oordeel van een zorgprofessional.

1.7 Probleemoplossing

Als u een probleem ondervindt met PARKIWATCH, probeer dan eerst de stappen te volgen die het beste bij uw situatie passen.

Probleem: Mijn smartphone en het polsbandapparaat van een derde partij synchroniseren niet.

Mogelijke oorzaak: Bluetooth is mogelijk uitgeschakeld, of de apparaten bevinden zich te ver van elkaar.

Oplossing:

1. Controleer of de PARKIWATCH-app is geïnstalleerd en actief is op uw smartphone. U kunt controleren of het systeem correct werkt door de meldingenbalk bovenaan uw smartphone te bekijken; de melding "Alles werkt naar behoren" geeft aan dat de software succesvol gegevens vastlegt en verwerkt. Als deze melding ontbreekt, open dan de app op uw smartphone om de monitoring te hervatten.
2. Zorg ervoor dat de smartwatch of polsbandsensor van een derde partij correct is ingesteld. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van de fabrikant.
3. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op zowel uw smartphone als de smartwatch of polsbandsensor van een derde partij.
4. Zorg ervoor dat de batterij van zowel uw smartphone als de smartwatch of polsbandsensor opgeladen blijft en houd de apparaten dicht bij elkaar.
5. De PARKIWATCH-app synchroniseert het apparaat automatisch.
6. Als het probleem aanhoudt, start u zowel uw Android-smartphone als de smartwatch of polsbandsensor van een derde partij opnieuw op door ze volledig uit en weer aan te zetten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de fabrikant voor instructies over de herstartprocedure.

Probleem: Ik zie geen nieuwe rapporten in de PARKIWATCH-app op mijn smartphone.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

Mogelijke oorzaak: Nieuwe gegevens zijn nog niet gesynchroniseerd vanaf de smartwatch of polsbandsensor van een derde partij, of zijn nog niet naar de cloud geüpload.

Oplossing:

1. Raadpleeg eerst de gebruikershandleiding van de fabrikant van de smartwatch of polsbandsensor voor instructies over de installatieprocedure. Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen (meer dan 20%).
2. Controleer vervolgens of uw smartphone een actieve internetverbinding heeft (via wifi of mobiele data). PARKIWATCH heeft een internetverbinding nodig om gegevens te uploaden voor verwerking.

Probleem: De PARKIWATCH-app op mijn telefoon is vastgelopen of afgesloten.

Mogelijke oorzaak: Een tijdelijk softwareprobleem.

Oplossing:

1. Sluit de app volledig af via het scherm met recente apps op uw telefoon.
2. Heropen de PARKIWATCH-app op uw smartphone. In de meldingenbalk verschijnt nu de melding “Alles werkt naar behoren” van PARKIWATCH.
3. Als het probleem zich vaak voordoet, probeer dan uw smartphone opnieuw op te starten.

Probleem: De PARKIWATCH-app op mijn telefoon crasht direct na het opstarten.

Mogelijke oorzaak: Een softwareprobleem veroorzaakt door het Android-besturingssysteem.

Oplossing:

1. Ga naar de instellingen van uw smartphone en zoek naar “Apps”.
2. Zoek in de lijst van toepassingen naar “PARKIWATCH”.
3. Zoek in het menu dat verschijnt naar “Opslag en cache”. Selecteer “Opslag wissen” en “Cache wissen”.
4. Ga terug en selecteer “Verwijderen”. Hiermee wordt de PARKIWATCH-app definitief van uw smartphone verwijderd.
5. Volg de installatie-instructies om PARKIWATCH opnieuw op uw telefoon te downloaden, te installeren en te configureren.

Probleem: Ik ontvang geen meldingen voor mijn vragenlijsten.

Mogelijke oorzaak: De toestemming van de smartphone-app om meldingen te verzenden is mogelijk uitgeschakeld.

Oplossing:

1. Ga naar het hoofdmenu Instellingen van uw smartphone.
2. Tik op “Apps” of “Applicaties”.
3. Zoek en tik op “PARKIWATCH”.
4. Tik op “Meldingen” en zorg ervoor dat alle schakelaars zijn ingeschakeld.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

Probleem: Mijn huid raakt geïrriteerd onder de smartwatch of het polsbandapparaat van een derde partij dat ik om mijn pols draag.

Mogelijke oorzaak: Dit is een hardwareprobleem met de band of behuizing van de smartwatch of polsbandsensor van een derde partij, niet met de PARKIWATCH-software.

Oplossing:

1. Stop onmiddellijk met het dragen van de smartwatch of polsbandsensor van een derde partij.
2. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de smartwatch of polsbandsensor en neem contact op met de fabrikant van het apparaat voor advies over materialen en reiniging.
3. Breng uw zorgprofessional op de hoogte van de irritatie.

Mochten er technische problemen zijn die met de bovenstaande stappen niet zijn opgelost, neem dan contact op met de Koios Care-ondersteuning via de contactgegevens in de smartphone-app, te vinden onder "Contact" in het menu aan de linkerkant, of aan het einde van dit document.

1.8 Wettelijke meldingen en levensduur

De productlevensduur van PARKIWATCH is vastgesteld op vijf (5) jaar vanaf de releasedatum van de betreffende softwareversie. Aan het einde van de productlevensduur zal Koios Care geregistreerde gebruikers hiervan op de hoogte stellen en, indien van toepassing, begeleiding bieden bij de overstap naar een ondersteunde versie. De momenteel ondersteunde softwareversie staat vermeld op de voorpagina van dit document. Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het apparaat, moet onmiddellijk worden gemeld aan Koios Care (support@koios.care) en aan de bevoegde medische autoriteit in uw land van verblijf.

Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde cloudservers. Zorg ervoor dat uw smartphone minimaal 500 MB aan beschikbare opslagruimte heeft voor tijdelijke gegevensbuffering.

Deze handleiding is gemaakt door KOIOS CARE. Het doel ervan is de gebruiker te begeleiden bij het instellen en gebruiken van PARKIWATCH, ontwikkeld door KOIOS CARE.

1.9 Ondersteuning

Bij technische problemen, terwijl het schrijven niet meer mogelijk is, kunt u contact opnemen met de Koios Care Support via de smartphone-verbinding met een "contact" in het menu of de laatste documenten.

1.10 Wanneer een zorgverlener raadplegen

PARKIWATCH monitort uw bewegingen en verstrekt informatie aan uw behandelende zorgverlener. Het stelt geen diagnose, geeft geen medisch advies en vertelt u niet wat u met betrekking tot uw aandoening moet doen. Neem contact op met uw behandelende zorgverlener als:

- u nieuwe of verergerende symptomen opmerkt (bijvoorbeeld veranderingen in tremor, traagheid van bewegen, onwillekeurige bewegingen, evenwicht, of vallen);
- u vragen heeft over uw aandoening, uw behandeling of uw medicatie; PARKIWATCH beveelt geen behandeling aan en wijzigt geen behandeling;

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

- u vragen heeft over de informatie die in de applicatie wordt getoond of over uw monitoringgegevens; deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van de beoordeling door uw zorgverlener en dient door deze te worden geïnterpreteerd.

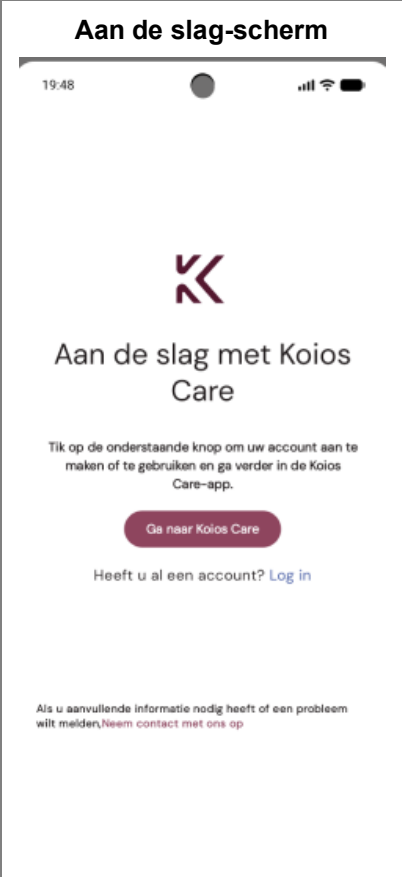
PARKIWATCH is geen noodstelsel en geeft geen realtime waarschuwingen. Neem bij een medisch noodgeval, of als u dringend hulp nodig heeft, rechtstreeks contact op met uw zorgverlener of de lokale hulpdiensten; vertrouw niet op de applicatie.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

Sectie 2: Gebruiksaanwijzing — PARKIWATCH instellen

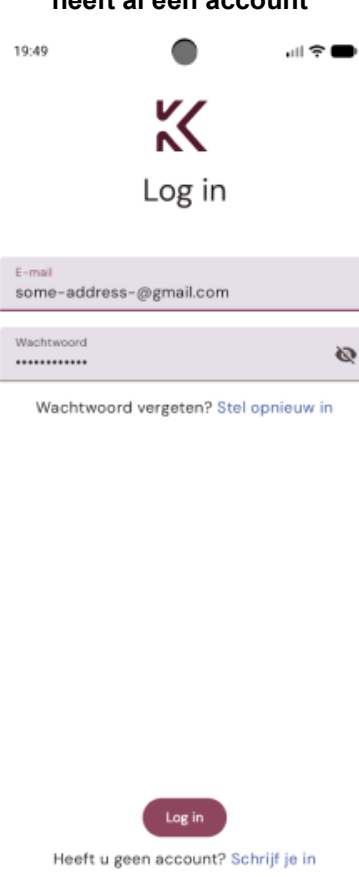
2.1 De PARKIWATCH-app instellen op uw Android-smartphone

In dit hoofdstuk worden de verschillende schermen beschreven die u tijdens het installatieproces doorloopt. Elke groep schermen wordt onderaan voorzien van een korte beschrijving van de actie of optie.

Aan de slag-scherm  Bij het opstarten van de PARKIWATCH-app krijgt u het scherm “Aan de slag” te zien. Dit is het belangrijkste toegangspunt tot de applicatie. Om te beginnen tikt u op de knop “Koios Care openen” om een nieuw account aan te maken of toegang te krijgen tot een bestaand account. Hebt u al een account, klik dan op de link “Inloggen”. Voor meer informatie of om een probleem te melden, is de link “Contact” onderaan het scherm beschikbaar.	Aanmeldscherm — gegevens invullen  Als u nog geen account hebt, dient dit scherm als startpunt om een account aan te maken. Vul uw voor- en achternaam en e-mailadres in en klik onderaan op “Aanmelden”. Er wordt een verificatie-e-mail naar het opgegeven adres gestuurd om de ingevoerde gegevens te bevestigen.	Aanmeldscherm — met behulp van de bevestigingscode  Na ontvangst van de e-mail voert u de bevestigingscode in het daarvoor bestemde veld in. Vervolgens stelt u een nieuw wachtwoord in dat voldoet aan de beveiligingsvereisten onder het wachtwoordveld: minimaal 8 tekens, met ten minste één kleine letter, één hoofdletter, één cijfer en één symbool. De knop “Bevestigen” wordt pas actief wanneer aan alle voorwaarden is voldaan.
---	--	---

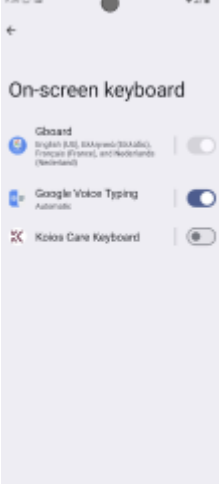
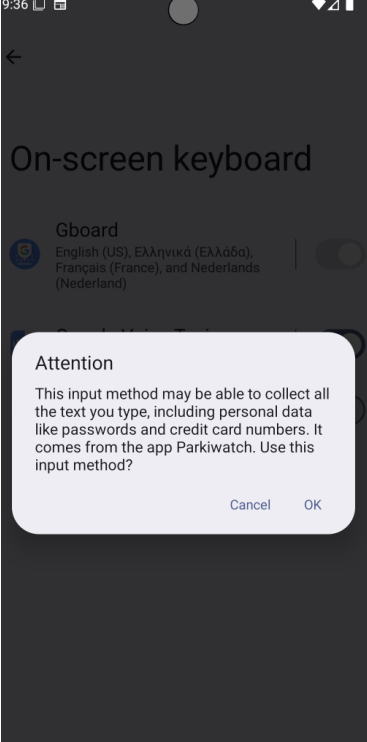
	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

		Door op “Bevestigen” te tikken, voltooit u de registratie.
--	--	--

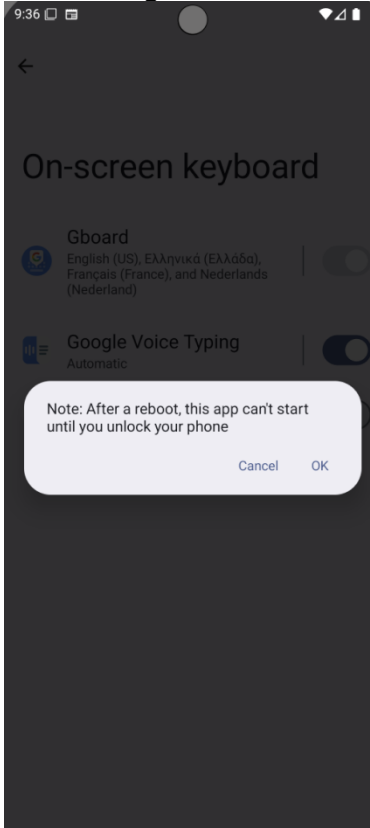
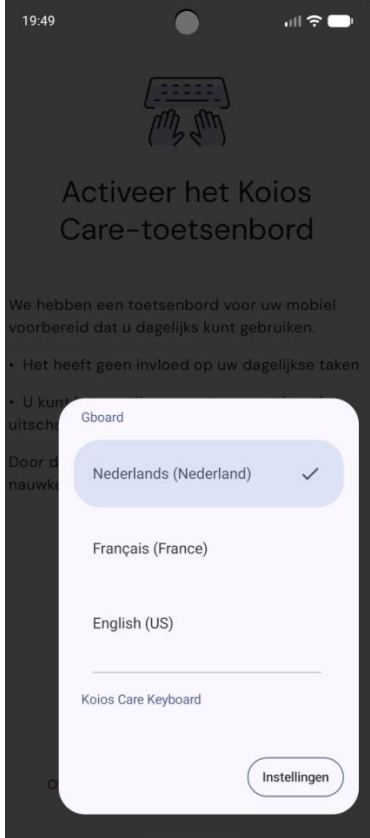
Inlogscher — gebruiker heeft al een account  Als u al een account hebt aangemaakt, is het inlogscher het toegangspunt tot de PARKIWATCH-app. Voer het e-mailadres en wachtwoord in die u tijdens de registratie hebt gebruikt en druk op “Inloggen”. Als u uw wachtwoord bent vergeten, stuurt de knop “Wachtwoord opnieuw instellen” een e-mail naar het opgegeven adres om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Dezelfde	Algemene voorwaarden  Na een succesvolle aanmelding komt u op het scherm met de algemene voorwaarden. Dit scherm geeft een overzicht van de belangrijkste bevoegdheden die Koios Care krijgt bij acceptatie. Door akkoord te gaan, geeft u Koios Care toestemming om registraties te beëindigen bij schending van de voorwaarden, gebruikerscommunicatie te bewerken of te verwijderen wanneer nodig, en gepersonaliseerde data-analyses uit te voeren. Een link naar het volledige document is opgenomen	Verbind uw smartwatch  Dit scherm biedt hulp bij het verbinden van uw smartwatch of polsbandsensor van een derde partij met de PARKIWATCH Android-app. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies de documentatie van de fabrikant van de smartwatch of polsbandsensor. U kunt deze stap tijdelijk overslaan om verder te gaan met de installatie. U moet uiteindelijk een compatibel apparaat aansluiten om PARKIWATCH correct te laten werken.
--	--	--

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

wachtwoordvereisten gelden als bij de registratie.	voor gebruikers die de volledige voorwaarden willen bekijken.	
--	---	--

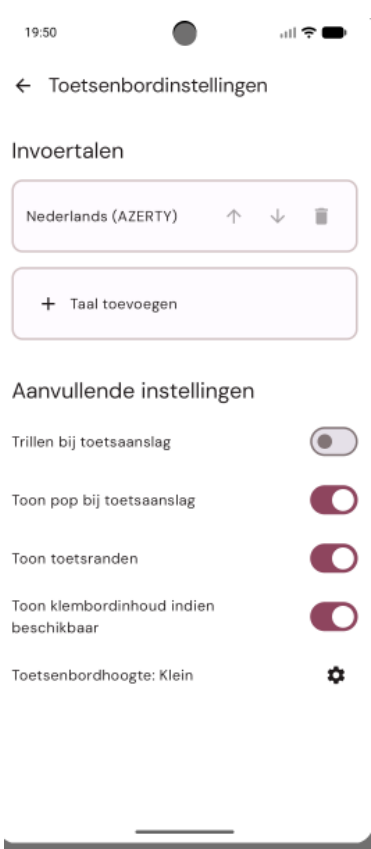
Het Koios Care-toetsenbord activeren  Vervolgens verschijnt het scherm voor het activeren van het Koios Care-toetsenbord. U kunt deze stap overslaan (en later inschakelen) of volledig overslaan. Het Koios Care-toetsenbord wordt gebruikt om ondersteunende digitale gezondheidsgegevens te verzamelen en heeft geen invloed op het verzamelen van de gevalideerde kinematische gegevens. Door op “Toetsenbord inschakelen” te drukken, wordt de configuratie van het Koios Care-toetsenbord voortgezet.	Het schermtoetsenbord selecteren  Het volgende scherm biedt de mogelijkheid om het toetsenbord in te schakelen als de primaire invoermethode voor alle standaardinvoer- en typfuncties op uw smartphone. Door op de schuifregelaar te tikken kunt u het toetsenbord in- of uitschakelen of vervangen door een ander toetsenbord dat op uw apparaat is geïnstalleerd. Door op de pijl linksboven te tikken, annuleert u dit proces.	De toetsenbordselectie controleren  Het volgende scherm toont een Android-melding die u attendeert op de aandachtspunten bij het selecteren van een nieuw toetsenbord, met name een toetsenbord dat afwijkt van het standaard Google-toetsenbord. Klik op OK om door te gaan met de toetsenbordwijziging, of op ANNULEREN om terug te keren naar het vorige scherm en het verificatieproces te annuleren.
--	---	--

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

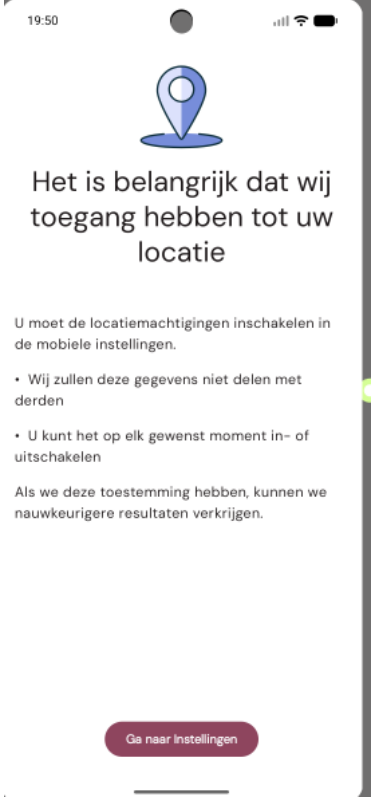
Het verificatieproces van het toetsenbord — telefoon ontgrendelen  Dit scherm informeert u dat de telefoon na de volgende herstart (door uzelf of door een Android-systeemprompt) moet worden ontgrendeld met uw Android-wachtwoord voordat de app kan starten. Dit is een beveiligingsmechanisme van Android. Selecteer OK om door te gaan of ANNULEREN om terug te keren naar het vorige scherm.	Selectie van schermtoetsenbord voltooid  Nadat het schermtoetsenbord en de Android-pop-upvensters succesvol zijn geselecteerd, controleert het volgende scherm of het Koios Care-toetsenbord is ingeschakeld en toegankelijk is op uw telefoon. U kunt opnieuw op de schuifregelaar tikken om het Koios Care-toetsenbord uit en weer in te schakelen. Door op de pijl linksboven te tikken, keert u terug naar het scherm “Koios Care-toetsenbord activeren” om verder te gaan met de installatie.	Koios Care-toetsenbord ingeschakeld  Door terug te keren naar het scherm “Toetsenbord activeren” na het succesvol doorlopen van de selectiestappen, kunt u “Toetsenbord kiezen” selecteren om door te gaan met de installatie van het Koios Care-toetsenbord als invoermethode, of dit proces volledig overslaan.
---	---	--

Het Koios Care-toetsenbord instellen	Het Koios Care-toetsenbord instellen (vervolg)	Het Koios Care-toetsenbord instellen (vervolg)
--------------------------------------	--	--

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

 Vervolgens kunt u het configuratieproces van het Koios Care-toetsenbord starten door op de knop “Instellingen” rechtsonder te tikken. Op het scherm worden de talen weergegeven die in het Koios Care-toetsenbord zijn opgenomen (Frans, Nederlands en Grieks).	Op het volgende scherm kunt u verdergaan met het instellen van het toetsenbord door op “Toetsenbordinstellingen” te tikken, of op “Doorgaan” onderaan het scherm om verder te gaan met de standaardinstellingen.	Door “Toetsenbordinstellingen” te selecteren kunt u talen toevoegen of verwijderen en de sorteervolgorde wijzigen via de knop “Taal toevoegen”, het prullenbakpictogram of de pijltjes omhoog en omlaag. Aanvullende instellingen zoals (1) trillen bij toetsaanslag, (2) pop-up weergeven bij toetsaanslag, (3) toetsenbordranden weergeven, (4) klembordinhoud weergeven indien beschikbaar, en (5) de hoogte van het toetsenbord aanpassen, zijn instelbaar via het tandwielpictogram. Nadat u het toetsenbord hebt gepersonaliseerd, klikt u op de pijl linksboven om af te ronden.
---	---	--

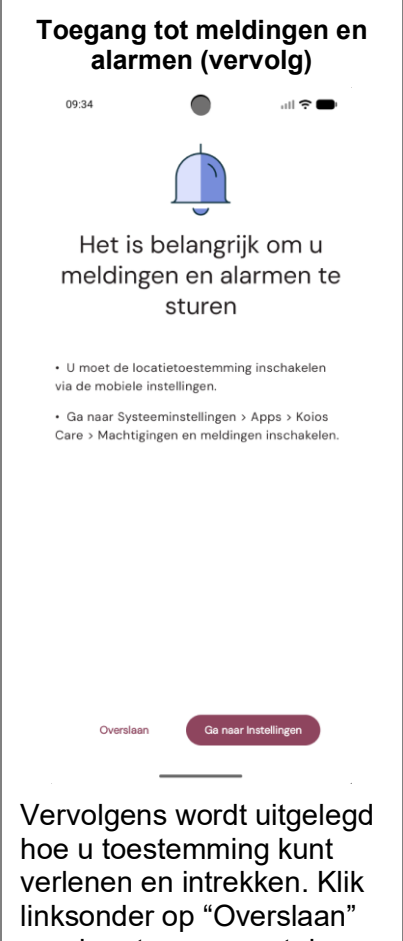
	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

Toegang tot de locatie instellen  Het is belangrijk dat wij toegang hebben tot uw locatie U moet de locatiemachtigingen inschakelen in de mobiele instellingen. • Wij zullen deze gegevens niet delen met derden • U kunt het op elk gewenst moment in- of uitschakelen Als we deze toestemming hebben, kunnen we nauwkeurigere resultaten verkrijgen. Ga naar instellingen Het volgende scherm start het proces om toegang te verlenen tot de locatie via de gps van de smartphone. U wordt geïnformeerd over hoe Koios Care de locatiegegevens gebruikt om ondersteunende digitale gezondheidsmaatregelen te berekenen. Na het lezen van de informatie kunt u verdergaan via de knop "Toegang verlenen" onderaan het scherm.	Toegang tot de locatie instellen (vervolg)  Het is belangrijk dat wij toegang hebben tot uw locatie • U moet de locatierechten inschakelen via de mobiele instellingen. • Go to System Settings > Apps > Koios Care > Machtigingen en schakel Locatie in. Over slaan Ga naar instellingen Vervolgens ziet u informatie over hoe de toegang van PARKIWATCH tot de locatiegegevens kan worden in- of uitgeschakeld via de systeeminstellingen op uw smartphone. Als u toegang wilt verlenen, klikt u rechtsonder op "Toestemming verlenen". Wilt u dit niet, klik dan linksonder op "Over slaan" om verder te gaan met de volgende stap. Locatiegegevens zijn niet nodig voor het berekenen van de gevalideerde kinematische metingen en worden uitsluitend gebruikt voor de berekening van de ondersteunende digitale gezondheidsmaatregelen.	Toegang tot de locatie instellen (vervolg)  Het is belangrijk dat wij toegang hebben tot uw locatie Parkiwatch verzamelt locatiegegevens om uw fysieke activiteit, slaap en gezondheid nauwkeurig te kunnen volgen, zelfs wanneer de app gesloten is of niet in gebruik is. Ga naar instellingen Het laatste scherm voor de locatietoegang toont de laatste informatie over hoe PARKIWATCH locatiegegevens op de achtergrond verzamelt (zonder dat de app actief door u wordt gebruikt). De knop "Toestemming verlenen" vraagt om een laatste bevestiging. Hiermee is de instelling voor locatietoegang voltooid.
--	---	---

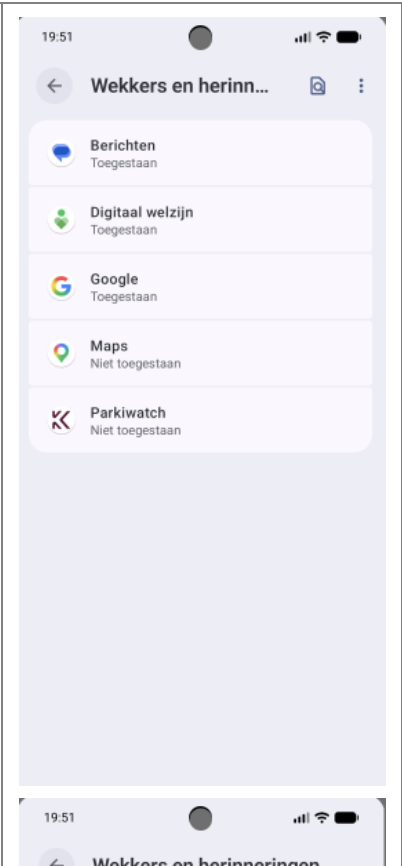
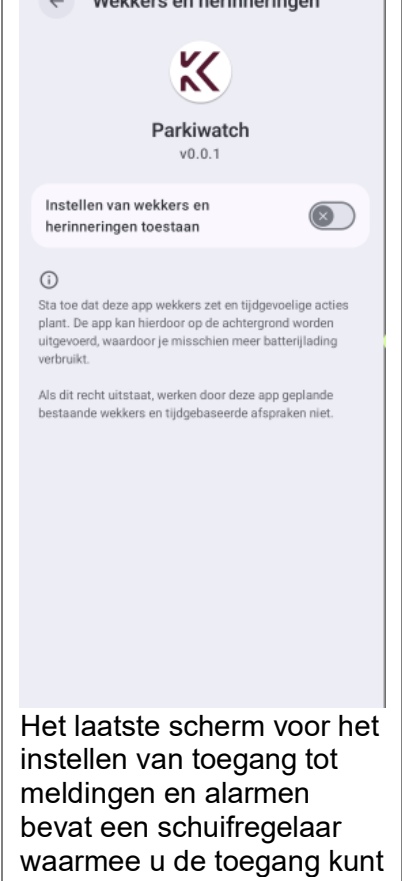
	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

Toegang tot gegevens over fysieke activiteit  Wij willen graag inzicht in uw lichamelijke activiteit Er wordt u gevraagd toestemming te geven voor toegang tot uw fysieke activiteit. • Wij zullen deze gegevens niet delen met derden • U kunt het op elk gewenst moment in- of uitschakelen Het zal ons helpen nauwkeurigere resultaten te produceren als we deze toestemming hebben. Ga naar Instellingen Vervolgens krijgt u informatie over de toegang van PARKIWATCH tot uw fysieke-activiteitsgegevens. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld en u kunt de toegang op elk gewenst moment uitschakelen. De toegang wordt uitsluitend gebruikt voor het verzamelen van ondersteunende digitale gezondheidsgegevens. Door op “Toestemming verlenen” te tikken, gaat u verder met het verleningsproces.	Toegang tot gegevens over fysieke activiteit (vervolg)  Het is belangrijk dat wij toegang hebben tot uw fysieke activiteit • U moet de toestemming voor fysieke activiteit inschakelen via de mobiele instellingen. • Ga naar Systeeminstellingen > Apps > Koios Care > Toestemmingen en fysieke activiteit inschakelen Overslaan Ga naar Instellingen Het volgende scherm biedt meer informatie. Na het selecteren van “Toestemming verlenen” stelt Android een laatste ja/nee-vraag. Wilt u geen toegang verlenen, klik dan op “Overslaan” linksonder. Wilt u dit wel, klik dan rechtsonder op “Toestemming verlenen”. Hiermee is dit proces afgerond.	Toegang tot telefoonstatusgegevens  Wij willen graag weten wat uw telefoonstatus is Er wordt u gevraagd toestemming te geven voor toegang tot uw telefoonstatus. • We verzamelen de timinginformatie over de gesprekken die u voert. We verzamelen de details of de inhoud van uw oproepen niet. • Wij zullen deze gegevens niet delen met derden • U kunt dit op elk gewenst moment in- of uitschakelen Het zal ons helpen nauwkeurigere resultaten te produceren als we deze toestemming hebben. Ga naar Instellingen Vervolgens krijgt u informatie over de toegang tot de telefoonstatus. Telefoonstatusgegevens betreffen het tijdstip van telefoongesprekken en op geen enkele manier de inhoud van de gesprekken. De toegang kan op elk moment na de installatie worden uitgeschakeld; de gegevens worden niet met derden gedeeld en uitsluitend gebruikt voor het verzamelen van ondersteunende digitale gezondheidsgegevens. Klik onderaan op “Toestemming verlenen” om verder te gaan.
---	---	---

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

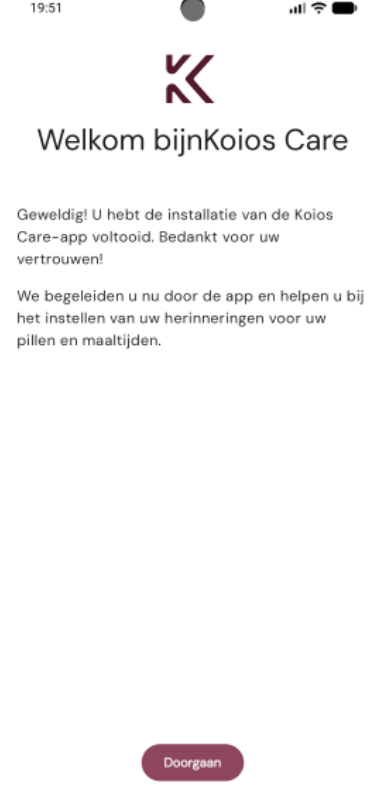
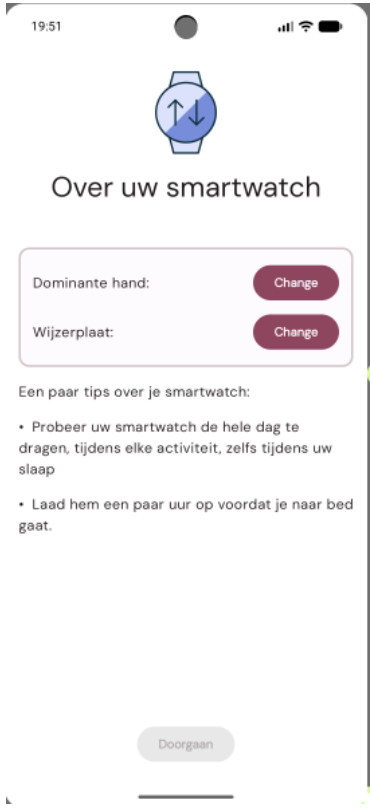
Toegang tot telefoonstatusgegevens (vervolg)  Het volgende scherm geeft meer informatie over het in- of uitschakelen van de toegang tot telefoonstatusgegevens. Selecteer “Overslaan” als u geen toegang wilt verlenen, of “Toestemming verlenen” als u dat wel wilt. Na het selecteren van “Toestemming verlenen” vraagt Android om een definitieve bevestiging (ja/nee).	Toegang tot meldingen en alarmen  Het volgende scherm geeft informatie over het verzenden van meldingen en het inschakelen van alarmen. Er worden geen gegevens met derden gedeeld en u kunt deze functies op elk moment uitschakelen. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het verzamelen van ondersteunende digitale gezondheidsgegevens en heeft geen invloed op het verzamelen van de gevalideerde kinematische gegevens.	Toegang tot meldingen en alarmen (vervolg)  Vervolgens wordt uitgelegd hoe u toestemming kunt verlenen en intrekken. Klik linksonder op “Overslaan” om door te gaan met de volgende stappen, of rechtsonder op “Toestemming verlenen” om het verleningsproces te starten.
Toegang tot meldingen en alarmen (vervolg)	Toegang tot meldingen en alarmen (vervolg)	Batterijoptimalisaties negeren

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

		
Het volgende scherm volgt de Android-procedure voor het inschakelen van toegang tot meldingen en alarmen. In het weergegeven menu ziet u de geïnstalleerde apps die om deze toestemming hebben gevraagd, samen met een indicatie of toegang is toegestaan. Door op de app te tikken, kunt u doorgaan met het verlenen of intrekken van de toestemming.	 Het laatste scherm voor het instellen van toegang tot meldingen en alarmen bevat een schuifregelaar waarmee u de toegang kunt	De volgende stap betreft het uitschakelen van de batterijoptimalisaties. Door deze toegang te verlenen kan PARKIWATCH optimaal op de achtergrond werken zonder beïnvloed te worden door de batterijoptimalisaties van Android. U kunt “Overslaan” selecteren om door te gaan naar de volgende stap, of “Toestemming verlenen” rechtsonder om verder te gaan met de stappen om batterijoptimalisaties uit te schakelen.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

	in- of uitschakelen. Het systeem informeert u ook over de impact op de batterijduur doordat de app op de achtergrond kan draaien. Voltooi het proces en ga verder met de volgende stappen.	
--	--	--

Batterijoptimalisaties negeren (vervolg)  Het volgende scherm toont een Android-melding die u informeert dat het uitschakelen van batterijoptimalisaties ervoor zorgt dat de app altijd op de achtergrond blijft draaien, wat de batterijduur kan verkorten. Dit kan via het instellingenmenu van de smartphone worden in- en uitgeschakeld. Bevestig de	Welkom bij Koios Care  Dit scherm bevestigt dat het deel van de installatie dat betrekking heeft op het aanmaken van een account, inloggen, akkoord gaan met de algemene voorwaarden en het verlenen van toestemmingen voor het verzamelen van ondersteunende digitale gezondheidsgegevens, succesvol is afgerond. Klik onderaan op "Doorgaan"	Over uw smartwatch 
---	---	---

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

keuze met “Weigeren” of “Toestaan”. Hiermee is deze stap voltooid.

om verder te gaan met de volgende stappen.

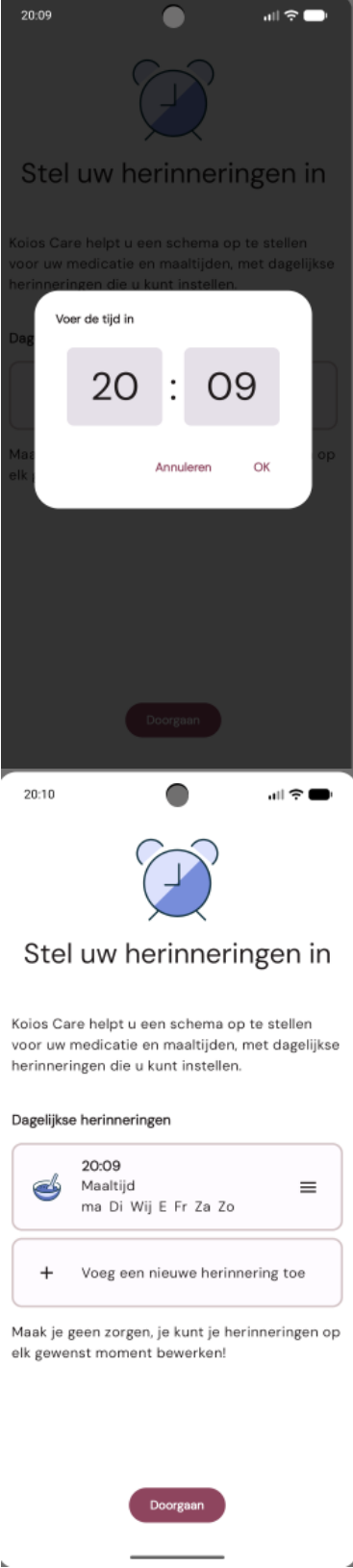


Vervolgens wordt gevraagd hoe u de smartwatch of polsbandsensor van een derde partij draagt. Voor de beste resultaten moet u de smartwatch dragen aan de hand waarmee u eet. Bovenaan het scherm geeft u aan welke uw dominante hand is (knop “Wijzigen”). De tweede optie betreft de pols waaraan u de smartwatch of sensor draagt; ook hier kunt u de keuze aanpassen. Tip: draag de smartwatch de hele dag, tijdens elke activiteit en tijdens het slapen, en laad het apparaat enkele uren op vóór het slapengaan.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

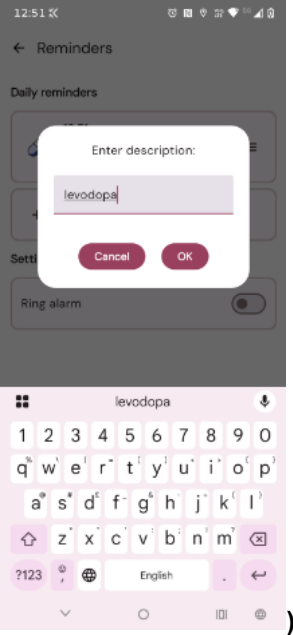
Mobiele meldingen 19:51  Mobiele meldingen Houd er rekening mee dat u vanuit de Koios Care app waardevolle herinneringen ontvangt over: • the pills & meals you are going to schedule • de vragenlijsten die u moet invullen Doorgaan Het volgende scherm laat zien hoe PARKIWATCH de notificatie-engine van Android gebruikt om u te herinneren aan de pillen en maaltijden die u inplant en aan de vragenlijsten die u moet invullen. Klik op “Doorgaan” om verder te gaan met het instellen van de herinneringen.	De herinneringen instellen 19:51  Stel uw herinneringen in Koios Care helpt u een schema op te stellen voor uw medicatie en maaltijden, met dagelijkse herinneringen die u kunt instellen. Dagelijkse herinneringen + Voeg een nieuwe herinnering toe Maak je geen zorgen, je kunt je herinneringen op elk gewenst moment bewerken! Doorgaan Op dit scherm kunt u herinneringen instellen. Bovenaan ziet u informatie dat het instellen van herinneringen u helpt om uw schema aan te houden. Onderaan kunt u nieuwe alarmen toevoegen; u kunt nieuwe alarmen toevoegen, wijzigen of verwijderen. Klik op “Doorgaan” om verder te gaan, of op “Een nieuwe herinnering toevoegen” om een herinnering in te stellen.	Het instellen van de herinneringen (vervolg) 20:09  Stel uw herinneringen in Koios Care helpt u een schema op te stellen voor uw medicatie en maaltijden, met dagelijkse herinneringen die u kunt instellen. Dagelijkse herinneringen + Voeg een nieuwe herinnering toe Mi Voeg Maaltijd herinnering toe nneringen op ell Voeg Pil herinnering toe Doorgaan
--	--	--

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

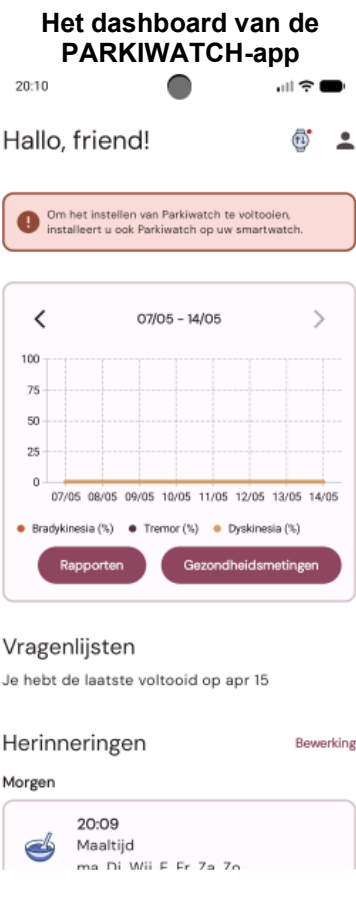
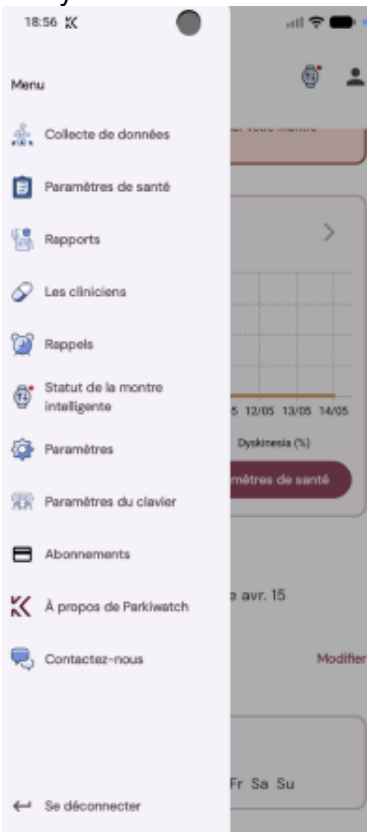
		 Door op “Een nieuwe herinnering toevoegen” te
--	--	---

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

		tikken, wordt u gevraagd wat voor herinnering dit moet zijn — bijvoorbeeld een maaltijd- of medicatieherinnering. Tik op een van beide om de specifieke herinnering in te stellen.
--	--	--

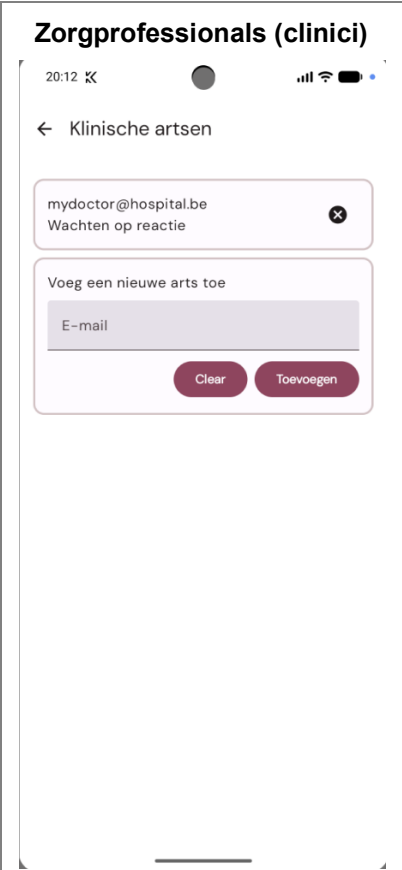
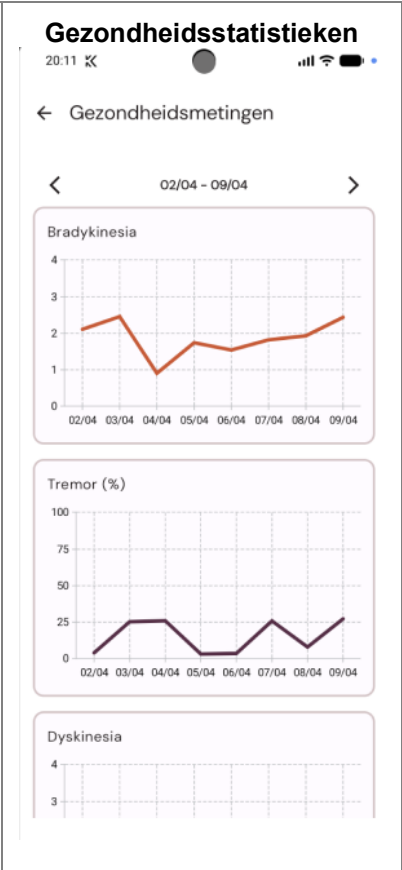
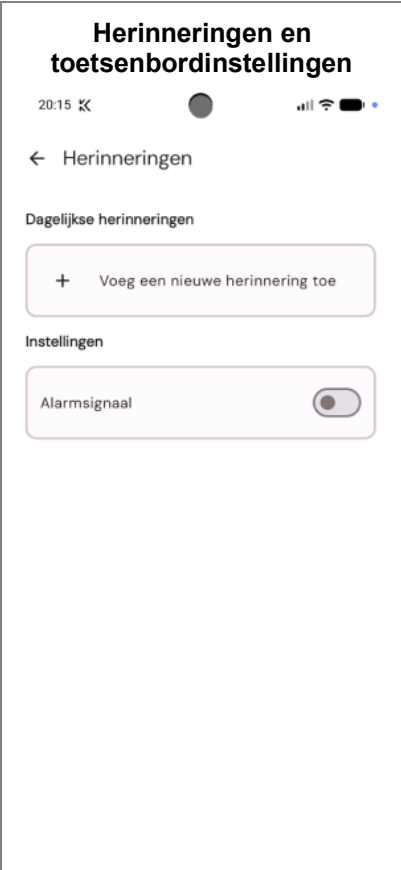
Het instellen van de herinneringen (vervolg)  Nadat u een herinnering voor een maaltijd of pil hebt geselecteerd, stelt u de herinneringstijd in. Bevestig met “OK” om het alarm op het opgegeven tijdstip te activeren, of annuleer met “Annuleren”.	Het instellen van de herinneringen (vervolg)  Na het selecteren van de tijd keert u terug naar het scherm met de dagelijkse herinneringen. Voor elke ingestelde herinnering ziet u de tijd, het type (maaltijd/pil) en de dagen van de week waarop de herinnering wordt geactiveerd. Het menu rechts van elke herinnering biedt extra opties zoals het bewerken van de tijd of beschrijving, een alarmsignaal, uitschakelen of verwijderen.	Gebruikersgegevens toevoegen Het laatste scherm vóór het PARKIWATCH-dashboard is het scherm met gebruikersinformatie. Selecteer uw geslacht, voer uw geboortjaar in en geef aan of u de diagnose Parkinson hebt gekregen door het selectievakje aan te vinken. Indien aangevinkt, vult u ook het jaar van de diagnose in. De knop “Volgende” is grijs weergegeven totdat alle informatie is ingevuld. Na het invullen verschijnt het PARKIWATCH-dashboard. Hiermee is de installatie voltooid.
--	--	---

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

Het dashboard van de PARKIWATCH-app  Na het voltooien van de installatie verschijnt het dashboard. De grafiek bovenaan toont het percentage tijd dat gedurende de dag aan bradykinesie, tremor en dyskinesie is besteed, voor de periode die in de grafiek wordt weergegeven. Met de knop “Rapporten” opent u het scherm dat toegang geeft tot de gegenereerde PDF-rapporten. Met de knop “Gezondheidsstatistieken” opent u de individuele gevalideerde kinematische metingen (bradykinesiescore, tremorpercentage, dyskinesiescore). Raadpleeg altijd uw zorgprofessional over de	Het menu aan de linkerkant Door vanaf de linkerkant van het scherm naar rechts te vegen opent u het menu aan de linkerkant. De menu-items geven u toegang tot verschillende schermen, beginnend met “Gegevensverzameling”. U krijgt toegang tot een item dat laat zien hoeveel vragenlijsten u hebt ingevuld, beantwoord en overgeslagen, en de hoeveelheid gegevens die u hebt verzameld en geüpload naar de PARKIWATCH-cloud voor verdere verwerking en analyse. 	Rapporten  Via het item “Rapporten” opent u de gegenereerde rapporten. U kunt ze als gelezen of ongelezen markeren, de lijst filteren (bijvoorbeeld alleen de ongelezen rapporten weergeven), vernieuwen en met het tandwielpictogram opties weergeven om “Alles als gelezen markeren” of een rapport aan te vragen. Met de knop “Rapport aanvragen” selecteert u de periode (van en tot) waarvoor het PDF-rapport moet worden gegenereerd.
---	--	--

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

interpretatie van de verschillende kinematische metingen.

		
Via het item “Zorgprofessionals” opent u een menu om uw zorgprofessional toe te voegen en contact te maken. Door verbinding te maken krijgt uw zorgprofessional toegang tot uw PDF-rapporten. U hoeft alleen het e-mailadres van uw zorgprofessional op te geven. Deze functie is uitsluitend ontworpen voor de gegevens van uw zorgprofessional; voeg dus geen persoonlijke contacten of onofficiële e-mailadressen toe. Typ het e-mailadres in het vak en tik op “Toevoegen”. Met		De knop “Herinneringen” brengt u naar het eerder beschreven scherm voor het instellen van herinneringen. De knop “Toetsenbordinstellingen” brengt u naar het eerder beschreven configuratiescherm van het Koios Care-toetsenbord.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

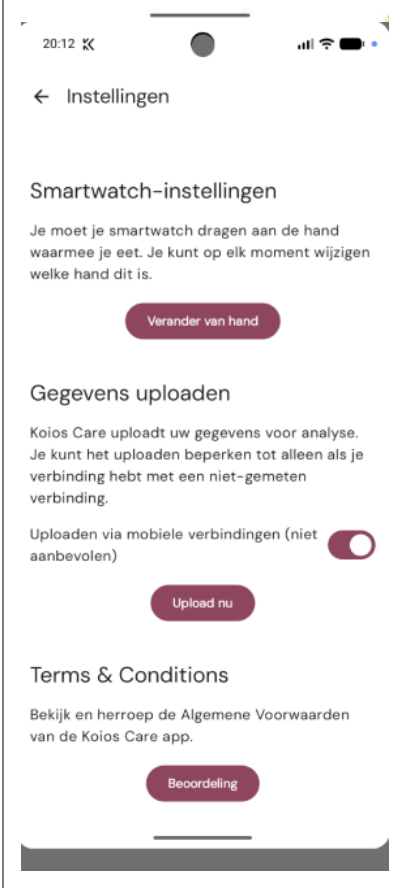
“Wissen” verwijdert u de tekst uit het vak.



Met de knop “Gezondheidsstatistieken” opent u een scherm met de individuele gevalideerde kinematische metingen in elke figuur, samen met de periode waarover deze zijn verzameld. Raadpleeg altijd uw zorgprofessional voor de interpretatie van de resultaten. Aanvullende informatie over deze figuren vindt u in de toelichting op het PDF-rapport in de bijlagen.

Neem contact met ons op	Over PARKIWATCH	Instellingen
-------------------------	-----------------	--------------

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

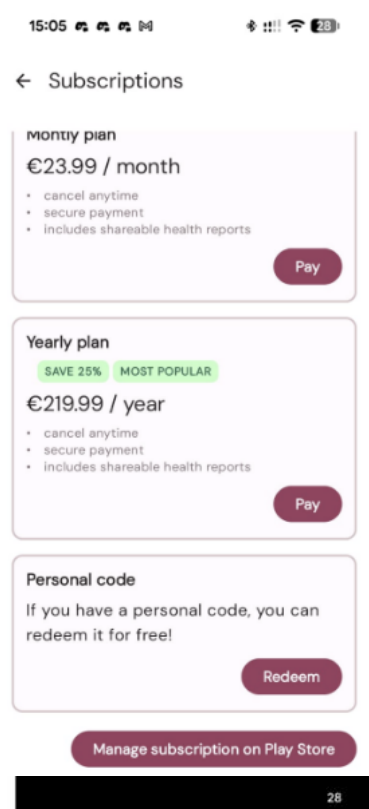
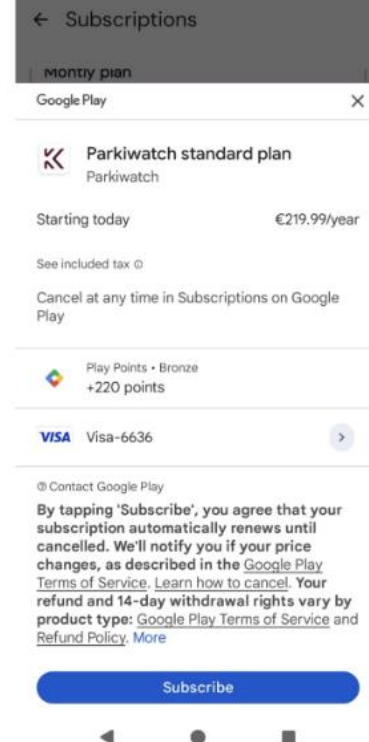
		
Met de knop “Neem contact met ons op” opent u een scherm met informatie over hoe u contact kunt opnemen met Koios Care.	Het menu-item „Over PARKIWATCH” geeft toegang tot informatie over PARKIWATCH en Koios Care. Het bevat ook een link naar de elektronische gebruiksaanwijzing op www.koios.care/ifu-patients. Na het volgen van de link wordt de gebruiksaanwijzing als PDF aangeboden: u kunt deze rechtstreeks in uw browser lezen indien ondersteund, of het PDF-bestand openen en downloaden. De gebruiksaanwijzing is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.	

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

		Via het item “Instellingen” opent u een menu waarmee u verschillende instellingen kunt aanpassen: een overzicht van de (al dan niet) verleende machtigingen, toegang tot het scherm met toetsenbordopties, toegang tot het scherm met de pols (rechts/links) waarop u de smartwatch of het polsbandapparaat van een derde partij draagt, een menu voor gegevensupload waarmee u uploads via beperkte verbindingen kunt in- of uitschakelen, een knop “Nu uploaden”, het menu met de algemene voorwaarden, en de knop “Abonnementen” voor de verschillende abonnementsopties (maandelijks, jaarlijks). Er is ook een extra vak voor een persoonlijke inwisselbare code waarmee u zonder abonnement toegang krijgt tot de PARKIWATCH-functies.
--	--	---

Status van de smartwatch	Abonnementen	Klaar om te beginnen
---------------------------------	---------------------	-----------------------------

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

 20:12 ← Smartwatch-status Smartwatch niet gesynchroniseerd • Zorg ervoor dat uw Bluetooth is ingeschakeld • Zorg ervoor dat de batterij van uw smartwatch is opgeladen Uw smartwatch is niet gesynchroniseerd Probeer opnieuw te synchroniseren	 15:05 ← Subscriptions Monthly plan €23.99 / month • cancel anytime • secure payment • includes shareable health reports Pay Yearly plan SAVE 25% MOST POPULAR €219.99 / year • cancel anytime • secure payment • includes shareable health reports Pay Personal code If you have a personal code, you can redeem it for free! Redeem Manage subscription on Play Store	 20:12 ← Neem contact met ons op Als u aanvullende informatie nodig heeft of als u problemen of opmerkingen tegenkomt, neem dan contact met ons op via info@koios.care. Een lid van ons team zal zo snel mogelijk contact met u opnemen. Vermeld het e-mailadres waarmee u zich heeft aangemeld, zodat we u effectiever kunnen helpen.
Via het menu-item “Smartwatch” krijgt u informatie over de verbinding tussen uw smartwatch of polsbandsensor van een derde partij en de PARKIWATCH Android-app. Als er geen synchronisatie is, verschijnt een rood kruisje; anders geeft een groen vinkje aan dat de verbinding correct is.	 28 ← Subscriptions Monthly plan Google Play Parkiwatch standard plan Parkiwatch Starting today €219.99/year See included tax ⓘ Cancel at any time in Subscriptions on Google Play Play Points • Bronze +220 points VISA Visa-6636 By tapping 'Subscribe', you agree that your subscription automatically renews until cancelled. We'll notify you if your price changes, as described in the Google Play Terms of Service. Learn how to cancel. Your refund and 14-day withdrawal rights vary by product type: Google Play Terms of Service and Refund Policy. More Subscribe Met de knop “Abonnementen” opent u de pagina waar u uw PARKIWATCH-	Wanneer alle stappen zijn doorlopen, is uw PARKIWATCH klaar voor gebruik. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met Koios Care via support@koios.care of via de link “Contact” in het menu aan de linkerkant van de app.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

	abonnement kunt afsluiten door het maandelijkse of jaarlijkse tarief te selecteren. Met de knop “Abonnementen beheren” opent u het scherm waar u uw actieve abonnement kunt beheren (inclusief annuleren). Door op de knop “Betalen” te tikken, wordt u doorgestuurd naar een door Google ondersteunde pagina voor een veilige betaling.	
--	---	--

2.2 Voorbeeld van de configuratie voor het verbinden van de PARKIWATCH Android-smartphone-app met een WearOS-smartwatch van een derde partij

Dit voorbeeld illustreert het verbindingsproces van de PARKIWATCH Android-app met een smartwatch van een derde partij — in dit geval een Google Pixel Watch 4.

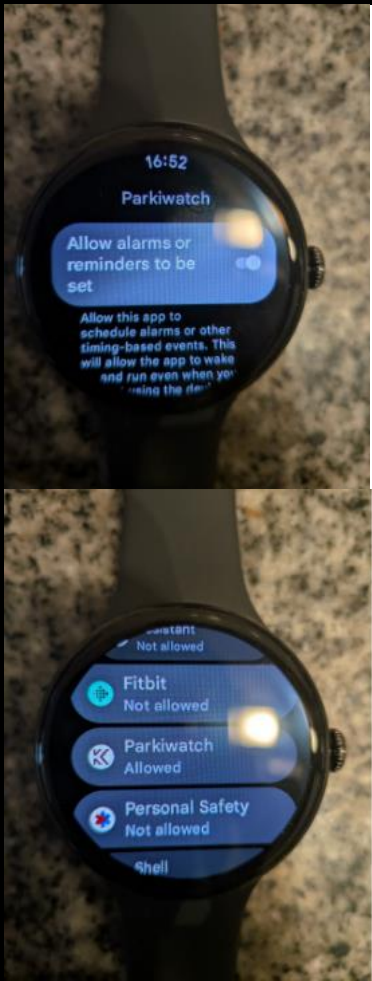
Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor instructies over het gebruik van uw smartwatch of polsbandsensor van een derde partij.

Het installatieproces starten	Aanmelden	Toestemmingen verlenen — alarmen en herinneringen
 De eerste stap is de smartwatch van een derde partij koppelen door de instructies van de fabrikant te volgen (zie ook Bijlage 1 voor een voorbeeld). Door de lijst met geïnstalleerde apps te openen (meestal door op de fysieke knop	 Het eerste scherm geeft aan dat u zich eerst moet aanmelden bij de PARKIWATCH-smartphone-app. Na deze stap wordt u automatisch doorverwezen naar het volgende scherm om het proces te starten waarbij	 Er verschijnt een reeks schermen. Het eerste scherm toont de alarmen en herinneringen. Net als bij de installatie van de smartphone-app ziet u een lijst van apps die toegang vragen tot alarmen en

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

van de smartwatch te drukken), zou u de PARKIWATCH-app tussen de andere apps moeten vinden. Het installatieproces begint door op het PARKIWATCH-pictogram te tikken.	PARKIWATCH toestemmingen krijgt.	herinneringen. Scrol door de lijst om de PARKIWATCH-app te zoeken.
--	----------------------------------	--





	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

Toestemmingen verlenen — alarmen en herinneringen (vervolg) Nadat u de PARKIWATCH-app hebt gevonden, tikt u erop om naar het volgende scherm te gaan waar u de toegang tot alarmen en herinneringen met een schakelaar kunt in- of uitschakelen. Nadat u de machtigingen hebt verleend, veegt u op het scherm van de smartwatch naar rechts om terug te keren naar de lijst van apps. PARKIWATCH zou nu de status “Toegestaan” moeten tonen voor alarmen en herinneringen.	Toestemmingen verlenen — fysieke activiteit, meldingen en vitale functies Er verschijnt automatisch een reeks schermen waarin om drie toestemmingen wordt gevraagd: (1) fysieke activiteit, uitsluitend voor de berekening van ondersteunende digitale gezondheidsmaatregelen; (2) meldingen, voor het tonen van maaltijd- en medicatieherinneringen indien ingesteld; en (3) vitale functies (PPG-sensor), uitsluitend voor de berekening van ondersteunende digitale gezondheidsmaatregelen. Klik telkens op “Toestaan” om de toestemming te verlenen.	Hoofdscherm en menu Indien gewenst kunt u het menu met machtigingen aan de rechterkant openen. In dit menu hebt u toegang tot opties zoals “Geforceerd stoppen”, “Machtigingen”, “Geavanceerd”, “App-info” en de optie om de app te verwijderen. Via het menu met machtigingen kunt u de machtigingen voor alarmen en herinneringen, fysieke activiteit, meldingen en vitale functies wijzigen. “Geforceerd stoppen” beëindigt onmiddellijk de uitvoering van de app; deze moet dan opnieuw worden geladen om weer op de achtergrond te kunnen werken (door de lijst van apps te openen en op het PARKIWATCH-pictogram te tikken).
---	---	---

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

Sectie 3: Algemene systeem- en regelgevingsinformatie

3.1 Apparaatbeschrijving

PARKIWATCH is Software as a Medical Device (SaMD), bedoeld voor de continue, passieve detectie en kwantitatieve beoordeling van kinematische patronen die representatief zijn voor (i) tremor, gedefinieerd als oscillerende bewegingen; (ii) bradykinesie, gedefinieerd als vermindering van de bewegingssnelheid en -amplitude tijdens vrijwillige activiteit van de bovenste ledematen; en (iii) dyskinesie, gedefinieerd als onregelmatige, niet-ritmische hyperkinetische bewegingen die overeenkomen met door levodopa veroorzaakte onvrijwillige bewegingen, bij volwassenen met de ziekte van Parkinson.

Vereiste apparatuur: Voor PARKIWATCH moet u een smartwatch of polsbandsensor van een derde partij dragen die ruwe bewegingsgegevens verzamelt (accelerometrie). U hebt een eigen Android-smartphone nodig om de PARKIWATCH-app te installeren en te gebruiken.

Compatibiliteit: PARKIWATCH is compatibel met smartwatches of polsbandsensoren van derden die beschikken over een inertiaële meeteenheid (IMU) waarmee ruwe accelerometergegevens worden geleverd.

Modules: PARKIWATCH Android-smartphone-app, dashboard voor zorgprofessionals, cloud-infrastructuursysteem voor gegevensopslag en -verwerking, en de smartwatch of polsbandsensor van een derde partij.

PARKIWATCH verwerkt triaxiale accelerometergegevens die door smartwatches of polsbandapparaten van derden worden verzameld. PARKIWATCH past gevalideerde signaalverwerkings- en statistische leeralgoritmen toe om continue, longitudinale output te genereren: gevalideerde kinematische metingen. Deze worden via een webgebaseerd dashboard en PDF-rapporten beschikbaar gesteld aan zorgprofessionals. De gevalideerde kinematische metingen worden berekend in combinatie met andere ondersteunende digitale gezondheidsgegevens.

PARKIWATCH analyseert gegevens die tijdens uw dagelijkse activiteiten worden verzameld door uw smartwatch van een derde partij, uw polsbandsensor of uw smartphone.

PARKIWATCH is NIET bedoeld om de ziekte van Parkinson te diagnosticeren, om zelfstandig specifieke medicamenteuze therapie aan te bevelen of aan te passen, of om realtime klinische waarschuwingen te geven. De resultaten zijn aanvullend op, en moeten worden geïnterpreteerd in de context van, de standaard klinische beoordeling en het oordeel van de behandelend zorgprofessional.

Gevalideerde kinematische metingen

- De automatische detectie en kwantificering van oscillerende kinematische patronen die representatief zijn voor tremor;
- De automatische detectie en kwantificering van verminderingen in bewegingssnelheid en -amplitude die kenmerkend zijn voor bradykinesie;
- De automatische detectie en kwantificering van onregelmatige, niet-ritmische hyperkinetische bewegingen die kenmerkend zijn voor dyskinesie.

Deze metingen worden gepresenteerd naast ondersteunende digitale gezondheidsgegevens om een contextueel beeld te geven van het kinematische profiel van de patiënt.

Ondersteunende digitale gezondheidsmaatregelen

- Automatische analyse van ritme en timing tijdens interacties met het smartphonetoetsenbord om inzicht te geven in uw typevaardigheid met het digitale toetsenbord van uw smartphone.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

- Automatische meting van polsbewegingspatronen om de duur van de bord-tot-mondbewegingen tijdens de maaltijd te schatten.
- Automatische registratie van nachtelijke bewegingen en hartslag om de slaapduur, de frequentie van wakker worden en de kwaliteit van de rust te meten.
- Automatische kwantificering van het aantal stappen en sociale patronen, inclusief de buitenshuis bestede tijd, om een beeld te geven van uw activiteitsniveau.
- Het registreren en visualiseren van de antwoorden op vragenlijsten.

Deze informatie wordt samengevoegd in rapporten ter aanvulling op de klinische beoordeling door uw zorgprofessional buiten de klinische setting, tussen de consulten door.

BELANGRIJK: PARKIWATCH is uitsluitend een monitoringstool. Het apparaat stelt geen diagnose van de ziekte van Parkinson, geeft geen medisch advies en doet geen aanbevelingen voor wijzigingen in de behandeling. Het apparaat is ontworpen ter ondersteuning van, en niet ter vervanging van, het professionele oordeel van uw zorgprofessional en dient niet als noodhulpsysteem.

3.2 Technische specificaties

Besturingssysteem	Android 9.0 (SDK 28) of hoger.
Connectiviteit	Bluetooth 5.0 (of hoger) en een actieve internetverbinding (wifi of mobiel internet).
App-store	Toegang tot de Google Play Store is vereist voor installatie en verplichte updates.

Vereiste apparatuur: De gebruiker heeft een eigen Android-smartphone nodig om de PARKIWATCH-app te installeren en te gebruiken. Voor PARKIWATCH moet u een smartwatch of polsbandsensor van een derde partij dragen die ruwe bewegingsgegevens verzamelt (accelerometer); PARKIWATCH is compatibel met smartwatches of polsbandsensoren van derden die beschikken over een inertiaële meeteenheid (IMU) waarmee ruwe accelerometergegevens worden geleverd.

3.3 Cyberbeveiliging en gegevensprivacy

Het Koios Care-platform is ontworpen om te voldoen aan de HIPAA- en AVG-regelgeving.

Versleuteling	Alle gegevens worden beschermd met AES-256-encryptie, zowel in rust als tijdens verzending (HTTPS/TLS).
Authenticatie	Meervoudige authenticatie en op rollen gebaseerde toegangscontrole worden voor alle gebruikers afgedwongen.
Gegevensopslag	De gegevens worden opgeslagen in een veilige, hiërarchische structuur op AWS-cloudservices.

3.4 Woordenlijst met symbolen

De volgende symbolen geven aan hoe waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, instructies en opmerkingen in dit document worden weergegeven. De tekst legt het bedoelde gebruik ervan uit.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0



GEVAAR/WAARSCHUWING/VOORZICHTIG De handleiding moet worden geraadpleegd in alle gevallen waarin dit symbool is aangebracht, om de aard van de potentiële gevaren en de te nemen maatregelen om deze te vermijden te achterhalen (ISO 7010, W001).

GEVAAR: Een gevaaraanduiding wijst op een gevaarlijke situatie van direct, onmiddellijk gevaar voor mogelijk ernstig letsel voor een gebruiker, technicus, patiënt of enige andere persoon.

WAARSCHUWING: Een waarschuwingsaanduiding wijst op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot mogelijk ernstig letsel voor een gebruiker, technicus, patiënt of enige andere persoon.

VOORZICHTIG: Een voorzichtigheidsaanduiding wijst op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot mogelijk licht letsel voor een gebruiker, technicus, patiënt of enige andere persoon.

PRODUCTETIKETTERING

INFO-VENSTER ("ABOUT BOX")

In deze sectie worden de etiketten beschreven die van toepassing zijn op het volledige systeem en product.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0



PARKIWATCH

Koios Care, Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerp, Belgium

Version 1.0.0

Copyright © 2025 KOIOS CARE. All rights reserved.



www.koios.care



2797



(01) 05419980609106 (11) 260527 (8012) 1.0.0.



2026-05-27

Beoogd gebruik: PARKIWATCH is een Software as a Medical Device (SaMD) bestemd voor de continue, passieve detectie en kwantitatieve beoordeling van kinematische patronen die representatief zijn voor tremor, bradykinesie en dyskinesie bij volwassenen met de ziekte van Parkinson. Het verwerkt triaxiale accelerometergegevens die worden verzameld door smartwatches of polsge dragen apparaten van derden, en de resultaten worden via een webgebaseerd dashboard en pdf-rapporten ter beschikking gesteld aan zorgverleners. PARKIWATCH is NIET bestemd om de ziekte van Parkinson te diagnosticeren, of om zelfstandig specifieke farmacologische behandeling aan te bevelen of te wijzigen. De resultaten zijn aanvullend op, en moeten worden geïnterpreteerd binnen de context van, de standaard klinische beoordeling en het oordeel van de behandelende zorgverlener.



RAADPLEEG DE GEBRUIKSAANWIJZING Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen (ISO 7000, 1051; ISO 15223-1, 5.4.3).



CE-CONFORMITEITSMARKERING Geeft aan dat het hulpmiddel voldoet aan EU-Verordening (EU) 2017/745 voor medische hulpmiddelen.



MEDISCH HULPMIDDEL Geeft aan dat het product een medisch hulpmiddel is dat bedoeld is om te worden gebruikt als medisch hulpmiddel of als toebehoren daarvan (ISO 15223-1, 5.7.7).

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0



UNIEKE HULPMIDDELIDENTIFICATIE Geeft een drager aan die informatie over de unieke hulpmiddelidentificatie bevat (ISO 15223-1, 5.7.10).



FABRIKANT Geeft de fabrikant van het medisch hulpmiddel aan (ISO 15223-1, 5.1.1).



OP VOORSCHRIFT Geeft aan dat het hulpmiddel uitsluitend mag worden gebruikt door, of op voorschrift van, een bevoegde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Dit symbool is niet opgenomen in EN ISO 15223-1.



FABRICAGEDATUM Geeft de datum aan waarop het medische hulpmiddel is vervaardigd (ISO 15223-1, 5.1.3).

3.5 Contactgegevens

Fabrikant	Koios Care (BV)
Adres	Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen, België
Technische ondersteuning	support@koios.care
Website	www.koios.care

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

Een papieren versie van deze gebruiksaanwijzing aanvragen

Deze gebruiksaanwijzing wordt elektronisch geleverd. U kunt op elk moment kosteloos een gedrukte versie aanvragen, zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Neem hiervoor contact op met Koios Care via support@koios.care en vermeld uw naam en postadres. U ontvangt uw papieren versie binnen 7 kalenderdagen na uw aanvraag. De actuele versie is ook steeds beschikbaar op www.koios.care.

Waarschuwingen



WAARSCHUWING — Alleen gevalideerde hardware: Gebruik uitsluitend gevalideerde hardwareconfiguraties zoals vermeld in de documentatie. Gebruik op niet-ondersteunde hardware kan leiden tot compatibiliteitsproblemen of onbetrouwbare prestaties.

WAARSCHUWING — Verwerking van persoonlijke gezondheidsgegevens: Dit apparaat verwerkt persoonlijke gezondheidsgegevens. Of de gegevens nu lokaal of via een cloudservice worden gebruikt, data zoals studiemetadata en patiëntidentificaties kunnen voor workflowdoeleinden worden verwerkt. Waar nodig wordt pseudonimisering toegepast.

WAARSCHUWING — Deïnstallatie en gegevensverwijdering: Om ervoor te zorgen dat patiëntgerelateerde gegevens volledig worden verwijderd, volgt u de gedetailleerde stappen voor deïnstallatie. Deze stappen zijn ontworpen om alle bijbehorende informatie tijdens het deïnstallatieproces veilig uit het systeem te verwijderen.

WAARSCHUWING — Software-updates: Software-updates zijn noodzakelijk voor de correcte werking van het apparaat. Controleer na elke update of het apparaat correct functioneert. Mislukt de installatie, verwijder dan de app en installeer deze opnieuw. Bij aanhoudende problemen neemt u contact op met de technische ondersteuning.

WAARSCHUWING — Interpretatie van AI-resultaten: Door AI gegenereerde resultaten moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Gebruikers dienen te begrijpen dat deze resultaten beperkingen kennen en mogelijk vals-positieve of vals-negatieve resultaten bevatten. Houd altijd rekening met de volledige klinische context bij het nemen van beslissingen op basis van AI-analyse.

WAARSCHUWING — Niet bedoelde gebruikers: PARKIWATCH is niet bedoeld voor personen met ernstige cognitieve beperkingen die het veilig en consistent bedienen van een smartphone belemmeren. Het apparaat mag niet worden gebruikt door patiënten zonder een formele diagnose van de ziekte van Parkinson door een gekwalificeerde arts. Het is ook niet geschikt voor gebruikers met fysieke aandoeningen of huidgevoeligheid die het continu dragen van een smartwatch of polsbandsensor van een derde partij

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

volgens de instructies belemmeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de fabrikant voor informatie over materialen en reiniging.

WAARSCHUWING — Beveiliging: Omdat PARKIWATCH gevoelige informatie verwerkt, moet u de volgende beveiligingsmaatregelen volgen. Bescherm uw smartphone altijd met een veilige toegangscode, pincode of vingerafdruk via het menu “Beveiliging en privacy” in de instellingen. Deel uw inloggegevens met niemand; Koios Care zal u nooit om uw wachtwoord vragen. Synchroniseer uw gegevens alleen via een vertrouwd, privé wifi- of mobiel netwerk. Vermijd openbare, onversleutelde wifi-hotspots (zoals in cafés of op luchthavens). In geval van een cyberaanval, koppelt u PARKIWATCH los van het netwerk en neemt u onmiddellijk contact op met KOIOS CARE via support@koios.care.

WAARSCHUWING — Compatibele apparatuur en batterij: Zorg ervoor dat uw smartphone en de smartwatch of polsbandsensor van een derde partij compatibel zijn. Laad ze dagelijks op en houd het batterijniveau boven 20%.

WAARSCHUWING — Activiteiten die de detectie kunnen verstoren: Bepaalde activiteiten (zoals het gebruik van elektrisch gereedschap, fietsen op een hobbelige weg of het bespelen van een muziekinstrument) kunnen door PARKIWATCH ten onrechte worden geïdentificeerd als bewegingspatronen die verband houden met de ziekte van Parkinson. Ook wanneer u de smartwatch of polsbandsensor van een derde partij niet draagt, of als de batterij leeg is, kan het systeem geen gegevens verzamelen. Ontbrekende gegevens in uw rapporten worden meestal veroorzaakt doordat de smartwatch of polsbandsensor niet correct wordt gedragen of niet is opgeladen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de fabrikant voor instructies over het correct opladen en dragen van het apparaat.

WAARSCHUWING — Reiniging en huidirritatie: Houd de sensoren aan de achterkant van de smartwatch of polsbandsensor van een derde partij schoon en vrij van vuil (zoals lotion of zweet) met een zachte, pluisvrije doek. Raadpleeg de handleiding van de fabrikant voor specifieke reinigingsinstructies om huidirritatie te voorkomen.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

Regelgeving en naleving

Het systeem voldoet aan de volgende specifieke wetgeving en normen.

Algemeen (internationale normen)

- EN ISO 13485:2016/A11:2021 — Medische hulpmiddelen — Kwaliteitsmanagementsystemen — Vereisten voor regelgevingsdoeleinden.
- EN ISO 14971:2019/A11:2021 — Medische hulpmiddelen — Toepassing van risicomanagement op medische hulpmiddelen.
- EN 62304:2006/A1:2015 — Software voor medische apparaten — Softwarelevenscyclusprocessen.
- EN 62366-1:2015/A1:2020 — Medische hulpmiddelen — Deel 1: Toepassing van gebruiksvriendelijkheidstechniek op medische hulpmiddelen.
- EN ISO 15223-1:2021/A1:2025 — Medische hulpmiddelen — Symbolen die gebruikt moeten worden met informatie die door de fabrikant wordt geleverd — Deel 1: Algemene vereisten.
- EN 82304-1:2017 — Gezondheidssoftware — Deel 1: Algemene eisen voor productveiligheid.
- EN IEC 81001-5-1:2022 — Veiligheid, effectiviteit en beveiliging van gezondheidssoftware en IT-systemen in de gezondheidszorg — Deel 5-1: Beveiliging — Activiteiten in de productlevenscyclus.

Wetgeving van de Europese Unie

- Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen (MDR).
- Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming — AVG).
- Verordening (EU) 2024/1689 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 tot vaststelling van geharmoniseerde regels inzake kunstmatige intelligentie (Verordening artificiële intelligentie).

Het product is ontworpen in overeenstemming met de EU-richtlijnen voor medische hulpmiddelen.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

Bijlage 1 — Voorbeeld van het koppelen van een WearOS-smartwatch

Het volgende voorbeeld laat zien hoe een WearOS-smartwatch van een derde partij in eerste instantie gekoppeld kan worden aan uw Android-smartphone. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de richtlijnen van de fabrikant van de smartwatch. De onderstaande beschrijvingen volgen een voorbeeld met een compatibel MOBVOI Ticwatch E3-apparaat.

Stap 1	Schakel de smartwatch in door de rechterbovenknop ingedrukt te houden.
Stap 2	Wanneer u het beginscherm ziet, drukt u op de (i)-knop onderaan.
Stap 3	Selecteer de gewenste taal. U kunt naar beneden scrollen voor meer opties.
Stap 4	Het volgende scherm toont de servicevoorwaarden (ToS) van Mobvoi (de fabrikant van de smartwatch). Scrol helemaal naar beneden en selecteer "Ik heb het gelezen".
Stap 5	Kies in de begeleidende app de smartwatch (bijv. "TicWatch E3") en bevestig de Bluetooth-koppelcode op beide apparaten.
Stap 6	Wacht tot de telefoon de horlogegegevens heeft opgehaald.
Stap 7	Meld u aan bij uw Google-account op het horloge om Google-apps te gebruiken, nieuwe apps te downloaden en "Mijn apparaat zoeken" te activeren.
Stap 8	Verbind uw Google-account met uw horloge en wacht tot het aanmelden is voltooid.
Stap 9	Stel een schermvergrendeling in voor uw horloge (patroon of pincode), of sla deze stap over.
Stap 10	Selecteer de apps die u op uw horloge wilt installeren of sla deze stap over om verder te gaan.
Stap 11	Wacht tot het installatieproces is voltooid. Het horloge is klaar voor gebruik.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0



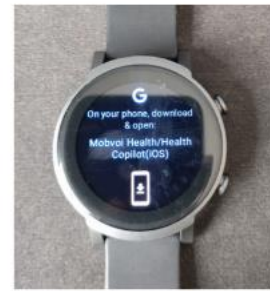
Start by powering-on the smartwatch by long-pressing the top right button.



When you see the above screen press the (i) button at the bottom.

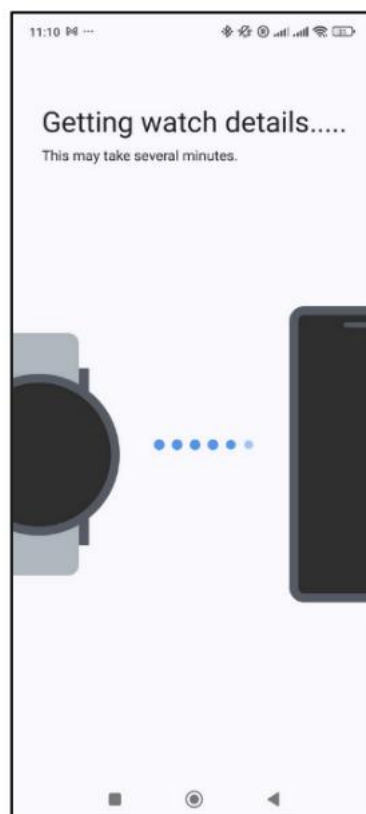
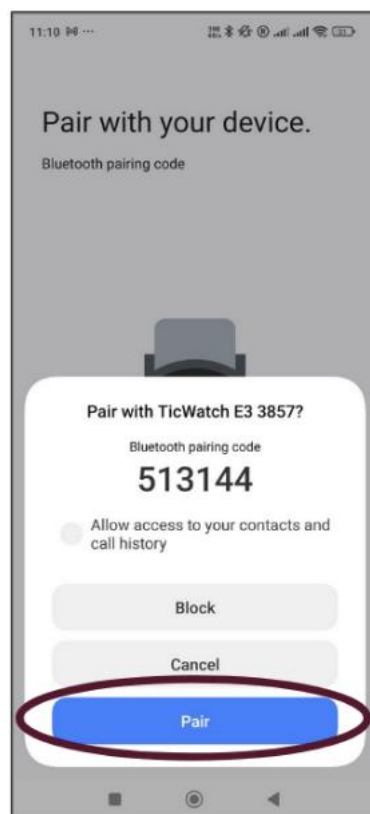
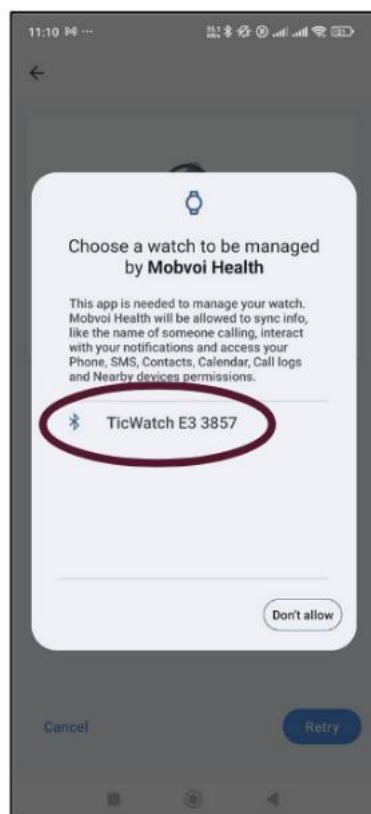
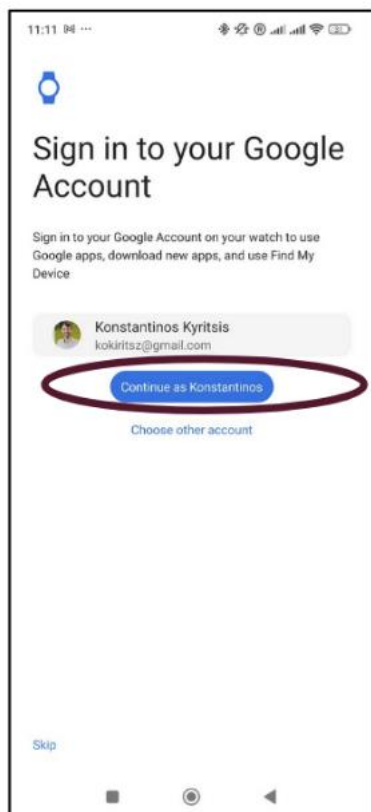


Select the language of interest. You can scroll below for more options.

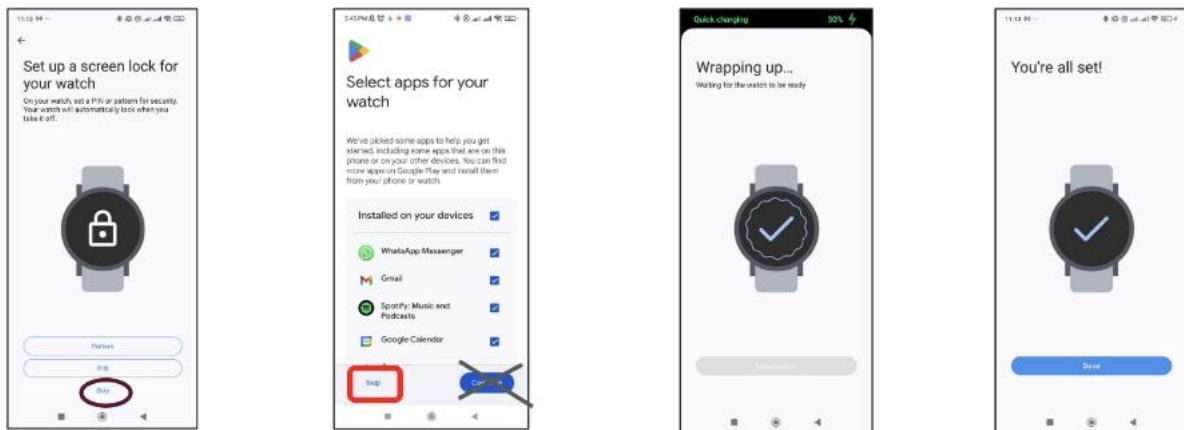


The next screen is the Terms of Service (ToS) by Mobvoi (the manufacturer of the watch). Scroll all the way to the bottom and select "I've read it".

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0



	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

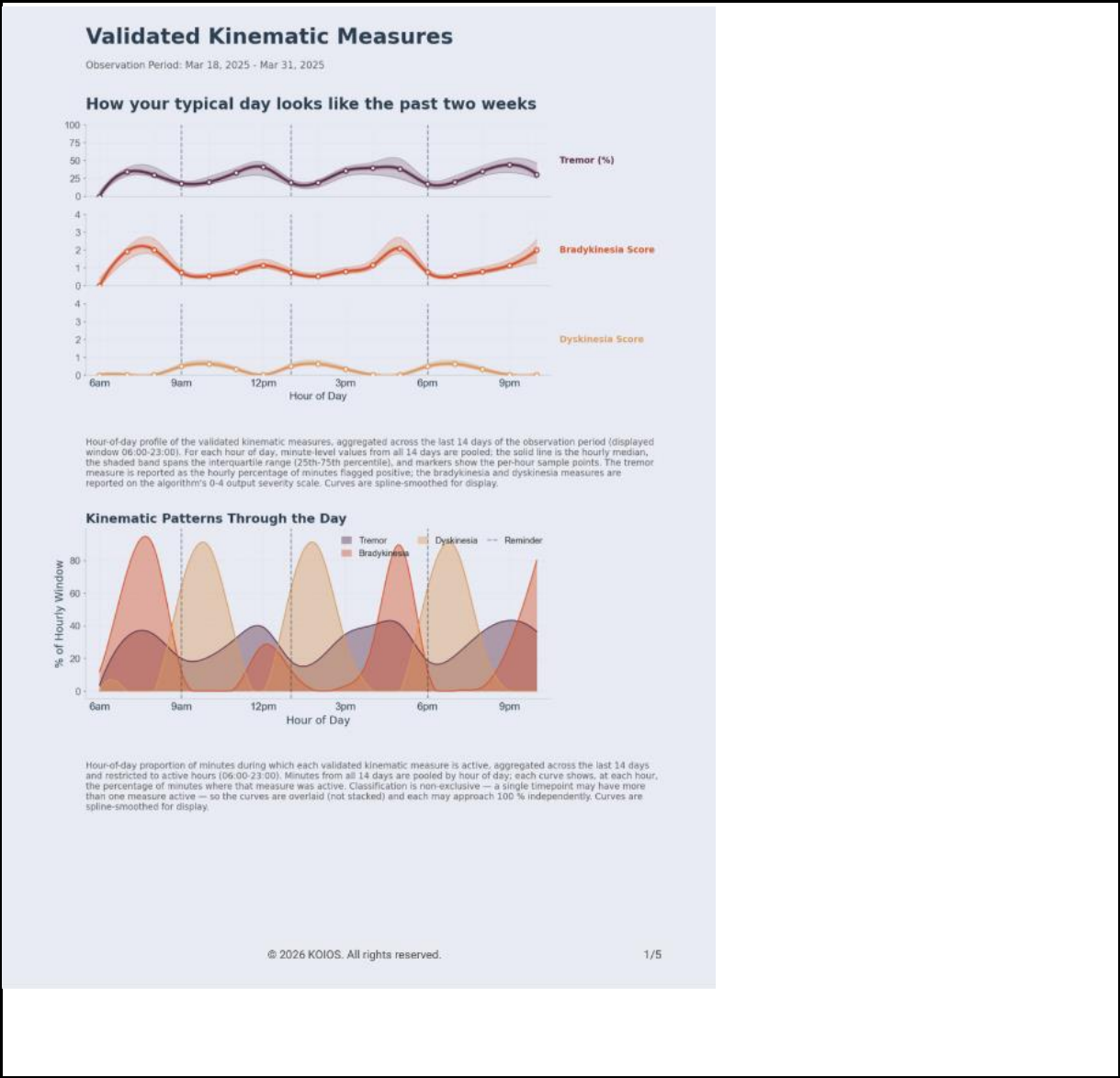


Bijlage 2 — Inhoud van het PDF-rapport

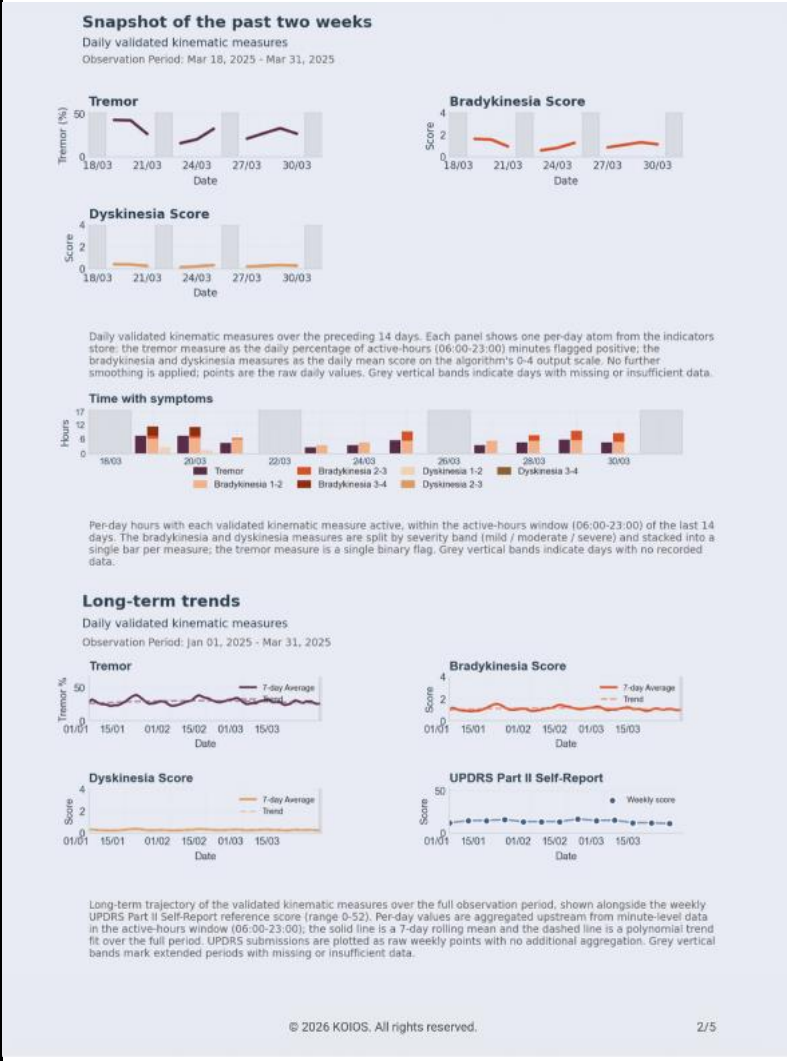
Dit deel van de gebruiksaanwijzing beschrijft de inhoud van het PDF-rapport dat door PARKIWATCH wordt gegenereerd. Raadpleeg uw zorgprofessional voor de interpretatie van het rapport.

Dit deel van de gebruiksaanwijzing beschrijft de inhoud van het PDF-rapport dat door PARKIWATCH is gegenereerd. Raadpleeg uw zorgverlener voor de interpretatie van het rapport.

REPORT

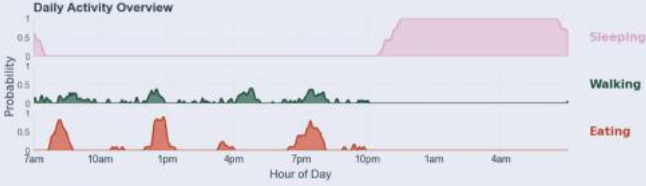


De volgende pagina's van het PDF-rapport behandelen ondersteunende digitale gezondheidsgegevens en NIET gevalideerde kinematische metingen. Dit betekent dat hoewel deze inzichten nuttige context bieden met betrekking tot uw dagelijkse activiteitsniveau, ze uitsluitend bedoeld zijn voor informatieve doeleinden.

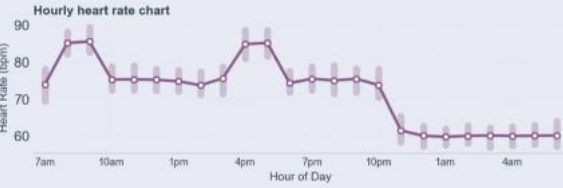


Supportive Digital Health Measures

Observation Period: Mar 18, 2025 - Mar 31, 2025



Daily Activity Overview. Three stacked panels — sleeping (top), walking (middle), eating (bottom) — share the same hour-of-day x-axis (07:00 → 07:00 next day) but each has its own 0-1 probability y-axis. For each hour across the last 14 days the curve height is the probability that the activity was detected at that hour (0 = never, 1 = always). The panels are independent — a single hour can have several activities detected at once — so they should be read side-by-side, not summed. Curves are Gaussian-smoothed for display.



Hour-of-day behavioural profile of the device-derived heart rate (bpm) across the last 14 days of the observation period. For each hour of day, heart-rate samples from all 14 days are pooled; the marker shows the median and the vertical bar spans the interquartile range (25th-75th percentile) of that pooled hourly distribution. Hours are shifted to a 07:00-06:00 (next day) axis to align with the Daily Activity Overview above.



Awake During Night. Brief mid-sleep awakenings detected within each main nightly sleep session (≥ 3 h; naps excluded) across the last 14 days. Each horizontal coloured segment is one awakening, drawn at its (night, hours-into-sleep) position — read across a row to see when during a given night the patient was briefly awake. The orange filled curve on the right-hand axis aggregates across nights: for each half-hour since falling asleep, it shows the fraction of nights that contained an awakening at that point, so peaks highlight the times when awakenings most commonly occur.

Snapshot of the past two weeks

Observation Period: Mar 18, 2025 - Mar 31, 2025

Steps
5,324
Average daily step count

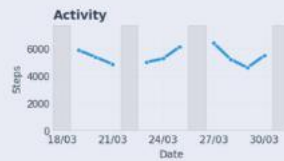
Sleep Reg Index (%)
89.0%
Day-to-day sleep consistency

HR during Night
61
Avg resting HR (23:00-06:00, bpm)

Sleep Eff Index (%)
91.8%
% of time in bed actually asleep

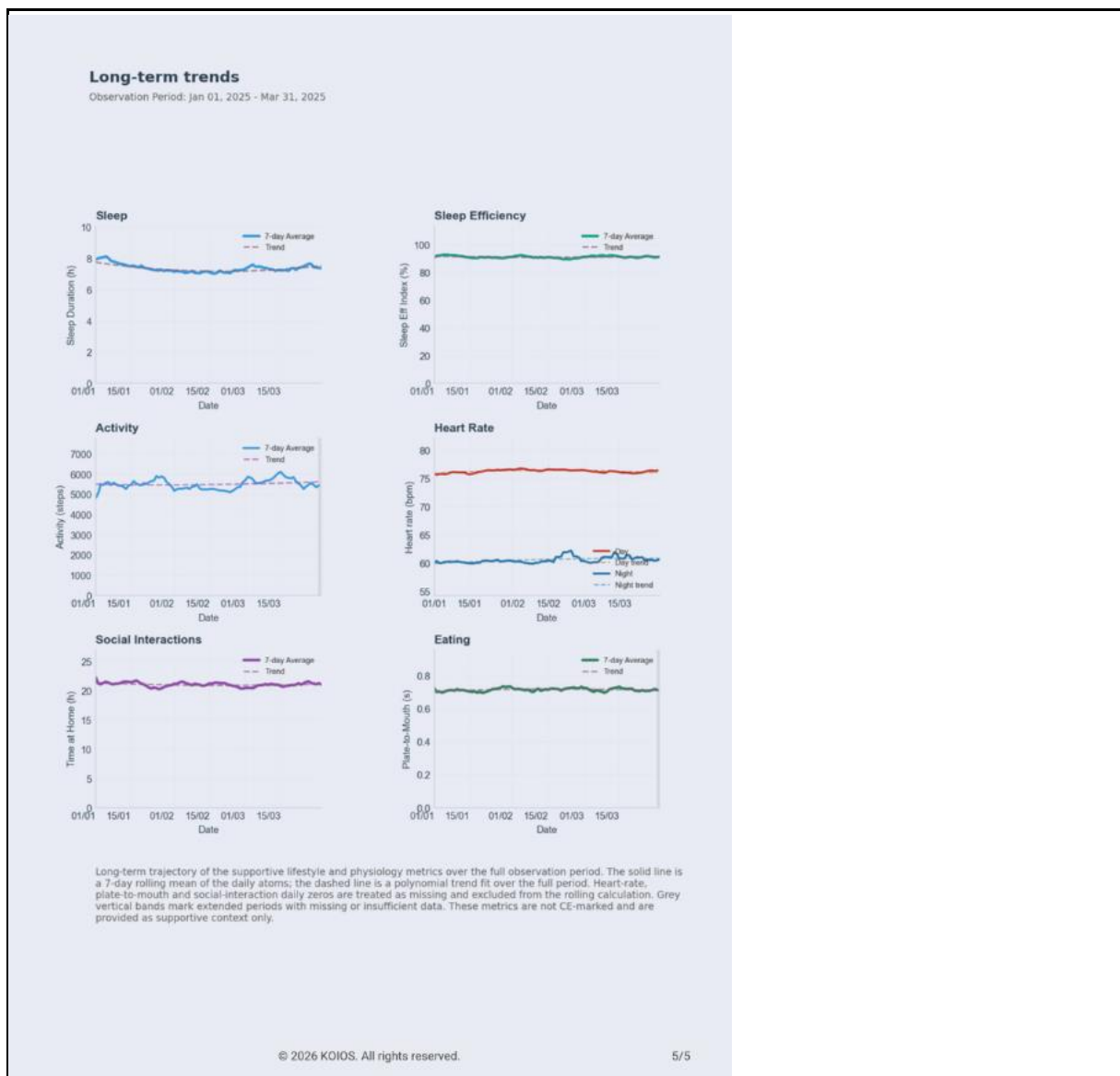
HR during Day
76
Avg HR during active hours (bpm)

Plate-to-Mouth (s)
0.70
Avg Plate-to-Mouth eating time



Daily values for the supportive lifestyle and physiology metrics over the preceding 14 days; each point is a per-day atom from the indicators store, plotted without further smoothing. Zero values for heart rate and plate-to-mouth eating time are treated as missing and rendered as gaps. The summary tiles above the charts show the mean or median of the same data across the 14-day window (see each tile's subtext for the exact aggregation). Grey vertical bands indicate days with missing or insufficient data. These metrics are not CE-marked and are provided as supportive context only.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0



Gevalideerde kinematische metingen

Deze pagina laat zien hoe uw gemiddelde dag er de afgelopen twee weken uitzag. De bovenste grafiek toont hoe tremor, bradykinesie en dyskinesie gedurende de dag toe- en afnemen. De donkere lijn geeft uw gebruikelijke niveau weer en de gearceerde band laat zien hoeveel dit van dag tot dag varieerde. De onderste grafiek toont per uur hoe vaak elk type beweging werd waargenomen, zodat u kunt zien wanneer uw symptomen het meest en het minst merkbaar zijn.

Raadpleeg altijd uw zorgprofessional over de interpretatie van de resultaten in dit PDF-rapport.

Overzicht van de afgelopen twee weken

Hier ziet u uw dagelijkse cijfers van de afgelopen twee weken, samen met een overzicht van de afgelopen maand. Het staafdiagram laat zien hoeveel uur u elke dag last had van milde, matige of ernstige symptomen. De onderste grafieken tonen de door het horloge gemeten

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

symptomen naast de wekelijkse vragenlijst die u zelf invult, zodat u kunt zien of uw beleving overeenkomt met wat het horloge registreert. Grijs balken markeren dagen waarop onvoldoende gegevens beschikbaar waren.

OPMERKING: De volgende pagina's van het PDF-rapport behandelen ondersteunende digitale gezondheidsgegevens en NIET gevalideerde kinematische metingen. Dit betekent dat hoewel deze inzichten nuttige context bieden over uw dagelijkse activiteitsniveau, ze uitsluitend bedoeld zijn voor informatieve doeleinden.

Ondersteunende digitale gezondheidsmetingen

Deze extra grafieken tonen uw dagelijkse routine, zoals slaap-, wandel- en eetgewoonten, uw hartslag gedurende de dag en de momenten waarop u 's nachts wakker bent geworden. Ze zijn bedoeld als achtergrondinformatie ter ondersteuning van uw digitale gezondheidsmaatregelen.

Samenvatting van de afgelopen twee weken (ondersteunende metingen)

Een korte samenvatting van uw leefstijlgegevens: stappen, hartslag overdag en 's nachts, de consistentie van uw slaapritme, hoe goed u daadwerkelijk in bed hebt geslapen en hoe snel u doorgaans eet. De kleinere grafieken laten zien hoe elk van deze gegevens van dag tot dag is veranderd. Ze bieden ondersteunende informatie, maar zijn geen gevalideerde kinematische metingen.

Langetermijntrends

Een langetermijnoverzicht van uw leefstijl: slaapduur, slaapkwaliteit, activiteit, hartslag (dag en nacht), thuis doorgebrachte tijd en eetsnelheid gedurende de afgelopen maand. De doorgetrokken lijn is het voortschrijdend gemiddelde, en de stippellijn laat zien of de waarden in de loop van de tijd stijgen of dalen. Net als op de vorige pagina's biedt deze informatie digitale gezondheidscontext, maar het zijn geen gevalideerde kinematische metingen.

Raadpleeg altijd uw zorgprofessional over de interpretatie van de resultaten in het PDF-rapport.

	Gebruiksaanwijzing	Documentnummer: GG DOC-437
		Revisie: 3.0

Revisiegeschiedenis

Versie	Datum van de laatste uitgave	Author	Beschrijving wijziging
1	22/05/2026	Konstantinos Kyritsis	Initiële uitgave
2	29/05/2026	Konstantinos Kyritsis	UDI-nummer toegevoegd aan "INFO-VENSTER" ("About box") -afbeelding
3	01/09/2026	Konstantinos Kyritsis	Informatie toegevoegd over het aanvragen van een papieren exemplaar van de gebruiksaanwijzing en over bijgewerkte normen; informatie toegevoegd over een bezoek aan de zorgverlener.

1.8 Ondersteuning

Bij technische problemen, terwijl het schrijven niet meer mogelijk is, kunt u contact opnemen met de Koios Care Support via de smartphone-verbinding met een "contact" in het menu of de laatste documenten.

1.8 Ondersteuning

Bij technische problemen, terwijl het schrijven niet meer mogelijk is, kunt u contact opnemen met de Koios Care Support via de smartphone-verbinding met een "contact" in het menu of de laatste documenten.